

機械器具 58 電動式骨手術器械 JMDN コード 70959010
管理医療機器


ワイヤードライバー

(WD-1)

【警告】

- 1) 刃物は専用の締め付け工具で締め付けること。
- 2) 使用前に刃物がしっかり取り付いていることを確認すること。
- 3) 長い刃物(キルシュナーワイヤー)を使用する場合は、必ずワイヤーガードを使用すること。
- 4) 機器に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、修理を依頼すること。

【形状・構造及び原理等】

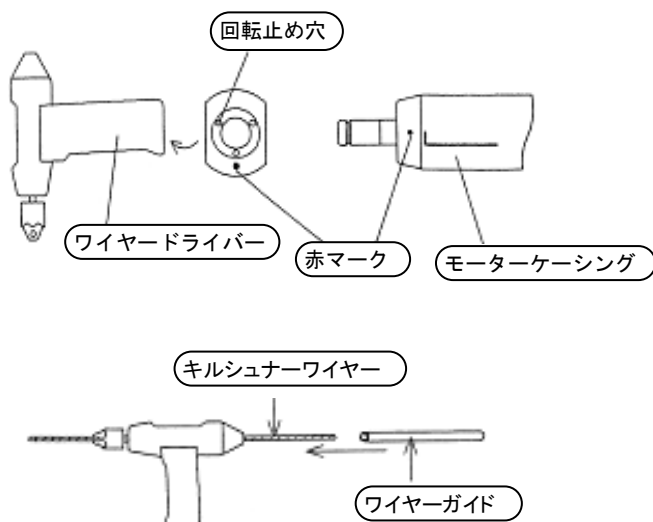

- 1) 全長 : 104mm
- 2) 質量 : 128 g
- 3) 使用モーター ME24 (減速モーター)

【使用目的・効能又は効果】

ハンドピースを取付け、骨の切削・穴あけ・固定を行う。

【品目仕様】

- 1) 使用回転数 2000min⁻¹以下
- 2) ツカミ能力 $\phi 0.5 - \phi 5.0$ mm の断続使用

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用環境条件

下記条件にて使用すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度	10-40 °C
相対湿度	30-75 %
気圧	700-1060 hPa

2. 操作方法

機器の詳細な操作方法及び使用方法は、使用前に必ず取扱説明書を参照すること。

1) 使用前の準備

- ① 刃物の取付け
- ② ハンドピースのモーターへの取付け

2) 使用前の点検

- ① ハンドピースとモーターの接続確認

② 空回転後刃物の取付け状態確認

3) 操作

- ① 回転のオン・オフ

4) 使用後の処理

- ① ハンドピースとモーターの取外し
- ② 刃物の取外し
- ③ 清掃・保守

【使用上の注意事項】

- 1) 刃物を取付ける際は、専用のチャックハンドルで締め付けること。
- 2) 長い刃物(キルシュナーワイヤー)を使用する場合は、必ずワイヤーガードを使用すること。
- 3) モーター回転中に、ハンドピースの着脱をしないこと。
- 4) モーター回転中に正逆回転の切換え操作をしないこと。
- 5) ハンドピースを落としたり、衝撃を与えたりしないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管場所の環境条件

下記条件にて貯蔵・保管すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度	-10-60 °C
相対湿度	10-90 %
気圧	700-1060 hPa

直射日光に長時間さらさないこと

2. 保管上の注意事項

- 1) 使用後は、必ず清掃後注油を行うこと。滅菌した場合は、滅菌パックに入れた状態で保管すること。
- 2) 長期保管した場合は、使用前に十分な点検を行ってから使用すること。

3. 耐用期間

製造の日から、正規の使用方法、保守点検を行った場合に限り7年間。(自己認証による)

【取扱上の注意】

熟練した者以外は機器を使用しないこと。

【保守・点検に係わる事項】

機器の詳細な保守・清掃・消毒・滅菌方法は、使用前に必ず取扱説明書を参照すること。

* 1. 清掃・消毒・滅菌

	○ : 適用可		× : 適用不可	
	清掃 中性洗剤	消毒 アルコール清拭	滅菌 EOG 滅菌	滅菌 高圧蒸気滅菌
ワイヤードライバー	×	○	○	○
チャックハンドル	×	○	○	○

2. 保守・点検

使用者による保守点検事項

頻度	内容(概略)
使用前	ワイヤードライバーとモーターの接続確認。
	刃物は、緩み無く取付けてあること。
	回転中の異音、振動確認
使用后	ワイヤードライバー外周部の清掃

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【包装】

包装単位：1 個口

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：長田電機工業株式会社
住所：〒459-8001
愛知県名古屋市緑区大高町字中道 11
TEL：052-621-3126
FAX：052-621-8310
ホームページ：<http://www.osada-electric.co.jp>

製造元：長田電機工業株式会社

取扱説明書を必ずご参照下さい。