

機械器具(32)医療用吸引器
管理医療機器 妊娠中絶用吸引器 32671000
「ニューサクセッションセット」付属品
(回転グリップ)


【警告】

- 本品は分解改造しないこと。
- 本品が破損した状態で使用しないこと。
- 本品の使用は訓練を受けた適正な医師の元で行うこと。
- 本品は未滅菌品である。必ず適切な方法で滅菌してから使用すること。


【禁忌・禁止】

- 本品は早期妊娠中絶手術を目的とし、作成されたものです。それ以外の用途では使用しないこと。
- 本品には確実な接続状態を維持できないものや、離脱が困難なものは接続しないこと。

【形状、構造及び原理等】

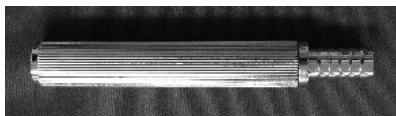

黄銅 クロームメッキ(JIS H 8617)

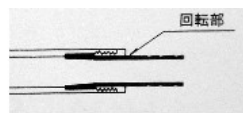

原理 吸引器と嘴管(吸引管)をつなぐグリップ、ローレット式回転部が360度回転するようになっている。

【使用目的又は効果】

オネストメディカル社製吸引器ニューサクセッションセットの付属品でニューサクセッション吸引器と嘴管(吸引管)のジョイントとして使用する。

【使用方法等】

使用方法の詳細はニューサクセッションセットの取扱説明書参照

- 1 吸引器にチューブ、回転グリップ、嘴管を取り付ける。(妊娠月数に応じて嘴管を選択する。)
- 2 選択した嘴管を子宮腔内へ挿入し、嘴管についている減圧弁を指で塞ぎ機械のスイッチを入れ陰圧を上げる。
- 3 陰圧が上ったら、嘴管の減圧弁を開放し、内容物を吸引する。
- 4 2、3の操作を繰り返し方向を変えて行う。
- 5 嘴管の減圧弁を開放し、陰圧を下げた常態でキュレタージュする。

【使用上の注意】

<重要な基本的事項>

医師免許取得者以外は使用しないこと

使用上の注意の詳細はニューサクセッションセットの取扱説明書参照

- 1 変形、破損、損傷、亀裂、接続などの異常がないことを確認すること
- 2 ローレット部分がきちんと回ることを確認すること
- 3 使用前にきちんと洗浄、滅菌すること。
オートクレーブ 120℃ 20 分間
又は 135℃ 10 分間
- 4 圧がきちんと上るかを確認すること
※本品に変形などの破損がある場合はエア漏れ等の原因となる。
- 5 金属たわし、クレンザー(磨き粉)などは器具の表面が損傷するので洗浄時に使用しないこと
- 7 洗浄の際、強アルカリ、強酸性の洗剤及び消毒剤は使用しないこと。金属が腐食することがある。
- 8 器具の洗浄には必ず医療用洗剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないこと
- 9 本品は清潔に保つこと。汚れが付着したままだと回転しない等の故障の原因となる。
- 10 本品には落下などの外的衝撃を与えないこと。衝撃により、形が変形し、嘴管との接続が悪くなり、吸引圧が上がらない等の支障が出る可能性がある。

がある。

- 11 本品を廃棄する際は、感染等を防ぐため、地域の条例や病院の規則に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

- 1 常温、常圧の室内で保管すること。
- 2 水のかからない場所に保管すること。
- 3 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などによる悪影響のない場所で保管すること。
- 4 機械的ストレスが加わった状態で保管しないこと。
- 5 洗浄、殺菌、消毒後は水分を除去し、必ず乾燥させてから保管すること。
- 6 滅菌の際は、本品が十分乾燥していることを確認すること。
- 7 滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること

【保守、点検にかかわる事項】

- 1 使用後は出来るだけ早く血液、体液組織等の汚物を除去し、職業感染予防のために洗浄、消毒すること。
- 2 汚物除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し適正な濃度で使用する。洗剤の残留がないよう十分すすぎをし、乾燥させること。
- 3 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり、稼動部の動き等に異常がないかを点検すること。
- 4 異常が見られた場合は使用せずに新しいものに交換すること。

【主要文献及び文献請求先】

参考文献

妊娠初期の人工妊娠中絶法 杉山二郎 先生
新しい吸引中絶法について 野田吉隆 先生

製品に関するお問合先

製造販売元: 株式会社オネストメディカル

〒133-0043 東京都江戸川区松本1-2-2

電話: 03-3655-3629

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: 株式会社オネストメディカル

〒133-0043 東京都江戸川区松本1-2-2

電話: 03-3655-3629

製造元 : 株式会社オネストメディカル