

器 76 医療用吸入器
一般医療機器 非加熱式ネブライザ 35457000
ネブライザーポンプ ミニポン

【警告】

<使用方法>



- ・吸入療法は、必ず医師の指導のもとで行ってください。

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- ・本装置を 20 分以上連続で作動させないでください。本装置上部の金属部分が過熱して危険です。
- ・ビニールホースは、煮沸消毒できません。

【形状・構造及び原理等】

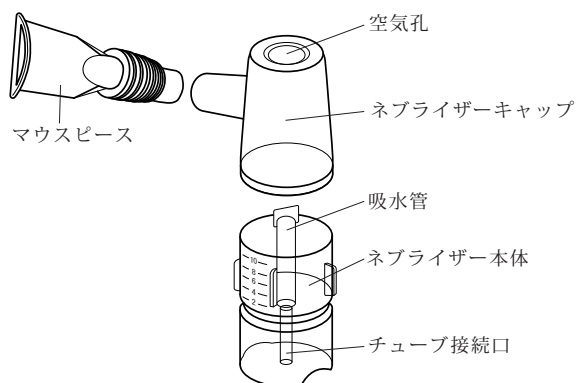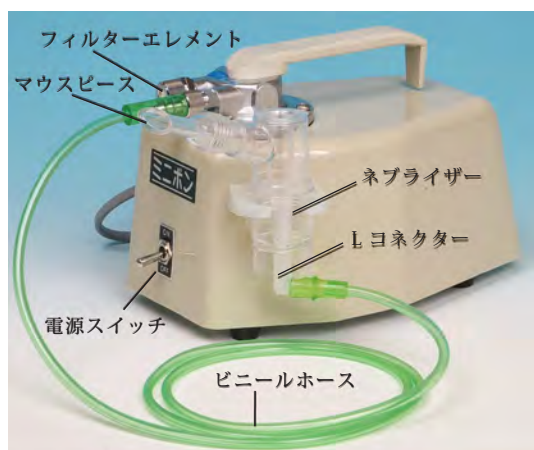

1. 構成

(1) 吸入器本体

(2) 付属品

- ・ネブライザー : 1
- ・マウスピース : 1
- ・Lコネクター : 1
- ・ビニールホース : 1
- ・吸気フィルター : 2

2. 機能

(1) 仕様

排気流量: 12L/分

締切圧力: 196KPa

ポンプ形式: ダイアフラムポンプ

モーター: コンデンサー起動モーター

3. 機器の分類

(1) 電撃に対する保護の形式: クラスⅡ機器

(2) 電撃に対する保護の程度: B 形機器

4. 電気的定格

- ・電源電圧: AC100V
- ・電源周波数: 50/60Hz
- ・電源入力: 約 50VA

5. 寸法及び重量

- (1) 寸法: 235mm(W)×150mm(D)×155mm(H)
- (2) 重量: 3.5Kg

作動・動作原理

ダイヤフラム式ポンプより吐出される圧縮空気をを用いてジェット式で薬液を噴霧する。

【使用目的又は効果】

使用目的

本装置は、抗アレルギー薬、気管支拡張剤、喀痰融解剤等の吸入薬を噴霧するための電動式吸入器です。

【使用方法等】

1. 準備

- (1) ビニールホースの金具をポンプのネジ部 **出↑** に確実に取り付けます。
- (2) ネブライザーのキャップを外し、ネブライザー本体に医師の処方による薬液を適量入れます。
- (3) ネブライザー本体にキャップをしっかり取り付けます。
- (4) ネブライザー本体にマウスピースを取り付けます。
- (5) ビニールホースの L コネクターをチューブ接続口に差し込みます。
- (6) ポンプの電源スイッチが OFF になっていることを確認して、電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。

2. 吸入方法

- (1) ポンプの電源スイッチを ON にします。
- (2) ネブライザーより薬液が噴霧されていることを確認します。
- (3) 吸入を始めます。

吸入方法につきましては必ず医師の指導に従ってください。

3. 使用後の後片づけ

使用後のネブライザーはノズルの目詰まり防止と清潔保持のため次の手順で分解、洗浄、乾燥して組み立てた後に保管してください。

- (1) 電源スイッチを OFF にします。
- (2) 電源コードのプラグをコンセントから抜きます。
- (3) ネブライザーから L コネクターを外します。
- (4) ネブライザーキャップからマウスピースを外します。
- (5) ネブライザー本体からキャップを外し、吸水管を抜きます。
- (6) ネブライザー本体、キャップ、吸水管、マウスピースは流水またはぬるま湯で洗浄してください。
- (7) 消毒、滅菌する場合は、煮沸消毒、オートクレーブ (120℃) が可能です。
- (8) 洗浄、消毒後は、清潔な乾いたガーゼ等で拭くか、自然乾燥させた後、組み立てた状態で保管してください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・水のかからない、直射日光の当たらない、水平で安定した場所で使用して下さい。
- ・定格電源 (AC100V) 以外の電源で使用しないでください。
- ・電源コードをコンセントから抜くときには、必ずプラグを持って抜いてください。
- ・電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。また、重い物を載せたり挟み込んだりしないでください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- ・電源プラグにほこりが付着しないように定期的に清掃してください。
- ・使用中に異常音、異臭がした場合は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 保管方法
 - ・水のかからない、直射日光の当たらない、水平で安定した場所に保管してください。
 - ・強い電磁場が発生する周囲には保管しないでください。
 2. 保管環境条件
 - ＊ ＊ 温度：-15 ～ 40℃
 - 相対湿度：10 ～ 95%（結露なきこと）
 3. 使用環境条件
 - ＊ ＊ 温度：5 ～ 35℃
 - 相対湿度：30 ～ 75%
 - 気圧：700hPa ～ 1060hPa
- ＊ 耐用期間・使用期間
- ＊ 耐用期間：10 年（当社基準に基づく期間）

【保守点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・本体表面の汚れは、柔らかい布に中性洗剤を湿らせて拭き取ってください。研磨剤の入った洗剤及びトリクロロエチレン、アルコールは、使用しないでください。
- ・ビニールホースは、ヒビテン、オスバンなどの消毒液に漬けてから流水またはぬるま湯で消毒液をよくおとしてから自然乾燥させてください。
- ・フィルターエレメントに塵等がついたら取り除き、極端に黒く汚れてきたら新しい物と交換してください。

＊ 業者による保守点検事項

- ＊ 1. 1 年毎の点検
 - 動作点検、劣化部品の交換。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：オリジン医科工業株式会社
製造業者：オリジン医科工業株式会社