



DSフラスコ

【形状、構造及び原理等】


1) DSフラスコⅠ外観図

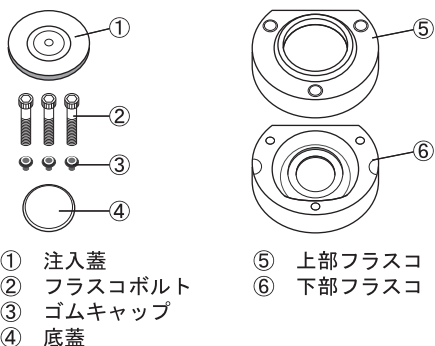

2) DSフラスコⅡ外観図

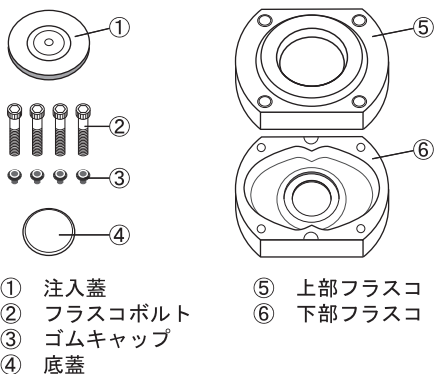

* 3) DSフラスコⅡ NEO 外観図

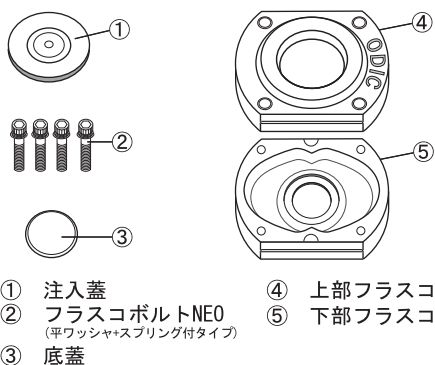

【使用目的又は効果】

重合用補綴物を成形する型を保持する容器をいう。

【使用方法等】

埋没用石膏を適切に計量・練和し、形成完了した蠟義歯を埋没する。
※詳細な操作方法につきましては、DSシステムに付属のDSガイドブックをご参照ください。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
- ・使用前には必ず、DSシステムに付属のDSガイドブックを一読すること。

- **・締め付け時に石膏クズなどの異物が介在しないよう、締め付け前に清掃を徹底すること。
異物が混入した場合、製品寿命を著しく短縮するおそれがある。
- **・電気ドライバーを「低速」「トルク10」に設定し、仮止めを行い、その後、六角レンチまたはトルクレンチを用いて、ゆっくりと本締めを行うこと。
最大トルク値は29 [N・m] であるため、これを超える締め付けを行わないこと。
製品の品質保持および安定した作業性を確保するため、トルクレンチを使用することを推奨する。
- ・本品は、添付文書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

** 2) 対応ボルトについて

- ・本品「DSフラスコシリーズ」は、モデルにより対応するフラスコボルトが異なるため、誤った組み合わせで使用しないこと。
誤使用は締結不良や破損の原因となるおそれがあるため、下表を確認のうえ、必ず対応ボルトを使用すること。

フラスコ名	対応ボルト名	備考
・DSフラスコⅠ ・DSフラスコⅠL	フラスコボルト フラスコボルトNEO	新・旧フラスコボルト使用可
・DSフラスコⅡ ・DSフラスコⅡL	フラスコボルト フラスコボルトNEO	新・旧フラスコボルト使用可
・DSフラスコⅡ NEO ・DSフラスコⅡL NEO	フラスコボルトNEO	新フラスコボルトのみ使用可 (旧ボルトは使用不可)

3) 重要な基本的注意

- ・本品を扱う際は、落下による破損と人体への影響を避けるため、平らで安定した場所で操作を行うこと。
- ・本品の破損につながるため、掘り出しの際は必要以上の衝撃を加えないこと。
- ・本品はDSシステム専用ですので、本品の破損と人体への影響を避けるため、DSシステム以外で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

- ・本品は、傾斜、振動、衝撃を避けて保管すること。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：オーディック株式会社

住 所：〒553-0003

大阪府大阪市福島区福島7-14-20

大阪みづほビル内

電 話 番 号：06-6451-7385

受 付 時 間：9:00～17:00(土・日・祝を除く)

DSガイドブックを必ずご参照ください。