

DSセリオS

* 【警告】

<一般的な警告>

1. 熱処理の終了したDSフラスコを本機にセットする際は、必ず乾いた軍手を着用すること。[火傷の原因になるため]
2. 注入ピストン作動時は、手や異物を近付けないこと。また、注入ピストンがゆるんだ状態で使用しないこと。[けがや事故の原因になるため]
3. 表示の仕様で使用する。また、本機のカバーやねじは外さないこと。[火災、感電、事故の原因になるため]

** <併用医療機器と専用材料>

1. 専用材料の中でも、『DSガードストーンL』と『DSレジン』は必須材料であり、最低必要条件であるため、他の製品で代用してはならない。
[完成義歯の品質と品位に影響が出たり、患者の健康を損ねる可能性があるため。]
[[使用方法等]1)●DSシステム“必須材料”の項参照]

2. 本機を使用するDSシステムは3種の機器とDSフラスコにより構成されているシステムであるため、指定外の機器にて代用、またはいずれかの機器が欠けていた場合、義歯としての品質と品位が担保されない。他の機器と組み合わせて使用しないこと。
[[使用方法等]1)●併用機器●併用器具の項参照]


** <操作に関する警告>

1. 本機を安全に使用するために、本機付属の取扱説明書とDSシステムに付属のDSガイドブックを必ず読み厳守すること。また、複数人で使用する場合は、指導を行い、安全に正しく使用できることを確認してから使用させること。

* 【形状、構造及び原理等】

1)装置外観図

本体寸法：幅268×奥行310×高さ456mm
本体重量：28kg

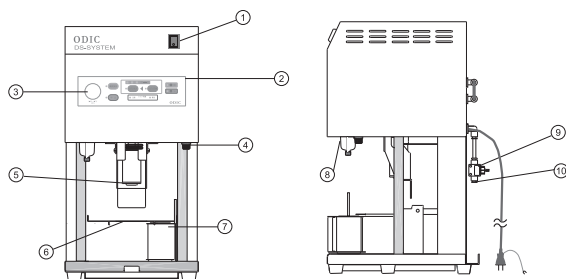

- | | |
|------------|------------|
| ① パワースイッチ | ⑥ ガイドテーブル |
| ② 操作パネル | ⑦ レジン圧縮台 |
| ③ 圧力計 | ⑧ エアフィルター |
| ④ ヒューズボックス | ⑨ メンテバルブ |
| ⑤ 注入ピストン | ⑩ エアホース接続口 |

2)動作原理

- ・⑩に接続したホースから供給された圧縮空気を本体内部で所定圧に調整する。
- ・②の操作で所定圧を電氣的にコントロールし、⑤を作動させる。
- ・⑤の作動により、床用材料を圧縮または注入する。

3)仕様

定格電圧：AC100V 使用流体：空気(不活性ガス)
定格周波数：50/60Hz 最低必要圧力：0.55Mpa
定格消費電力：10W 最高必要圧力：1.0Mpa
周囲温度：-5～60℃(凍結なきこと)

* 【使用方法等】

** 1) 組み合わせて使用する併用医療機器と専用材料

●DSシステム“必須材料”

販売名/用途	医療機器届出番号
DSレジン/ 特殊製法のDSシステム専用レジン	20700BZZ00689A01
DSガードストーンL/ DSシステム専用の1・3次埋没材	27B3X00046000029

●併用機器

販売名/用途	医療機器届出番号
DSカルマS/自動均一加熱器	27B3X00046000025
DSレスタS/自動レジン温度管理器	—

●併用器具

販売名/用途	医療機器届出番号
DSフラスコ/埋没用フラスコ	27B3X00046000012

●DSシステム専用材料

①チェアーサイド

※オーディック社製推奨品

販売名/用途	医療機器届出番号
ピットリストーン/ 膨張率0.07%の低膨張模型用硬質石膏	27B3X00046000005
ユッタリストーン/ 膨張率0.32%の高膨張模型用硬質石膏	27B3X00046000006

②ラボサイド

※オーディック社製推奨品

販売名/用途	医療機器届出番号
ホールディーストーン/2次埋没材	27B3X00046000004
DSワックスブルー/ワックスブルー	27B3X00046000007
DSレジンセパ/レジン分離剤	—
ストーンセパ/石膏分離剤、他	—

2)設置方法、組立方法

- ・本機の取付、設置は、当社専門のスタッフまたは、当社指定業者が行う。
- ・傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などに対する安定状態に注意し、設置すること。

3)使用方法

付属の取扱説明書とDSシステムに付属のDSガイドブックを使用前に必ずお読みください。

1. 電源プラグを差込み、パワースイッチを押して電源を入れる。
2. 餅状レ진을充填したレジン注入シリンダをレジン圧縮台に乗せる。
3. レジン圧縮のボタンを押す。
4. レジンの圧縮完了後、レジン圧縮台を外す。
5. フラスコをセットし、レジン注入ボタンを押す。
6. レジン注入完了後、フラスコを取出し、シリンダを外す。
7. パワースイッチを押し、電源を切る。

取扱説明書とDSガイドブックを必ずご参照ください。

DSセリオS

*【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・本機を扱う際は、落下による破損と人体への影響を避けるため、平らで安定した場所で操作を行うこと。
 - ・本機使用中は、電源プラグを抜かないこと。
 - ・本機使用中は、本体を動かしたり衝撃を加えたりしないこと。
 - ・本機はDSシステム専用ですので、本機の破損と人体への影響を避けるため、DSシステム専用器材以外は使用しないこと。
 - ・本機は、添付文書に記載の用途以外に使用しないこと。
 - ・本機は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ※本機の詳細な注意事項については、付属の取扱説明書P2～P3に記載の「安全上のご注意」の項を使用前に必ず読むこと。

*【保管方法及び有効期限等】

1)貯蔵・保管方法

- ・本機は、湿度・ほこり・水のかからない場所に保管すること。
- ・本機は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

2)耐用期間

製造出荷後、正規の保守点検を行った場合に限り、7年間(自己認証による)。

*【保守・点検に係る事項】

注意：本体カバーを開けないこと。内部には使用者が整備できる部品はない。

[使用者による保守点検事項]

毎回、使用前に付属の取扱説明書のP8～P9に記載の「日常の点検・お手入れ」の項を必ず読み、保守点検を行うこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：オーディック㈱

住 所：〒553-0003

大阪府大阪市福島区福島7-14-20

大阪みづほビル内

電 話 番 号：06-6451-7385

** 受 付 時 間：土・日・祝を除く9:00～17:00

(受付16:30終了)