

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 脊椎手術用器械 (JMDN コード : 70963001)

販売名 : AFNT11 INST セット

【警告】

- ・本品は、未滅菌品である為、使用前には必ず適切な方法で滅菌してから使用すること。


【形状・構造及び原理等】

- ・製品外観
- ・リーミングガイドスリーブ




製品名	製品番号	JAN コード
AF11 リーミングガイドスリーブ 7MM	JS17024007	4560436517610
AF11 リーミングガイドスリーブ 8MM	JS17024008	4560436517627
AF11 リーミングガイドスリーブ 9MM	JS17024009	4560436517634
AF11 リーミングガイドスリーブ 10MM	JS17024010	4560436517641
AF11 リーミングガイドスリーブ 11MM	JS17024011	4560436517658
AF11 リーミングガイドスリーブ 12MM	JS17024012	4560436517665

- ・ダブルリーミングガイドスリーブ

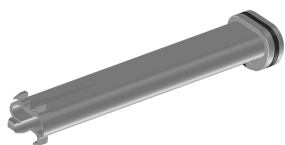


製品名	製品番号	JAN コード
AF11 D リーミングガイドスリーブ 6MM	JS17024106	4560436517672
AF11 D リーミングガイドスリーブ 7MM	JS17024107	4560436517689
AF11 D リーミングガイドスリーブ 8MM	JS17024108	4560436517696

- ・インサーター

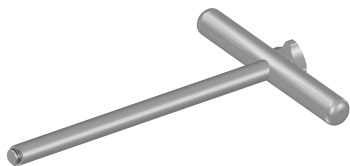


製品名	製品番号	JAN コード
AF11 スモールインサーター	JS17024306	4560436518167
AF11 ミディアムインサーター	JS17024308	4560436518174
AF11 ラージインサーター	JS17024310	4560436518181

- ・AF11 スリーブキャップ

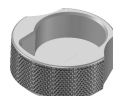

シングル

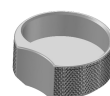

ダブル


製品名	製品番号	JAN コード
AF11 スリーブキャップ シングル	JS17024501	4560436519119
AF11 スリーブキャップ ダブル	JS17024502	4560436519126

- ・AF11 リーマー



製品名	製品番号	JAN コード
AF11 リーマー 6MM	JS17024206	4560436519133
AF11 リーマー 7MM	JS17024207	4560436519140
AF11 リーマー 8MM	JS17024208	4560436519157
AF11 リーマー 9MM	JS17024209	4560436519164
AF11 リーマー 10MM	JS17024210	4560436519171
AF11 リーマー 11MM	JS17024211	4560436519188
AF11 リーマー 12MM	JS17024212	4560436519195

- ・AF11 インプラントホルダー

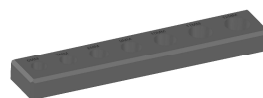

製品名	製品番号	JAN コード
AF11 インプラントホルダー	JS17024503	4560436519201

- ・AF11 ボーングラフトタンブ



製品名	製品番号	JAN コード
AF11 ボーングラフトタンブ	JS17024504	4560436519218

- ・材質 : ステンレス鋼、チタン合金

- ・本添付文書に該当するインスツルメントの製品番号、サイズ等に関しては本体に記載。

・原理

本品を用いて、指定されたインプラントの設置等の補助を行う。

【使用目的又は効果】

- ・本品は、脊椎固定術等の脊椎手術に用いる手動式の手術器械で、再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用方法

本品は、指定されたインプラントの設置の際に使用する手術器械であり、専用の手術器械と併用する。詳しくは使用するインプラントの手技書を参照すること。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 本品は未滅菌である為、使用前に必ず適切な方法で滅菌してから使用すること。（【保守・点検に係る事項】の項参照）
- 2) 折損、曲り等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
- 3) 使用後は直ちに点検し、破損、折損等が見つかった場合は破損片が体内に遺残していないか調べ、遺残していた場合は摘出等適切な処置を施すこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 電気メスをを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷する危険性があり、又、器械の表面を損傷するので、本品とともに電気メスを使用する場合は、十分に注意して使用すること。
- 2) 使用前に器械が正常機能するか、キズ・変形等により正常機能を阻害する様な形跡がないか確認すること。

* 3) 本品がハイルスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。

* 4) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

2. 相互作用

- ・併用禁忌（併用しないこと）

弊社が指定した製品以外との併用はしないこと。〔設計・開発方針が異なるため、適合しないおそれがある。〕

3. 不具合・有害事象

本品の使用により以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。不具合・有害事象が発生した場合は使用を中止し、適切な処置を行うこと。

1) 重大な不具合

- ・本品の変形、折損、及び破損

2) 重大な有害事象

- ・不十分な滅菌による感染症

3) その他の有害事象

- ・本品の破損、或いは機能不全による手術時間の延長
- ・本品の破損、或いは誤使用による手術従事者の受傷

【保管方法及び有効期間等】

- ・保管方法

水濡れ、直射日光、高温、多湿を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後の処理（洗浄）

- 1) 本品使用後は、出来るだけ早く洗浄、すすぎ等の汚染除去を行い、血液等異物が付着していないことを確認すること。
- 2) 分解が可能な部分は分解して異物除去を行うこと。
- 3) 可動部の汚染物除去は異物が残りやすい為、注意すること。
- 4) 汚染物除去に用いる洗剤は、医療用中性洗剤等、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用するこ
- 5) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。
- 6) 洗浄にはやわらかいブラシ等を使用し、金属性たわし、クレンザー（磨き粉）は器具の表面が損傷するので汚染除去及び洗浄時の使用はしないこと。
- 7) 超音波洗浄装置等を使用するときには、洗浄時間、手順等は使用する装置の取り扱い説明書を遵守し、器具の隙間部等に異物などが無いことが確認できるまで洗浄すること。
- 8) 洗浄装置（超音波洗浄装置等）を使用するときには、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 9) 洗浄後は腐食防止のために直ちに乾燥すること。

2. 使用前の処理（日常点検及び滅菌）

- 1) 器具が正常に作動することを確認すること。
- 2) キズ、割れ、有害なまくれ、さび、ひび割れ、接合不良等の不具合がないか、外観検査や可動確認等を実施すること。
- 3) 可動状態及び、磨耗等による形状変化など、本来の機能が発揮されない状態では、交換が必要になるので使用を中止し、復旧させること。
- 4) 下記条件又は、 10^{-6} 以下の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行うこと。

（推奨滅菌条件：高圧蒸気滅菌の場合）

温度	時間
115～118℃	30 分間
121～124℃	15 分間
126～129℃	10 分間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社 オーミック

電話番号 077-554-1871

〔販売業者〕

メドトロニックソファモアダネック株式会社

電話番号 03-6774-4911（代）