

機械器具 77 バイブレーター
管理医療機器 家庭用電気マッサージ器 34662000

プチリラク


【禁忌・禁止】

- 次の人は本製品を使用しないでください。
 - 医師からマッサージを禁じられている人。
 - 例 血栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症などの治療を受けている人
- 次の方は本製品をご使用前に必ず医師の相談を受けてください。
 - ペースメーカーなど体内埋め込み型医用電気機器を使用している人
 - 悪性腫瘍のある方
 - 皮膚に外傷のある人
 - 心臓に障害のある人
 - 妊娠している方および産後直後の方
 - 糖尿病などによる高度な末梢循環からくる知覚障害のある方
 - 皮膚に創傷のある人
 - 安静を必要とする人
 - 体温 38℃以上(有熱期)の人
 - 骨粗しょう症の人および脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど急性疾患の人
 - 脊椎に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人
 - その他、医療機関で治療中の人
- 他の治療器と同時に使用しないでください。
- 修理・分解・改造をしないでください。
- 10分以上の連続したご使用は避けてください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本装置は、振動子を持ったモーター、電源スイッチ、電池を内蔵した本体ケースと、直接身体に接触する施療部により構成される。

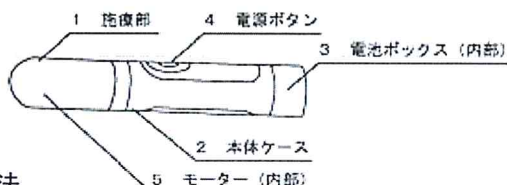

製品本体寸法

外径 25×長さ 144mm 本体材質 ABS樹脂
使用電池 単3乾電池×1個(電池別売)
電源 DC1.5V ー
定格電流 0.5A

2. 有害な水の侵入に対する保護等級 IPX7

3. 原理

動作原理は、電源ボタンが押されることによって、モーターに通電が開始しシャフトが回転する。シャフトに取り付けられた振動子により振動が発生する。
電源ボタンによって、電源の入/切をおこなう。

4. 品目仕様等

(詳細は取扱説明書を参照すること)

性能: 振動回数 毎分 4,900回 ±10%

【使用目的又は効果】

あんま、マッサージの代用とし、一般家庭でのマッサージに使用する機器である。

【使用方法】

(詳細は取扱説明書を参照すること)

・使用前

- (1) いつも本体を清潔にする。
- (2) 本体に+、-の極性に注意して電池を入れる。
- (3) 本体に電源を入れる。その際に、Oリングに破損等がないこと、ほこり等の異物が付着していないことを確認する。
- (4) 本体の施療部を患部にやさしくあてる。

・使用中

- (1) 本体手に持ち、施療部を患部に接触させたまま保持する。

・使用后

- (1) 施療部を患部から離す。
- (2) 電源を切る。
- (3) 汚れをふき取り、清潔にする。
- (4) 高温多湿の場所を避け室温で、Oリング表面にほこり等の異物が付着しない状態にし保管する。
長期間使用しない場合は、必ず電池を外す。

【使用上の注意】

・使用前

- 本体に破損やひび割れがないことを確認する。
- ご使用前に手に持った状態で、振動が発生するか確認してから使用する。
- 本製品をしばらく使用しなかった後でご使用になる場合は、振動が発生するか安全に作動することを確認してから、使用する。
- Oリングに破損等がないこと、ほこり等の異物が付着していないことを確認する。

・使用中

- 10分以上の連続したご使用は避ける。
- 機器に故障が発見された場合には、使用を直ちに中止し、電源を切る。
- 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止する。
- 本製品を使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門家に相談する。
- 浴室など水回りで使用する際は、使用前に電池蓋が確実に閉まっていることを確認する。
- 浴槽内でのボタン操作をしない。
- 落下など強い衝撃を与えない。
- 本製品は屋内専用のため屋外で使用するしない。
- 小さなお子様や乳幼児には使用させない。また、本体の上に乗って遊んだり、本体に乗ったりさせない。
- 火気・熱気の近く、エアコンの風が直接あたるところ、直射日光のあたるところでは、使用しない。

・保管

- 小さなお子様、乳幼児の手の届かないところに保管する。
- 長期間(80日以上)ご使用にならない場合は、衛生的に保ち電池を取り外し湿気が少なく極端な高温・低温にならない場所に保管する。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- ・直射日光が当たる場所や高温・多湿の場所は避けること。
- ・室温で保存すること。

2. 使用期間

5 年

※適正な使用環境と維持管理の基に、適切な取り扱いで本来の用途に使用された場合、設計仕様書に記された機能及び性能を維持し、使用することができる標準的な使用期間を意味する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社オーム電機

電話 048-992-2735

外国製造所：シャーマンイスパルグループ 株式会社
XIAMEN EASEPAL GROUP CORP

【取扱い上の注意】

- 本製品が故障した場合は、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡する。
- 本製品を廃棄する際は、お住まいの地方自治体の指示に従って廃棄する。
- お手入れをする際は、水または中性洗剤を柔らかい布に含ませて、かたく絞ってからやさしく拭く。その後、乾いた柔らかい布で拭く。シンナー・ベンジン・アルコール・クリーナーなどは絶対に使用しない。

・電池について

- 電池を廃棄する際は、本製品から電池を取り外しお住まいの地方自治体の指示に従って廃棄する。
- 万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察・治療を受ける。
- 万一、電池の液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流す。
- 電池の極性（＋・－）を正しく入れる。
- 必ず新品の電池と交換する。
- 電池交換の際は、新品の電池と交換する。
- 電池を火中に入れたり、加熱、水没させない。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 長期間使用しなかったときは、使用前に清潔な状態にし、点検（電源が入る等）をしてから使用してください。
- (2) 汚れは、中性洗剤又はアルコールをしみ込ませた布でよく拭いてください。

取扱説明書を必ずご参照ください。