

ビデオアダプター

(ビデオアダプター A10-T1、ビデオアダプター A10-T2)

【禁忌・禁止】

使用方法

本製品をオートクレーブ殺菌すると、部品が変形、破壊し、使用できなくなるので、オートクレーブ殺菌しないこと。

【形状・構造及び原理等】


構造・構成ユニット

1.構成

ビデオアダプター A10-T1
ビデオアダプター A10-T2

2.主要部分名称

外観図、主要部分の名称

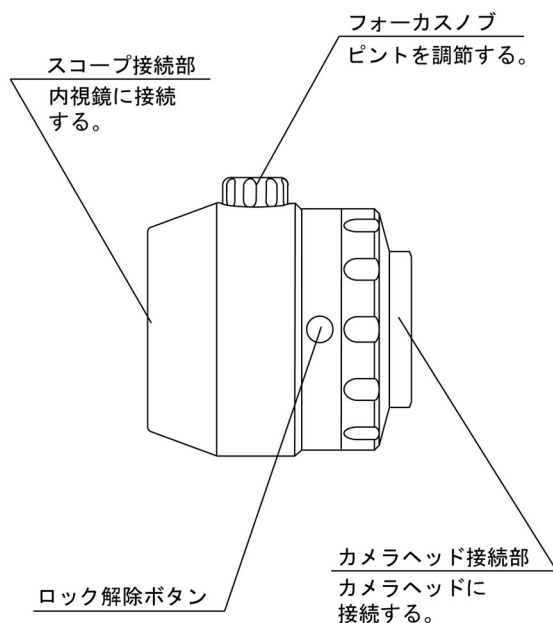

3.仕様

項目	仕様
撮影光学系	撮影倍率 T1 GIF-Q20 と組み合わせた時、モニターの縦辺に対し、像の大きさは約 90%
	T2 BF-30 と組み合わせた時、モニターの縦辺に対し、像の大きさは約 90%
	ピント調整 各種スコープに対し、ピント調整可能
スコープ接続部	連結形式 OES 専用バヨネットマウント
カメラヘッド接続部	連結方式 特殊ねじマウント
	回転機構 UP 方向出し可能
防水性	水密方法 カメラヘッドと接続して防水性を有する
消毒性	清拭 消毒用エタノールによる清拭が可能
	消毒液浸漬 各種消毒液への短時間浸漬が可能
	ガス滅菌 エチレンオキシドガスによる滅菌が可能
その他	寸法 全長 50mm
	全幅 50mm

作動・動作原理

接続された内視鏡の光学像を、内蔵された光学系によって伝送し、同じく接続されたカメラヘッド内の撮像素子上に結像させる。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、内視鏡用カメラヘッドと内視鏡の接続を可能にするために用いることを目的とする。

【使用方法等】

- 1.洗浄、消毒（または滅菌）を行う。
- 2.カメラヘッドと接続し、カメラヘッドとの位置合わせをする。
- 3.内視鏡、その他周辺機器を接続する。
- 4.モニター上で内視鏡画像のフォーカス調整をしたのち、モニター観察をする。
- 5.使用後、洗浄、消毒（または滅菌）をする。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1.本製品は、出荷前に消毒、滅菌していないため、使用前には、『取扱説明書』に従って、洗浄、消毒（または滅菌）をすること。また、使用後は、『取扱説明書』に従って、洗浄、消毒（または滅菌）をしてから保管すること。
- 2.光源装置の観察光量を最大に設定して使用した場合、被写体へ長時間スコープ先端部を近接するとやけどするおそれがある。近接観察する場合には光量をできるだけ下げた状態で観察すること。
- 3.本製品を使用するにあたって、無理な力での操作はしないこと。

不具合

その他の不具合

画像異常、故障、破損

有害事象

その他の有害事象

感染、やけど

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

使用後は、『取扱説明書』に従い、洗浄、消毒、滅菌および保管すること。

耐用期間

本製品の耐用期間は製造出荷後（納品後）6 年とする（自己認証（当社データ）による）。

なお、この年数は耐用期間内に本添付文書や『取扱説明書』に示す使用前点検および定期点検を実施し、点検結果によって修理またはオーバーホールが必要な場合にはそれらを実施する等の適正使用をした場合の年数である。

【保守・点検に係る事項】

洗浄、消毒、滅菌方法

- 1.毎症例後必ず洗浄、消毒（または滅菌）を行うこと。なお、手順及び条件は、『取扱説明書』の記載に従うこと。
- 2.『取扱説明書』に記載の、洗浄、消毒、滅菌に使用できる薬剤を使用すること。それ以外の薬剤については、オリンパスに問い合わせること。
- 3.消毒、滅菌前に機器が十分に洗浄されていないと、消毒、滅菌効果が得られない。各症例直後でかつ消毒、滅菌前に十分に洗浄すること。
- 4.外表面に消毒液が残留しないように水で十分にすすいで除去すること。すすいだ後は、十分に乾燥させること。
- 5.本製品をオートクレーブ滅菌すると、蒸気が浸入し、画像曇りなどの異常が発生し、使用できなくなるので、オートクレーブ滅菌しないこと。
- 6.本添付文書および本製品の『取扱説明書』に記載している洗浄、消毒、滅菌方法では、クロイツフェルト・ヤコブ病の病因物質であるプリオンを消失または不活化することはできない。クロイツフェルト・ヤコブ病患者に本製品を使用する場合は、その患者専用の機器として使用するか、使用后適切な方法で廃棄すること。クロイツフェルト・ヤコブ病への対応は、種々のガイドラインに従うこと。

使用者による保守点検事項

使用前点検において『取扱説明書』に従って点検すること。点検結果により修理またはオーバーホールを必要であれば実施すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

製造元：

白河オリンパス株式会社
〒961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字狼山 3-1

取扱説明書を必ずご参照ください。