

ディスポーザブル高周波スネア

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1.ペースメーカーを装着した患者に本製品を使用する際は、事前に循環器専門の医師あるいはペースメーカーの製造元に問い合わせをし、安全に対する十分な準備を行ったうえで使用すること。
[ペースメーカーの誤作動や故障を引き起こし、患者に重大な影響を及ぼすおそれがある。]
- 2.心臓の近傍で使用する場合は、高周波焼灼電源装置の出力を必要最小限度で使用すること。
[焼灼時の火花放電により心臓へ刺激を与えるおそれがある。]
- 3.再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット


1.構成

本製品は以下の 8 機種があり、操作部と挿入部の構造からなる。

- ・SD-210L-10
- ・SD-210L-25
- ・SD-210U-10
- ・SD-210U-25
- ・SD-210L-15
- ・SD-221L-25
- ・SD-210U-15
- ・SD-221U-25

2.各部の名称

★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。

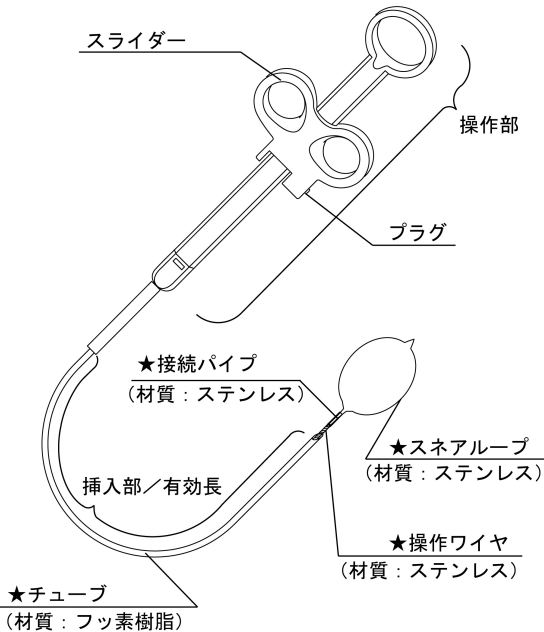

**3.仕様

モデル名	SD-210L-10	SD-210U-10
先端部の形状	エキストラミニ楕円型	
最大外径 (mm)	Φ2.6	
有効長 (mm)	1650	2300
ループ径 (mm)	Φ10	
ループワイヤ径 (mm)	Φ0.47	

モデル名	SD-210L-15	SD-210U-15
先端部の形状	ミニ楕円型	
最大外径 (mm)	Φ2.6	
有効長 (mm)	1650	2300
ループ径 (mm)	Φ15	
ループワイヤ径 (mm)	Φ0.47	

モデル名	SD-210L-25	SD-210U-25
先端部の形状	楕円型	
最大外径 (mm)	Φ2.6	
有効長 (mm)	1650	2300
ループ径 (mm)	Φ25	
ループワイヤ径 (mm)	Φ0.47	

モデル名	SD-221L-25	SD-221U-25
先端部の形状	半月型	
最大外径 (mm)	Φ1.8	
有効長 (mm)	1650	2300
ループ径 (mm)	Φ25	
ループワイヤ径 (mm)	Φ0.3	

詳細は『取扱説明書』の「8 仕様」を参照すること。

作動・動作原理

スライダーを先端側に動かすとスネアループが開き、手元側へ動かすとスネアループが閉じる。高周波焼灼電源装置および A コードと組み合わせて使用し、スネアループが組織を絞扼した状態で高周波電流を通電することにより組織の切除ができる。

【使用目的又は効果】

使用目的

**本製品は、当社指定の内視鏡と組み合わせて、高周波電流により消化器内の組織を切除することを目的とする。

【使用方法等】

1.点検

- (1)滅菌パックの点検、本製品の外観の点検、作動の点検をする。
- (2)Aコード(別売り)の外観の点検をする。
- (3)『取扱説明書』の「10 使用法」に従って接続の点検、システムの点検をする。

2.対極板の固定

- (1)対極板およびS-PコードまたはPコードを接続する。
- (2)患者に対極板を付ける。

3.内視鏡への挿入

- (1)スネアループをチューブ内へ引き込む。
- (2)内視鏡の鉗子栓に挿入する。
- (3)先端が内視鏡の視野内に入るまで挿入する。

4.絞扼、通電、切除

- (1)スライダを押し、スネアループを開く。
- (2)目的の組織にスネアループをかける。
- (3)スライダを引き、目的の組織を絞扼する。
- (4)Aコードを高周波焼灼電源装置およびスライダに差し込む。
- (5)通電しながらスライダを引き、目的の組織を切除する。
- (6)Aコードを高周波焼灼電源装置およびスライダから抜く。

5.内視鏡からの引き抜き

- (1)スライダを引き、スネアループをチューブ内に引き込む。
- (2)内視鏡から本製品を引き抜く。

6.廃棄

本製品の使用が終了したら、適切な方法で廃棄する。

詳細は『取扱説明書』の「10 使用法」および「11 廃棄」を参照すること。

※組み合わせる使用する医療機器

本製品と組み合わせる使用可能な医療機器は以下である。

当社内視鏡：

モデル名	SD-210L-10 SD-210L-15 SD-210L-25	SD-210U-10 SD-210U-15 SD-210U-25
有効長	1200mm 以下 EF, GIF, CF (I,L 長を除く)	1850mm 以下 EF, GIF, SIF (SIF-10 に限る), CF, PCF
チャンネル径	Φ2.8mm 以上	
その他	UM シリーズを除く	

モデル名	SD-221L-25	SD-221U-25
有効長	1200mm 以下 EF, GIF (N30, N230, N260, XP260, XP260N, XP150N を除く), GF, CF (I, L 長を除く)	2000mm 以下 EF, GIF (N30, N230, N260, XP260, XP260N, XP150N を除く), JF, TJF, SIF, CF, PCF
チャンネル径	Φ2.0mm 以上	
その他	UM シリーズを除く	

高周波焼灼電源装置：

販売名	医療機器承認番号
高周波焼灼電源装置 PSD-10	16100BZZ00075000
高周波焼灼電源装置 PSD-20	20800BZZ00341000
高周波焼灼電源装置 UES-10	16100BZZ00076000
高周波焼灼電源装置 UES-20	20600BZZ01150000
高周波焼灼電源装置 ESG-100	220ABBZX00079000

または同等品

Aコード：

モデル名	販売名	医療機器届出番号
MH-969	Aコード	13B1X00277000375

または同等品

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1.一般的事項

- (1)腸内にガスがある場合は、不燃性ガス(例えば CO₂)に置換してから処置すること。
- (2)使用前に石けんなどを用いて通電確認を行わないこと。スネアループに石けんや異物が付着した状態で使用すると、十分な高周波通電が得られず、機械的切開による出血を引き起こすおそれがある。
- (3)スネアループがチューブ内に完全に引き込まれていない状態で、内視鏡の視野が確保されていない状態で、本製品を内視鏡に挿入しないこと。また、内視鏡の視野内に挿入部先端を確認できない状態で、本製品の連の操作をしないこと。
- (4)本製品を内視鏡に挿入する場合は、スライダを動かないように保持し、急激な突き出しはしないこと。また、抵抗が大きくて内視鏡への挿入が困難な場合は、無理なく挿入できるところまで内視鏡のアングルを戻すこと。
- (5)挿入部先端が内視鏡から突き出ている状態で、急激な内視鏡のアングル操作をしないこと。
- (6)無理な力で挿入部先端を体腔内の組織に押しつけないこと。
- (7)無理な力で体腔内の組織を緊縛しないこと。
- (8)急激にスライダを押さないこと。
- (9)スネアループや体腔内の組織に付着している粘液などの液体は吸引すること。
- (10)内視鏡の先端金属部とスネアループが接触および近接した状態で通電しないこと。
- (11)必要以上に高周波焼灼電源装置の出力を上げたり、通電時間を長くしたりしないこと。
- (12)通電時は過剰な通電をしないこと。必要な場合は術後の穿孔、出血を予防する処置を行うこと。
- (13)通電時、Aコードをループ状に丸めたり、ほかの医療機器(心電図モニター、内視鏡像ビデオカメラ、高周波焼灼電源装置など)のコードと一緒に束ねたりしないこと。
- (14)必ず通電しながら切除すること。
- (15)スネアループが緊縛部からははずせなくなった場合は、チューブの前後操作や内視鏡のアングル操作を行い、スネアループを広げて緊縛部からスネアをははずすこと。それでもはずせない場合は、内視鏡鉗子口から出ている高周波スネアの挿入部をベンチなどで切断し、チューブを抜き、スネアワイヤを前後させてスネアループを広げてスネアループを緊縛部からははずすこと。
- (16)本製品を内視鏡から勢いよく引き抜かないこと。

2.生体情報モニター(心電図モニターなど)を併用する場合

心電図モニターなどの生体情報モニター装置を併用して使用する場合は、生体情報モニター装置で使用する電極は本製品で使用する電極からできるだけ離すこと。また、生体情報モニター装置の電極は針状のものは使用しないこと。

詳細は『取扱説明書』の「6 取り扱い上および一般的な注意事項について」、「10 使用法」および「11 廃棄」を参照すること。

不具合

その他の不具合

機器の破損・変形、機能の低下

有害事象

その他の有害事象

感染、組織の炎症、皮膚の炎症、穿孔、大出血、粘膜損傷、組織の熱傷、患者・術者・介助者のやけど

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

詳細は『取扱説明書』の「9 保管」を参照すること。

有効期間

滅菌パックに表示された使用期限を確認すること。
(自己認証(当社データ)による)

取扱説明書を必ずご参照ください。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先

TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

取扱説明書を必ずご参照ください。