

* 特定保守管理医療機器 生体情報モニタ BP-508用付属品：ウォータートラップセット


【禁忌・禁止】

- ・破損したり傷が付いている場合には使用しないこと。
- ・感染症の患者に使用した場合は確実に交換してください。

【形状・構造及び原理等】

〔外観図〕

本セットはウォータートラップと、独立した1つのサンプリングフィルタ、サンプリングバイパス用のサンプリングフィルタとサンプリングバイパスチューブが一体になった物から成っています。

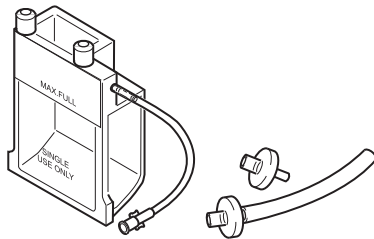


【使用目的、効能又は効果】

本セットのウォータートラップの使用目的は、サンプリングチューブ内から吸引されてくる水分を呼吸ガスモニタ内に侵入するのを防ぐことにあります。また、サンプリングフィルタは呼吸ガスモニタのサンプリングバイパス口およびルームエア口に接続し、呼吸ガスモニタ内に気体以外の物が入るのを防ぐためのフィルタです。当社製呼吸ガスモニタの内、その取扱説明書に本品が適用可能との記載があるものに適用できます。(BP-508シリーズ)


【操作方法又は使用方法等】

〔接続方法〕


- (1) 使用前に本品に損傷がないことを確認してください。損傷があった場合は、使用しないでください。
- (2) ウォータートラップの呼吸ガスモニタへの接続は下図の样に行ってください。この時、事前にシリコンゴムが奥までしっかりとハマっている事を確認しておいてください。
 - 1) 上部を下から上にはめます。

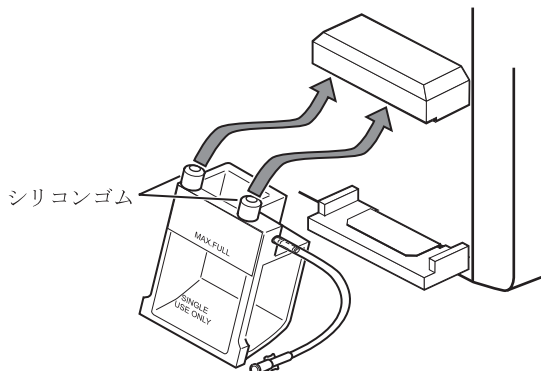

- 2) まっすぐになるまで押し込みます。

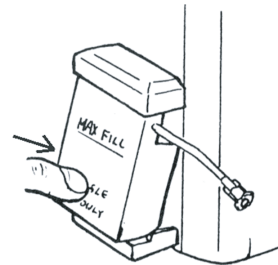

- 3) 呼吸ガスモニタ背面の接続は下図の样に行ってください。

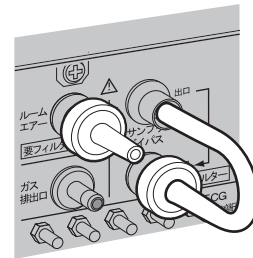

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ・本セットは呼吸ガスモニタ用の消耗品セットです。他の用途に用いたり、改造しないこと。
- ・本セットは滅菌はされていません。
- ・本セットは使い捨てです。
ウォータートラップでは「MAX FULL」のライン近くまで水が溜まりましたら破棄してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

高温多湿、直射日光、水濡れを避け、室温で保管すること。
薬品が蒸散している場所、薬品にふれる場所には保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

〔使用者・業者による保守点検事項〕

1. 注意事項

- (1) 本品は使い捨てです。最低でも1ヶ月毎に新しい物に交換してください。ウォータートラップでは「MAX FULL」のライン近くまで水が溜まった場合にも交換してください。

2. 使用前の点検

- (1) ウォータートラップには十分に水を溜めるだけの容量があることを確認してください。
- (2) フィルタの取付に緩みがないことを確認してください。

【包装】

1セット単位、個別包装、未滅菌

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：オムロン ヘルスケア株式会社
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

製造元：オムロン ヘルスケア株式会社