


オムロン 音声付電子体温計 MC-174V

【禁忌・禁止】

- (電子体温計を適正にご使用いただくための注意事項です。)
- ・検温結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。
[自己診断は、病気が悪化する原因になります。]
 - ・人の体温測定以外に使用しないでください。
[動物などを無理に測ろうとすると、暴れてけがをする原因になります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

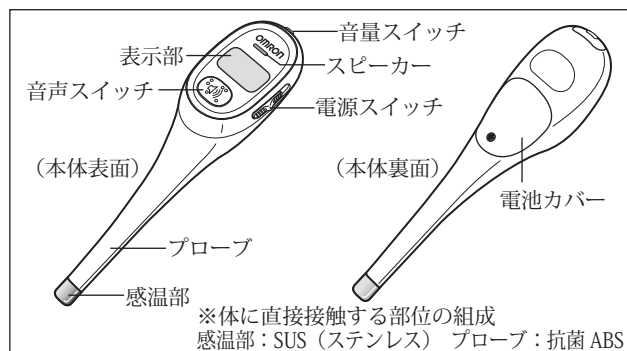

2. 構成

標準付属品

収納ケース	1 個
お試用電池 (リチウム電池 CR2032)	1 個
取扱説明書 (医療機器添付文書・品質保証書付き)	1 部
EMC 技術資料	1 部

3. 動作原理

- (1) 本機はサーミスタの抵抗値が温度により変化するという特性を応用した電子体温計です。
- (2) まず基準抵抗で構成された発振回路により充放電発振をおこない、あらかじめ設定された充放電回数までの時間を求めます。
- (3) 次にサーミスタで構成された発振回路により充放電発振をおこない、(2) で求めた時間における充放電回数をカウントします。
- (4) このカウント数を、あらかじめ設定された計算式により温度に変換し表示します。

4. 本体寸法及び重量

外形寸法	: 34.9(幅) × 132.5(長さ) × 21.8(厚さ) mm
質量	: 約 26 g (電池含む)

5. 電氣的定格

電源	: リチウム電池 CR2032 (DC3 V)
電撃保護	: 内部電源機器 B 形装着部
消費電力	: 100 mW

*6. 性能及び安全性に関する規格等

- (1) 最高温度保持機能: 実測した最高温度値を保持し一定時間表示する
- (2) デジタル表示: 実測した体温をデジタル表示する
- (3) 最大許容誤差: ±0.1℃
※標準室温 23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合
- (4) 電源電圧: JIS T 1140: 2024 に適合
- (5) 応答特性・応答時間: JIS T 1140: 2024 に適合
- (6) 防 浸: JIS T 1140: 2024 一部防浸形に適合
- (7) 测温範囲: 32.0~42.0℃
- (8) 最小表示単位: 0.1℃
- (9) 測定範囲外告知: 32℃未満のとき「L」を表示、42℃を超えるとき「H」を表示
- (10) 感温部: サーミスタ
- (11) 測定方式: 実測 (ピークホールド方式)
- (12) 体温表示: デジタル表示 3 桁+℃表示、0.1℃毎
- (13) 音声: 圧電スピーカー
- (14) 使用環境周囲温度: +10~+40℃ 相対湿度: 30~85%RH

*

【使用目的又は効果】

本製品は、サーミスタ式の電子体温計です。体温計の感温部をわき (又は舌下) に接触させて、人の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示します。わき・口中用。

【使用方法等】

- (1) 収納ケースから取り出し、電源スイッチを押し上げて電源を入れます。
- (2) 「測ってください」という音声のあとで、感温部をわき (又は舌下) に挿入し密着させます。10 分間測定してください。(舌下の場合は 5 分間)
- (3) 温度上昇がほとんどなくなるとブザーが 3 回鳴り、検温結果が音声案内されます。
- (4) ブザーを目安として体温を見る場合は、わき (又は舌下) から取り出します。より正確に測るには継続して測定してください。
- (5) 電源を切って、収納ケースに入れます。
・詳細については取扱説明書をよくお読みください。

【使用上の注意】

- (1) 検温中、感温部を検温する部位に密着させるように固定し、空隙はつくらないようにしてください。また大幅に動かさないでください。
- (2) 電池電圧が低下すると「電池を交換してください」と音声案内されますので、電池を取り替えてください。
- (3) 運動や入浴後は、30 分以上あけてから検温してください。
- (4) 飲食後は、30 分以上あけてから検温してください。
- (5) 起床直後の行動開始時期は、比較的激しく体温が上昇しますので、30 分以上あけてから検温してください。
- (6) わきの下が汗ばんでいるときはわきの下を乾いた布で数回ふいてから検温してください。
- (7) 感温部およびプローブは防浸ですが、それ以外 (表示部など) は防浸ではありません。本体を水につけないでください。
- (8) 感温部を強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- (9) 本体を噛まないでください。
- (10) 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけでのご使用はさけてください。
- (11) 周囲温度は 10~40℃の範囲で使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

次のような環境に保管してください。

保管環境周囲温度: -20~+60℃

相対湿度: 30~95%RH

次のようなところに保管しないでください。

- (1) 水のかかるところ。
- (2) 高温・多湿、直射日光、ホコリ、暖房器具のそば、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- (3) 傾斜、振動、重圧、衝撃 (運搬時を含む) のあるところ。
- (4) 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

2. 耐用期間

標準的な使用期間: 5 年 [自己認証 (当社データ) による]

【保守・点検に係る事項】

- (1) 故障した場合は勝手に修理、分解せず、お客様サービスセンターにご連絡ください。
- (2) 勝手に改造しないでください。
- (3) 本製品に水や化学薬品をかけないでください。
- (4) 本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- (5) 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみ込ませた布をかたく絞ってふき取った後、やわらかい布でからぶきしてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: オムロンヘルスケア株式会社

電話: 0120-30-6606

(オムロン お客様サービスセンター)

取扱説明書を必ずご参照下さい。