

機械器具76医療用吸入器  
一般医療機器 非加熱式ネブライザ 35457000

## オムロン コンプレッサー式ネブライザ NE-C802


### 【警告】

- ・ 医師、薬剤師の指導に従って正しくご使用ください。
  - ・ 薬液の種類、用量、用法については必ず医師、薬剤師の指示に従ってください。
  - ・ 使用中に何か異状を感じた場合、すぐに使用を止め、担当医師にご相談ください。
- [症状悪化の原因になります。]


### 【禁忌・禁止】

- ・ 意識がない患者または自発呼吸下でない患者に使用しないでください。[事故の原因になります。]
- ・ 可燃性ガス雰囲気内で使用しないでください。[火災の原因になります。]
- ・ 本体の乾燥目的で、電子レンジ、食器乾燥機、ヘアドライヤーを使用しないでください。[火災や故障の原因になります。]
- ・ 部品の乾燥目的で、電子レンジ、食器乾燥機、ヘアドライヤーを使用しないでください。[変形などにより、正常に噴霧せず、症状悪化の原因になります。]
- ・ 消毒の目的で、EOGガス滅菌、低温プラズマ滅菌を使用しないでください。[残留ガスなどの影響により、症状悪化の可能性があります。]


### ネブライザキット

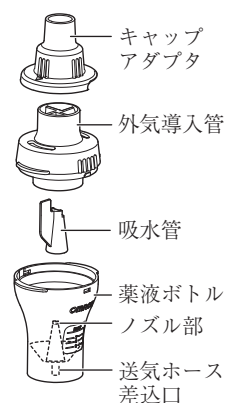

### 本体底面

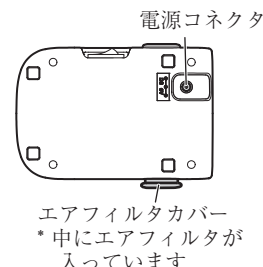

### \*\* 専用ACアダプタ

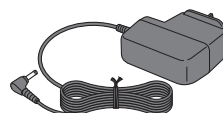

### 2. 本体寸法及び 質量

本体寸法：約85（幅）×約43（高さ）×約115（奥行き）mm

質 量：約190 g（本体のみ）

### 3. 電氣的定格

電 源：AC100V 50/60Hz 10VA（専用ACアダプタ）

定 格：DC 6V 消費電力3.6W（本体）

電撃に対する保護の形式：クラスⅡ機器

電撃に対する保護の程度の装着部分類：BF形装着部

### 4. 使用環境

温 度：+10～+40℃

湿 度：30～85%RH（結露なきこと）


### 5. 構成

|                          | 個数        |
|--------------------------|-----------|
| 本体                       | 1台        |
| ネブライザキット                 | 1組        |
| 吸入用アタッチメント               |           |
| マウスピース（ポリプロピレン樹脂）        | 1個        |
| 吸入マスク（小）（スチレン系エラストマ樹脂）   | 1個        |
| 吸入マスク（小）用アダプタ（ポリプロピレン樹脂） | 1個        |
| 送気ホース                    | 1本        |
| 交換用エアフィルタ                | 5個        |
| キッズアクセサリ                 | ゾウ、ウサギ各1個 |
| ** 専用ACアダプタ HHP-AM01     | 1個        |
| 収納ポーチ                    | 1個        |
| 取扱説明書                    | 1部        |
| 医療機器添付文書（本書）             | 1部        |

### \*\* 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 主要部の形状と名称

#### 外観図

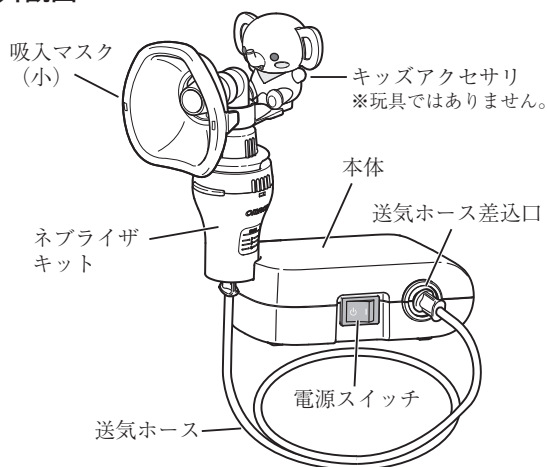

取扱説明書を必ずご参照下さい。

## 6. 作動・原理

吸水管を通じて吸い上げられた薬液が、コンプレッサーにより発生した圧縮空気と混ぜ合わされます。薬液は圧縮空気に触れて、細かい霧となって外部に噴出します。

### \*【使用目的、効能又は効果】

患者に吸入させるため、エアロゾル化した医薬品を供給する装置であり、エアロゾルを発生させる空気源、医薬品のリザーバ、コンプレッサを内蔵する。

（本装置は呼吸器疾患の吸入療法に使用することを目的とする）

### 【品目仕様等】

1. 噴霧能力：約0.25 mL／分  
室温23℃、湿度40%、生理食塩水（2mL）を用いて測定した社内データの代表値  
※薬液種類、使用する付属品、吸入される患者の呼吸動作によって変化します。  
※ノーズピース（別売品）使用時は噴霧能力が低下します。
2. 噴霧粒子径：MMAD約3 μm  
（EN13544-1に準拠 自社測定での代表値）
3. 薬液ボトル容量：最大10mL
4. 適正薬液量：約2 ～ 10mL
5. 安全装置  
過電流保護装置：過電流時に出力を断つ（専用ACアダプタ）
6. 電磁両立性規格（EMC）  
本商品はEMC規格IEC 60601-1-2：2007に適合しています。

### \*【操作方法又は使用方法等】

1. 専用ACアダプタを接続する
  2. 薬液ボトルに薬液を入れる
  3. 吸入用アタッチメントを取り付ける
  4. 電源スイッチを押して、吸入する
- \* 5. 電源スイッチオフを押し、専用ACアダプタを取り外す
6. 吸入後は、洗浄・乾燥・保管する

詳細については取扱説明書をよくお読みください。

### 【使用上の注意】

1. 初めて使用する際は、ネブライザキット、マスクおよびマウスピースを洗浄、消毒してください。
2. 使用後は必ず残りの薬液を廃棄し、吸入ごとに新たな薬液を使用してください。
3. 内部に水分が残った状態で送気ホースを保管しないでください。
4. 使用中、毛布やタオルなどで本体を覆わないでください。
5. 麻酔回路またはベンチレータ呼吸回路で使用しないでください。
6. 本体や専用ACアダプタは水洗いしたり、水に浸したり薬液をこぼしたりしないでください。こぼした場合は、すみやかにガーゼでふき取ってください。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 1. 貯蔵方法

次のような環境に保管してください。

温度：-20 ～ +60℃

湿度：10～95%RH（結露なきこと）

#### 2. 耐用期間

常温、常湿で1日2回各8分間、2mLの薬液を噴霧するという条件で以下のとおりです。使用環境によって変化し、使用頻度により耐用期間が短くなることがあります。

本体 5年

専用ACアダプタ 5年

ネブライザキット 1年

キッズアクセサリ 1年

マウスピース 1年

送気ホース 1年

吸入マスク（小） 1年

吸入マスク（小）用アダプタ 1年

エアフィルタ 60日

### 【保守・点検に係る事項】

#### 1. 使用前の点検

- ・ノズル部および送気ホースに損傷がないこと
  - ・ノズル部に目詰まりがないこと
  - ・本体が正常に動作すること
- 異常が認められたときには、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

#### 2. お手入れ

吸入後は、ネブライザキット、マウスピースおよび吸入マスクなどを洗浄・乾燥し、ちりやほこりが入らないよう清潔に保管してください。また週に1度は、消毒してください。

### 【包装】

1台／箱

### 【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売元：オムロン ヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

電話：0120-84-6606

製 造 元：欧姆龍（大連）有限公司

OMRON (DALIAN) CO., LTD.

中華人民共和国