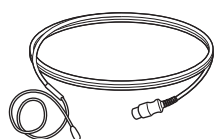
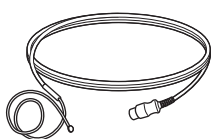


腋下用リユーザブル体温プローブ TypeV

【禁忌・禁止】

- ・電気メス、MRIなどの高周波発生源を有する機器を使用する場合、前もってプローブを患者から外すこと。やむを得ず同時に使用する場合、プローブを接続している生体情報モニタが高周波発生源を有する機器の接地から確実に絶縁されていること。
- ・プローブの装着位置はリスクを軽減させるため、高周波電流が接地へ流れる経路から影響を受けないところまで遠ざけること。

【形状、構造及び原理等】

成人用
HXA-VTEMP-RUSKA小児・新生児用
HXA-VTEMP-RUSKP

【使用目的、効能又は効果】

本体温プローブは、腋下用の再使用可能な体温プローブです。患者の体温を連続的に測定できるよう設計されています。

【品目仕様等】

計測範囲：0～50℃

精度：±0.1℃

応答時間：100秒以内

【操作方法又は使用方法等】

使用する前に、必ず記載されたすべての注意事項をお読みください。

- (1) 患者と適用する状況に従い正しいプローブを選択していることを確認してください。
- (2) 本プローブは、腋下定位を推奨します。それ以外の場合には、プローブを腕など他の体表面上へ装着してください。接着性のプラスタを使用して腋窩または他の体表面上へプローブを装着し、プローブの金属側が患者と接触するようにしてください。
- (3) プローブを接続する生体情報モニタの取扱説明書に従い接続してください。
- (4) 本プローブは再使用可能です。推奨された洗浄剤/消毒剤で、洗浄・消毒してください。水蒸気で消毒しないでください。

【使用上の注意】

- ・本プローブは、当社が指定する生体情報モニタに接続して使用してください。使用者は使用可能な生体情報モニタを確認する責任があります。
- ・本プローブは、訓練を受けた医療従事者およびその指導のもとで使用されなければなりません。
- ・使用前にプローブの割れ目、穴、ひび割れなどがなく、プローブに損傷がないことを確認してください。廃棄する場合は、院内の廃棄手順に従い廃棄してください。
- ・プローブが、患者と適用する状況に対し十分適していることを確認してください。
- ・本プローブは精密な温度センサです。プローブ表面は絶縁されていますが、プローブが濫用または誤った取扱いにより破損し、絶縁が失われる可能性があります。

- ・電気メスやMRIなど高周波発生源を有する機器の干渉は、測定精度に影響する場合があります。誤った測定値が表示されたり、プローブが損傷したり、局所的な熱により患者が火傷する恐れがあります。プローブと高周波発生源を有する機器を同時に使用する必要がある場合は、患者に接続するケーブルのねじれや患者に直接接触することを避け、プローブを使用する生体情報モニタと高周波発生機器間の絶縁接地を実施してください。
- ・金属側を患者に接触させて使用してください。
- ・汚染を防ぐため廃棄の際は、適切な廃棄手順により回収してください。
- ・ケーブル、プローブ類が、患者に絡みついたり締め付ける危険性を低減するため、配線に注意してください。
- ・プローブは正しく使用してください。内部の配線を損傷したり、絶縁が失われたり、正しく温度表示されない原因となります。
- ・液体に浸さないでください。
- ・洗浄・消毒中はピンが湿らないように注意してください。
- ・損傷を避けるため、必要な場合にのみ院内の方針により規定された方法で消毒してください。
- ・洗浄剤・消毒剤は推奨されたもの以外使用しないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管方法については、接続する生体情報モニタの取扱説明書を参照してください。

【保守・点検に係る事項】

〔使用者・業者による保守点検事項〕

使用前には外觀上の損傷などを確認し、異常が無ければ生体情報モニタへ接続してください。体温プローブの損傷を示す電気的な欠落や短絡、測定の中断や極度に不正確な測定がないかを点検してください。損傷したプローブは、院内の廃棄手順に従い廃棄してください。

洗浄

- (1) 水で湿らせた綿布または柔らかい布で洗浄します。
- (2) 洗浄後、柔らかい布で水分を拭き取り、空気乾燥させてください。

消毒

推奨する消毒剤：エタノール70%、イソプロパノール70%

- (1) 上記の方法で洗浄後、推奨された消毒剤を使用し、綿布または柔らかい布でおこなってください。
- (2) 消毒後は必ず水で湿らせた柔らかい布で残留した消毒剤を拭き取り、空気乾燥させてください。

【包装】

1本単位で包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地
カスタマサポートセンター
0120-103-203（24時間受付/通話料無料）

外国製造業者：Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics CO., LTD. (中国)
シンセン マインドレー バイオメディカル
エレクトロニクスカンパニーリミテッド

販売元：オムロンコーリン株式会社

〒112-0002 東京都文京区小石川一丁目12番地14号
日本生命小石川ビル



046-006200-00(1.0)

モニタ本体付属の取扱説明書を必ずご参照ください。