

機械器具 78 家庭用電気治療器
管理医療機器 家庭用低周波治療器

「オムロン 低周波治療器 HV-F080 シリーズ」の構成品

オムロン 低周波治療器 専用パッド MU
オムロン 低周波治療器 専用パッド JO

【禁忌・禁止】

- パッドの表面が欠けていたり、くずれている状態で使用しないでください。
[事故やトラブル、故障につながる恐れがあります。]
- パッドは強く曲げたり折ったりしないでください。
[感電や事故の原因になります。]

【形状・構造および原理等】


1.適用機器

本製品は以下の機器に接続して使用します。

適用機器	認証番号
オムロン 低周波治療器 HV-F080シリーズ	302AABZX00011000
オムロン 低周波治療器 HV-F030シリーズ	304AABZX00080000

2.主要部の形状と名称

オムロン 低周波治療器 専用パッドMU

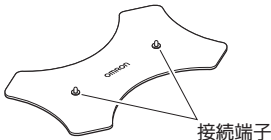

オムロン 低周波治療器 専用パッドJO



※ 体に直接接触する部位の組成：アクリル系樹脂、グリセリン、水

3.構成

【オムロン 低周波治療器 専用パッドMU】

専用パッド（筋肉用） 1枚
取扱説明書、医療機器添付文書（本書）

【オムロン 低周波治療器 専用パッドJO】

専用パッド（関節用） 2枚
取扱説明書、医療機器添付文書（本書）

【使用目的又は効果】

肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果。一般家庭で使用するこ。

【使用方法等】

接続する機器の取扱説明書（添付文書）を参照してください。

【使用上の注意】

- 本製品の使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し医師に相談してください。
- パッドを放置したり汚れが付着したものと一緒に保管しないでください。粘着面が汚れて、粘着力が低下します。
- その他の使用上の注意事項については、接続する機器の取扱説明書（添付文書）を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 次のようなところに保管しないでください。
 - 水のかかるところ。
 - 高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
 - 振動、衝撃（運搬時を含む）のあるところ。
 - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

(2) 保管環境条件：0 ～+ 40 ℃ /30 ～ 85 % RH（結露なきこと）

2. 耐用期間

約30回

[自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

- 常に使用前後の点検を励行し、故障または異常が認められたときには、下記製造販売元に連絡してください。
- パッドの破損、汚れ、痛み具合を点検し、次の使用に支障のないよう、清潔に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：オムロンヘルスケア株式会社
電話：0120-30-6606
（オムロン お客様サービスセンター）