

医療器具 39 医療用鉗子
医療用機器 歯科矯正用プライヤー JMDN33209000

LANCER プライヤー

【禁忌・禁止】


本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 原材料:ステンレススチール、タングステン、プラスチック

2. 形状:代表的なものを下図に示す。

1) ワイヤークッター

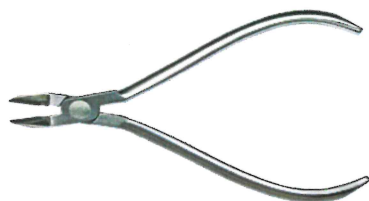

2) ベンディング プライヤー



3) ユーティリティー プライヤー



4) ディボンディング プライヤー



【使用目的又は効果】

歯科矯正治療における様々な形状を持つ工具であり、主にワイヤーの切断、及び屈曲に用いられる。

【使用方法等】

1. 毎回滅菌後に使用する
2. 各種先端部の形状により歯科矯正用ワイヤーの 切断、屈曲、または保持をする。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 歯科矯正治療以外の目的で使用しないこと。
- 2) 本品にはニッケルとクロムが含まれるため、これらの成分に対してアレルギー反応を起こす場合がある。アレルギー反応が生じた場合は、専門の医療機関で診断を受けるように指示をすること。

2. その他の注意

- 1) 使用前に必ず滅菌すること。
- 2) 製品の2次加工は行わないこと。
- 3) 長期の使用は、定期的に交換をする。
- 4) 使用後は直ちに防錆洗浄液や精製水に浸すこと。
- 5) 塩素系及びヨウ素系の消毒液は、腐食の原因になるので使用を避けること。
- 6) 腐食(錆)の原因となるため、金属製工具で洗浄しないこと。
- 7) 本品の使用により発疹、皮膚炎等の症状があらわれた場合は、速やかに使用を中止し、専門の医療機関で診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 使用前に製品に異常がないかをよく確認すること。
2. 使用後の洗浄は適した薬剤を添付文書の指示に従い使用すること。
3. 洗浄中に器具同士が接触して破損しないように注意すること。
4. 洗浄後は直ちに乾燥させること。
5. 滅菌器を使用する場合はメーカーの指示に従うこと。
6. 温度は160℃を超えないこと。
7. アルコールを使用して高圧滅菌はしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称:株式会社オーティカ・インターナショナル

TEL:03-3353-3676