

BTワイヤー

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 1) 金属に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
- 2) 本品は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- (1) 本品には次の種類がある。
 - 1) アーチ形状
 - 2) ストレート形状
- (2) 本品は次の原材料で構成する。

モリブデン: 12%
ジルコニウム: 6%
錫: 4%
鉄: 2%
チタニウム: 残余
- (3) 形状、構造の詳細はカタログを参照のこと。
6種類のアーチ形状とストレート形状がある。

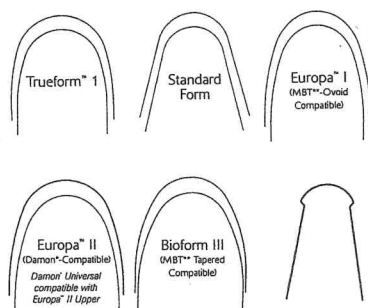

*これらの形状には、ラウンド（丸形）、スクエアー（正方形）、レクト（長方形）がある。またTループを含むものもある。

(4) 原理

本品は歯列矯正治療に使用されるベータチタン製のワイヤーであり、歯面に接着されたブラケットに結紮して使用される。ベータチタンの軽度の復元力によって、生体にストレスを与えることなく歯牙を移動させる。

【使用目的又は効果】

歯牙に接着されたブラケットのスロットにはめ込んで使用し、歯の移動又は維持のために歯に力を加える。

【使用方法等】

- (1) 患者の各々の歯の矯正に適したブラケットをブラケットの使用説明書に従って歯面に接着する。
- (2) 治療目的に適合するワイヤーを選択し、ワイヤーのセンターラインを歯列のセンターに合わせる。
- (3) ブラケットのスロットにワイヤーをはめ込む。

- (4) リガチャー又はエラスチックを使用してワイヤーをブラケットに固定する。その際ワイヤーにある程度の自由度を確保する。
- (5) ワイヤーの切断部をチューブに入れる等の操作を行い、口内を傷つけないようにする。
- (6) ワイヤーが歯茎に接触していないことを確認する。

【使用上の注意】

- (1) 使用注意
 - ① 本品は使用前に、酸やアルカリ類と一緒に置かないこと。
 - ② 口腔内で本品のベンディングや切断を行わないこと。
 - ③ 本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - ④ 変形や変質を発見した場合は、使用せずに発売元に連絡すること。
 - ⑤ 本品を廃棄するときは、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。
- (2) 重要な基本的注意
 - ① 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

【貯蔵・保管方法】

- 1) 開封前は特に指定しないが、外圧がかからないように保管すること。
- 2) 一度開封した製品は、埃、水分等がつかないようにすること。
- 3) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 オーティカ・インターナショナル

住所: 〒160-0022

東京都新宿区新宿1-9-5大台ビル4階

電話番号: 03-3353-3676

FAX 番号: 03-3353-3830

外国製造業者: G&H Wire Company/Flexmedics (USA)
G&Hワイヤー社 (アメリカ)