

機械器具 27 医療用マイクローム
一般医療機器 回転式マイクローム 15158000
SLEE 全自動マイクローム CUT6062

【形状・構造及び原理】

本品は標準仕様では


①マイクローム本体、②試料クランプ各種③ナイフホルダー各種、④廃棄物トレイ、⑤フットスイッチ等から構成されている全自動マイクロームである。



寸法：480W×610D×350H mm
重量：34Kg（付属品含まず）
電源：100-240V/50-60Hz 20VA

オプション構成品

■外付けコントロールパネル ■フットコントローラー

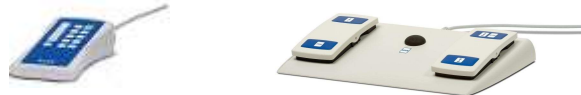

拡大鏡



【使用目的、効能又は効果】

組織試料の切片を薄片に削るために用いるマイクロームをいう。通常試料は削り取る前にパラフィンワックスで安定（固定）させる。切片は、はずみ車の回転ごとに削り取られる。

【使用方法等】

- ① 電源スイッチを入れる。
- ② ハンドホイールをロックし指保護具をセットする。
- ③ 試料を挿入し方向を調整する。
- ④ 試料を固定具でロックする。
- ⑤ ナイフを挿入し高さを調整する。
- ⑥ ナイフ固定具を締める。
- ⑦ 指保護具とハンドホイールを解除し、切削する。

⑧ 清掃を行う。

【使用上の注意】

■使用前の注意

- ・ 装置電源を投入する前に供給電源が電源仕様と一致しているか確認すること。
- ・ 常に最初に試料を挿入し、次にナイフを挿入すること。

■使用中の注意

- ・ ナイフに充分注意すること。

■使用後の注意

- ・ ハンドホイールはロック状態にしておくこと。
- ・ 清掃時には保護衣および使い捨て手袋を着用すること。
- ・ 装置を清掃する際アセトンやキシレンは使用しないこと。アルコール媒体のみ使用可能。
- ・ 外装部分は市販のプラスチック用洗浄剤を使用できる。
- ・ タッチパネルには洗浄剤を直接噴霧しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

■設置場所要件

- ・ 平らで振動の無い所。

■使用耐用年数（自己認証）

推奨する保守点検を行った場合 7 年。

【取扱上の注意】

- ・ マイクロームナイフは非常に鋭利であり、けがをする恐れがある。取扱の際は充分に注意すること。
- ・ ナイフは、指定した場所以外に置かないこと。
- ・ ナイフは刃先を決して上向きにしておかないこと。
- ・ 落下するナイフは決して掴もうとしないこと。

【保守・点検に係る事項】

■使用者による日常点検事項

- ・ 毎日の使用後廃棄物トレイから切片廃棄物を除去する。
- ・ 毎月ナイフホルダーを清掃する。

■業者による定期保守点検事項。

- ・ 全ての機能をチェック
- ・ 可動部の油さし
- ・ 運転システムのチェック
- ・ 完全な清掃

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：オガワ精機株式会社

電話番号：03-6908-5257

外国製造業者：SLEE medical GmbH（ドイツ）