


器具 27 医療用マイクローム
一般医療機器 一般的名称：滑走式マイクローム 15159000
販売名 **SLEE cuttecS スライド式マイクローム**

【形状・構造及び原理等】

本品は、①マイクローム本体、②試料クランプ③ナイフホルダー各種、④廃棄物トレイ等から構成されている手動マイクロームである。

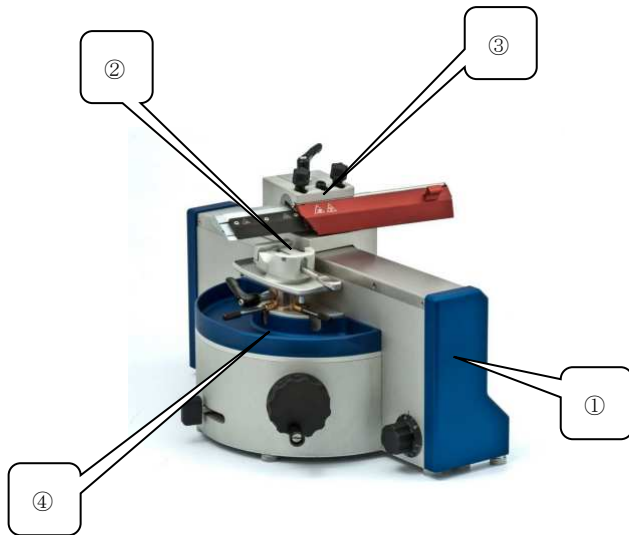

寸法：150W×450D×200H mm

重量：18Kg（付属品含まず）

【使用目的又は効果】

組織試料の切片を薄片に削るために用いるマイクロームをいう。通常試料は削り取る前にパラフィンワックスで安定（固定）させる。切片は、レール上のナイフの前後運動ごとに削り取られる。

【使用方法等】

- ① ブレーキをロックし指保護具をセットする。
- ② 試料を挿入し方向を調整する。
- ③ 試料を固定具でロックする。
- ④ ナイフを挿入し高さを調整する。
- ⑤ ナイフ固定具を締める。
- ⑥ 指保護具とブレーキロックを解除し、切削する。
- ⑦ 清掃を行う。

【使用上の注意】**■使用前の注意**

- ・ 常に最初に試料を挿入し、次にナイフを挿入すること。

■使用中の注意

- ・ ナイフに充分注意すること。

■使用後の注意

- ・ ブレーキはロック状態にしておくこと。
- ・ 清掃時には保護衣および使い捨て手袋を着用すること。
- ・ 装置を清掃する際アセトンやキシレンは使用しないこと。アルコール媒体のみ使用可能。
- ・ 外装部分は市販のプラスチック用洗剤を使用できる。

【保管方法及び有効期間等】**■設置場所要件**

- ・ 平らで振動の無い所。

■使用耐用年数（自己認証）

推奨する保守点検を行った場合7年。

【取扱い上の注意】

- ・ マイクロームナイフは非常に鋭利であり、けがをする恐れがある。取扱いの際は充分に注意すること。
- ・ ナイフは、指定した場所以外に置かないこと。
- ・ ナイフは刃先を決して上向きにしておかないこと。
- ・ 落下するナイフは決して掴もうとしないこと

【保守・点検に係る事項】**■使用者による日常点検事項**

- ・ 毎日の使用後廃棄物トレイから切片廃棄物を除去する。
- ・ 毎週ナイフホルダーを清掃する。

■業者による定期保守点検事項

- ・ 全ての機能をチェック
- ・ 可動部の油さし
- ・ 運転システムのチェック
- ・ 完全な清掃

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：オガワ精機株式会社

電話番号：03-6908-5257

外国製造業者：SLEE medical GmbH（ドイツ）