

機械器具 17 血液検査用器具
一般医療機器 自動染色装置 70191000

特定保守管理医療機器 **SLEE MCS2 カバースリッパ**

【警告】


- ・ 可燃性物質を使用するため、火気は近づけない。
- ・ 装置の分解・改造は行わない。

【形状・構造及び原理等】

1. 構造

1) 本体

- ① ディスプレイ
- ② フード
- ③ ディスペンサ
- ④ バスケットコンテナ
- ⑤ 排気ファン（側面）

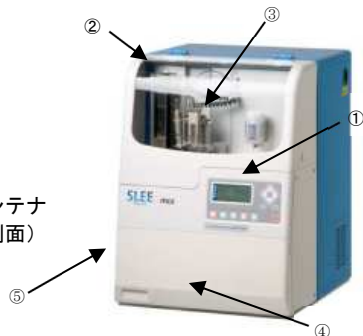

2. 原理

固定剤を用いて、染色した組織試料切片ののったスライドガラスをカバーガラスで封入する装置である。

3. 規格

■電気

定格電圧	100-240V AC
定格周波数	50/60Hz
電力	600 VA

■サイズ

幅・奥行・高	495mm x 540mm x 680mm
重量	57 Kg

■性能

処理枚数	最大 300 枚／時
吐出量	1 回あたり 0～0.2cc
封入剤粘度	550cps 推奨
封入剤	500ml までの市販封入剤使用可能
ディスプレイ	TFT カラーLCD
排気ファン	活性炭フィルター付
スライドガラス	26×76mm 厚さ 0.9～1.2mm まで対応 60 枚収納
カバーガラス	24×40、50、55、60mm 厚さ 0.12～0.17mm 180 枚収納

【使用目的又は効果】

病理検査の組織標本や細胞診、血液検査等の標本を作製する装置をいう。染色を行う装置又は塗抹のみ行う装置を含む。
本機器は IC プログラム制御による自動スライドガラス封入装置である。

【使用方法等】

1) 使用環境・設置場所


操作時温度	10-35℃
相対湿度	80%（結露なし）

設置時注意

- ① 設置場所が水平であること。
- ② 作業スペースが十分あること。
- ③ 排水給水口が近くから取れること
- ④ 装置の側面及び背面に通風スペースがあること。

2) 操作方法

操作パネルを使って操作する。

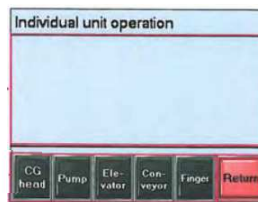

操作パネルイメージ

3) 使用方法

- ① 必要な基本パラメータを操作パネルで入力する。
- ② カバーガラスをセットする。
- ③ 封入剤ボトルの残量確認を行なう。
- ④ バスケットコンテナに染色済の組織切片スライドガラスをセットする。
- ⑤ スタートボタンを押す。
- ⑥ 終わったらコンテナを取り出し、吐出口を掃除する。

【取扱い上の注意】

- ① 作動中は正面パネルを閉めた状態にする。
- ② 操作パネルに液体をかけないように注意する。
- ③ 封入剤の吐出口を常にきれいにしておく。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管環境

温度	10℃～40℃
湿度	80%以上

2) 保管方法

- ① 傾斜のない平な場所に水平に保管する。
- ② 水のかからない場所に保管する。
- ③ 直射日光が当たり高温多湿になる場所には保管しない。

3) 使用期間

取扱説明書・添付文書推奨の保守・点検を行ない、推奨付属品・消耗品を使用した場合に限り、納入後 5 年（保守メンテナンス作業推奨）

【保守・点検に係わる事項】

<使用者による日常清掃・保守点検>

- ① アルコールで装置洗浄。
- ② フード（オプショナル）は市販の中性洗剤を使用し、アルコールや溶剤は使用しない。
- ③ 洗浄液を操作パネルにかけないように注意する。

<定期点検：毎年実施>

- ① カーボンフィルター清掃。必要に応じて交換する。
- ② バッテリーアラームの点検。
- ③ メカニカル部の点検。
- ④ 電気関連部（上下、回転動作、減圧機能、換気扇機能等）の点検。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：オガワ精機株式会社

電話番号：03-6908-5257

外国製造業者：SLEE medical GmbH（ドイツ）

取扱説明書を必ずご参照ください。