


機械器具 2 医療用照明器
一般医療機器 移動型診療用照明器 36843000
ri-magic LED 処置灯

【禁忌・禁止】
ガスが発生する場所では爆発の危険があるため使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 外観・構造

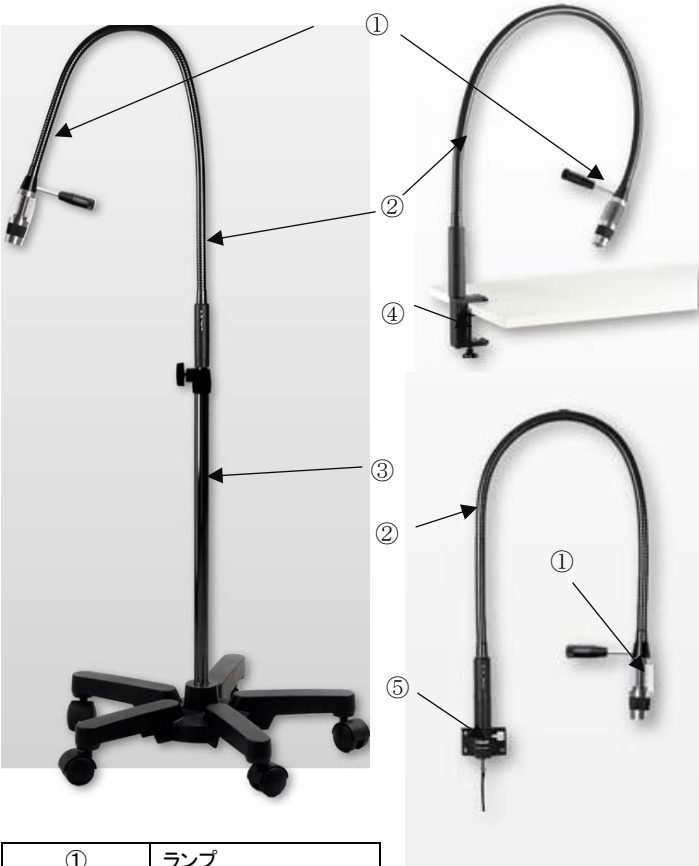

①	ランプ
②	アーム
③	5 脚スタンド
④	デスク固定クリップ
⑤	壁固定板

2. 原理

電源スイッチを“ON（オン）”にすることにより、ライトヘッドのバルブ（LED）を点灯させ、つまみで照度、焦点を調整し、患者診療時に使用する。

***3. 規格・性能**

距離	1000mm	800mm	600mm
照度(±20%)	20,000 Lux	32,000 Lux	55,000 Lux
最大照射野φ	500mm	400mm	320mm
最小照射野φ	80mm	60mm	50mm

距離	400mm	200mm
照度(±20%)	100,000 Lux	170,000 Lux
最大照射野φ	230mm	130mm

最小照射野φ	35mm	20mm
光源	LED 寿命:50,000 時間	
色温度	6,500K	
入力電力	100 V - 240 V / 50 - 60 Hz / 0.6 A	
出力電力	5 V 3 A 15 W	
重量	デスク/壁固定型: 約 2.5 Kg 5 脚スタンド型: 約 7.5 Kg	

【使用目的又は効果】

診療用照明器の全ての特性を備える照明器をいう。パンタグラフ式カウンタバランスアセンブリを備えることが多い。通常、軽症の診療及び治療時に用いる。ある場所から別の場所へ容易に移動できるよう設計されている。

【使用方法等】

- 1) 使用環境
- ①室温が 0 から +40° であること。
 - ②相対湿度が 30 ～75%（結露がない）
- 2) 使用方法
- ①ライトを固定する 5 脚スタンド、デスク固定クリップ、壁固定板などを組立手順書に従い組み立てる。
 - ②ライトとアーム部を固定し、電源ケーブルをコンセントに接続する。
 - ③ライトについているレバー（図 1）を右に回し、クリック音がすると電源が ON になる。レバーを回し続けると照度が高くなる。
 - ④ライト先の焦点リングを回転させ、焦点（照射野）を変更する。
 - ⑤ライトについているレバー（図 1）を左に回すと照度が低くなり、クリック音がすると電源が OFF になる。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管条件
- ・室温 -5° C ～ 50° C,
 - ・相対湿度が 85% 以下、結露がないこと。
- 2) 保管方法
- ①塵埃を避け、使用時の曇り防止のため、使用場所と温度差のない場所に保管すること。
 - ②カビ、やけ、曇り防止のため、炎天下の車内、直射日光下や高温環境下、及び、化学薬品がある場所、ガスが発生する場所では保管しないこと。
- 3) 有効期間
- 取扱説明書・添付文書推奨の保守・点検を行ない、推奨付属品・消耗品を使用した場合に限り、納入後 7 年（自己認証、当社データによる。）

【使用上の注意】

- ①ライトによるダメージを避けるため、同じところに長時間焦点をあてないこと。
- ②目の検査に使用しないこと。
- ③濡れた手や濡れた場所で操作しないこと、水・液体につけないこと。
- ④アームを小回りに曲げないこと。金属疲労の原因になるため。
- ⑤電源そばの固定部の金属部分が高温になる場合があるので触ら

取扱説明書を必ずご参照ください。

ないこと。

【保守・点検に係わる事項】

洗浄・消毒手順

①ランプの部分は、光学用ファイバーで拭くこと。それ以外の部分は、湿らせた布で拭くこと。

消毒する場合は、消毒液を染み込ませたマイクロファイバー布で拭いてください。

②器械洗浄機で洗浄しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：オガワ精機株式会社

電話番号：03-6908-5257

製造業者：Rudolf Riester GmbH（ドイツ）