

**2025 年 7 月改訂（第 5 版）

医療機器届出番号 13B1X10106000016



器具器械（58）整形用器具器械
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

Prosthetic キット

【禁忌・禁止】

- ①本製品を治療の目的以外に使用しないこと。
- ②劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。
- ③器具の形態変更や改造等をしないこと。

**【形状・構造及び原理等】

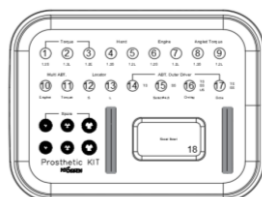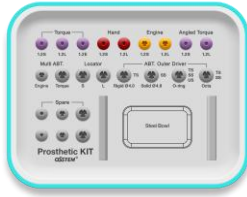

【使用目的、効能又は効果】

本品は歯科用インプラントの外科手術に用いる器具である。手動式で、再使用可能である。

【操作方法又は使用方法等】

1. 適当な器具を選択する。
2. 使用前に滅菌が完了していることを確認する。
3. 適切に処置を行う。
4. 手術の間、使用済の器具は生理食塩水あるいは蒸留水に浸しておく。
5. 手術後、洗浄のためにすべての使用した器具はアルコールに浸す。
6. 血液や不純物を完全に除去するため蒸留水あるいは流水で洗浄する。
7. 乾いた布で拭くか温風循環器で完全に水分を取り除く。
8. オートクレーブ（132℃、15 分）で乾燥させ、室温で保管する。

【使用上の注意】

- ① 術者は、手技等を熟知したうえで使用すること。
- ② 素材のステンレス鋼は鉄に比べて錆びにくい金属であるが、使用方法及び環境によって錆びることがあるので十分に注意すること。
- ③ 金属腐食を起こす恐れのある薬剤、超酸性水等は使用しないこと。
- ④ 使用後は、防錆洗浄後、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- ⑤ 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。
- ⑥ 洗浄、消毒、滅菌後には、十分に水分を除去して保管して下さい。
- ⑦ 磨き粉、金属ウール、金属ブラシを使用しないで下さい。

**【包装】

包装単位：1 個

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎 4-5-37 本多電機ビル 4F

TEL：03-5747-9441

FAX：03-5747-9442

外国製造者：オステムインプラント株式会社

(OSSTEM Implant Co., Ltd.)

外国製造所国：大韓民国

①トルクドライバー	
②ハンドドライバー	
③マシンスクリュードライバー	
④アングルドトルクドライバー	
⑤マルチアバットメントマシンドライバー	
⑥ロケータートルクドライバー	
⑦リジッドアウタードライバー	
⑧ソリッドアバットメントドライバー	
⑨O-リングアバットメントドライバー	
⑩オクタアバットメントドライバー	
⑪トルクレンチ	