

ティッシュハイトゲージ TS

*【禁忌・禁止】

1. 改造の禁止（形態変更や改造等しないこと）
2. 異常時の使用禁止（本品に劣化や異常が見られたときは使用を中止すること）
3. 注意事項の順守（本品の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること）

*【形状・構造及び原理等】

1. 概要及び原理

本品は、ハンドルの両側（ゲージ）に歯肉の厚さを計測する目盛が付属しており、その両側の先端は販売名「TS SA フィクスチャー（承認番号 22400BZI00006000）」の内部テーパー構造に嵌め合う形状である。

ハンドルの側面に「M」及び「S」のサイズマーキングが施されており、「M」のマークがある側の歯肉厚さの計測部位は TS SA フィクスチャーの「ミニサイズ」に対応し、「S」のマークがある側の歯肉厚さの計測部位は TS SA フィクスチャーの「スタンダードサイズ」に対応する。

ゲージは長さ 1mm ごとに凸部と凹部があり、3～4mm 部分及び 7～8mm 部分が黒くマーキングが施されている。

本品は再使用可能である。



図 3

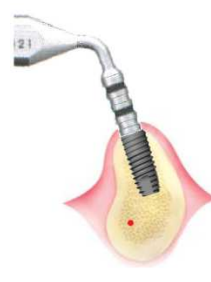


図 4

*【使用上の注意】

- ・本品は販売名 TS SA フィクスチャー（承認番号 22400BZI00006000）以外のフィクスチャーに併用しないこと。
- ・金属腐食を起こす恐れのある薬剤、強酸性水等は使用しないこと。
- ・使用後は精製水及び器具用洗剤を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- ・洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。
- ・滅菌後は水分を十分に除去して保管すること。
- ・磨き粉、金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。

*【保守・点検に係る事項】

- ・推奨滅菌条件は、高圧蒸気滅菌、132℃、15 分以上。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号

TEL：03-5747-9441

FAX：03-5747-9442

製造業者：オステムインプラント株式会社（大韓民国）
（OSSTEM Implant CO., LTD.）

** 2. 形状



** 3. 原材料

ステンレス鋼

*【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる、手動式の再使用可能な器具である。

歯肉の厚さにより様々なサイズが存在する歯科用インプラントアパットメントから、適合するものを選択するために歯肉の厚さを計測するための器具である。

*【使用方法等】

1. 使用前に滅菌が完了していることを確認する。
2. ヒーリングアパットメントを、ハンドドライバを用いて TS フィクスチャーから取り外す（図 1 及び図 2）。
3. ティッシュハイトゲージ TS の先端を、TS フィクスチャーに挿入し、ゲージ部で歯肉の厚さを計測する（図 3 及び図 4）。
4. 手術後、用手洗浄又は器具洗浄機で洗浄し、高圧蒸気滅菌（推奨条件：132℃、15 分）で滅菌し、常温常湿の室内で保管する。



図 1



図 2