


OSSTEM123 フルキット

【禁忌・禁止】

- ・併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- ・他社製品と組合せて使用しないこと。
- ・本品は記載の使用目的以外に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

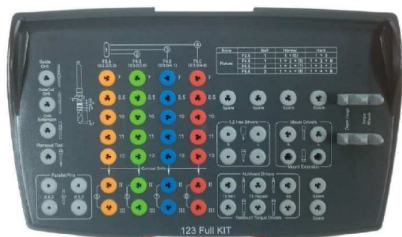

①	123 ツイストドリル	
②	123 コーティカルドリル	
③	123 ガイドドリル	
④	サイドカットドリル	
⑤	パラレルピン	
⑥	ハンドドライバー	
⑦	トルクドライバー	
⑧	シンプルマウント ドライバー	
⑨	シンプルマウント エクステンション	
⑩	ノーマウントドライバー	
⑪	ノーマウントトルク ドライバー	
⑫	ドリルエクステンション	
⑬	リムーバーツールマウント	
⑭	デブスケージ	
⑮	トルクレンチ	
⑯	トルクエクステンション	

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの外科手術に用いる器具である。手動式で、非侵襲的に使用する器具であり、再使用可能である。

【使用方法等】

本品は未滅菌品であるため、使用前にオートクレーブで滅菌を行ってから使用する。（滅菌条件 温度：132℃、時間：15 分）

1. 術中に必要な器具を選択する。
2. 使用前に滅菌が完了していることを確認する。
3. 適切に処置を行う。
4. 手術の間、使用済の器具は生理食塩水あるいは蒸留水に浸しておく。
5. 手術後、洗浄のためにすべての使用した器具はアルコールに浸す。
6. 血液や不純物を完全に取り除くため蒸留水あるいは流水で洗浄する。
7. 乾いた布で拭くか温風循環器で完全に水分を取り除く。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - ① 歯科従事者は、使用する際に本品の外観を確認し、汚れ、損傷、欠け傷等の異常がない事を確認すること。
 - ② 歯科従事者は、本品の使用に際し、手技及びその手順について十分に熟知した後に使用すること。
 - ③ 術中に患者が本品を誤飲しないように十分注意して使用すること。
 - ④ 組合せて使用する製品は、適度な嵌合状態を保つことを術前に確認することをお勧めする。
 - ⑤ 本品やアパットメントに無理な力をかけないこと。

2. 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）

〔併用禁忌・禁止〕（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社指定以外の医療機器	インプラントや機器等が正常に動作せず、緩みや破損につながるおそれがある	インプラントが適切に埋入できないため、固定力等が不足する

*【保守・点検に係る事項】

オートクレーブ（132℃、15 分）で乾燥させ、室温で保管する。

*【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN
東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号
TEL：03-5747-9441
FAX：03-5747-9442

製造業者：オステムインプラント株式会社（大韓民国）
（OSSTEM Implant CO., LTD.）