


オステム OneJet SG

【禁忌・禁止】

- ・ 本品は、【原材料】項に記載の材料に発疹又は皮膚炎等過敏性症状等の既往歴がある患者には使用しないこと。
- ・ 本品は、専門的で体系的な手順が必要なので、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・ 本品の改造はしないこと。改造は出力失敗や施術失敗、変性を起こす恐れがあります。

【形状・構造及び原理等】

1. OneJet SG

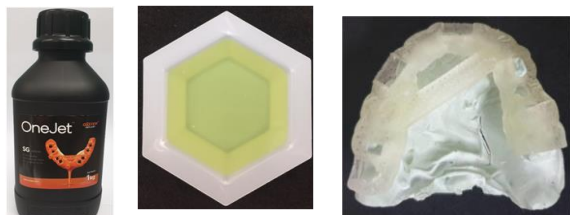

出力前

出力後

番号	名称	カタログ番号	容量
(1)	OneJet SG	OJSG	1kg
(2)		OJSG-500	500g

【原材料】

ウレタンメタクリレート、エトキシ化ビスフェノール A ジメタクリレート、メタクリル酸テトラヒドロフルフリル、ジフェニル(2,4,6-トリメチルベンゾイル)ホスフィンオキシド

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科用インプラント外科手術に用いる材料である。

【使用方法等】

1. 使用前に、均質性確保のため、製品を瓶ごと 5 分間よく振って混合してください。
2. 3D プリンターのレジン水槽に製品を注いでください。
3. 50~100 回シリコンのゴム杓子のような物体でゆっくりかき回してください。この際に、気泡が発生しないようご注意ください。
4. 各会社の 3D プリンターを取扱説明書通り操作し、出力してください。
5. 出力されたサージカルガイドを Building Platform から脱着させ、サポートを除去してください。
6. 超音波洗浄機に清浄なイソプロピルアルコール(IPA)をセットし、出力されたサージカルガイドについている残余樹脂液を 3 分間洗浄してください。
7. 超音波処理を終えたさーじかるガイドを清浄なイソプロピルアルコール(IPA)で 3 分間洗浄してください。
8. 日陰の乾いた場所で 10 分間乾燥させるか、加圧空気を利用し洗浄液を乾燥してください。この際に、残余樹脂液が洗浄されていない場合は、5 番から 7 番までの作業をもう一度行ってください。
9. 下記の条件で後硬化してください。

後硬化時間(分)	波長帯	光量	光エネルギー
30 分	Blue UV-A 380-450nm	72W	129.6 kJ
10 分		216W	

10. 滅菌又は殺菌が必要な場合は、70%のエタノール水溶液に

浸すか、湿熱滅菌(オートクレーブ)で滅菌してください。この際に、他の化学用品を使用してはいけません。湿熱滅菌時には、121℃で 15 分間、もしくは 134℃で 5 分間の条件下、行ってください。

【使用上の注意】

- ・ 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 本品で制作した出力品にアレルギー反応がある場合は、すぐに医師と相談すること。
- ・ 本品を摂取しないでください。もしも口腔内に入った場合、ただちに水で接触部位を洗浄し、医師と相談すること。
- ・ 本品の蒸気を吸入しないでください。蒸気を吸入した場合、清浄な空気があるところに即時移動してください。もしも問題が発生したり、持続される場合医師と相談すること。
- ・ 添付文書及び取扱説明書に従って使用すること。
- ・ 有効期限が過ぎている製品は使用しないこと。

【保管方法及び有効期限】

〔保管方法〕

- ・ 15~25℃の乾燥している日の当たらないところに保管してください。

〔有効期限〕

- ・ 製造日から 2 年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 OSSTEM JAPAN

東京都品川区上大崎四丁目 5 番 37 号

TEL : 03-5747-9441

FAX : 03-5747-9442

製造業者：OSSTEM IMPLANT Co., Ltd. (大韓民国)
(オステムインプラント株式会社)