

2024 年 8 月 2 日作成（第 1 版）

医療機器製造販売届出番号：I3B3X10I79000006

2025 年 10 月 21 日作成（第 2 版）


機械器具 48 注射筒
一般医療機器 家庭用精液注入用シリンジ 64137001
プレメントシリンジ リング

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

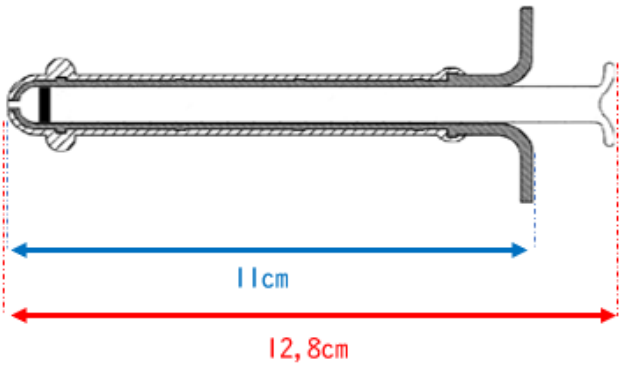

長さ：128mm±0,5mm

各部の名称および成分

名称	成分
カテーテル	・エラストマー（表面） ・ポリエチレン（内部）
プランジャー	ポリプロピレン
O リング	エラストマー

【使用目的、効能又は効果】

1. 本品は膣内に挿入し、先端の開口部より精液を子宮内に注入する。
2. 本品は単回使用である。

【操作方法又は使用方法等】

1. 本品の使用に際して必要に応じ以下のものを準備する。
 - ・本品
 - ・プレメント採精シート mini
 - ・プレメント採精シート mini 固定具
2. 本品を開封後、プレメント採精シート mini に採取した精液をカテーテル先端の開口部からシリンジのプランジャーを引いてゆっくり吸引して下さい。
3. 本品を膣内に挿入して下さい。
4. 精液をゆっくりと注入して下さい。
5. 精液の注入後、本品をゆっくりと抜去して下さい。

【使用上の注意】

1. 開封は使用直前に行うこと。
2. 万一、包装が破損している場合、または製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
3. 使用に際して不安がある方は、ご使用前に専門医に相談して下さい。

【貯蔵・保管方法】

1. 貯蔵・保管方法

水漏れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【包装】

1 本／袋 1 個（個別包装）

【製造業販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元
株式会社 オンリースタイル
〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 2-18-9 第 2 オーエスビル
TEL03-4455-7426 FAX 03-4586-6331
MAIL:customer-info@onlystyle.jp