

## 医04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣（71105001）

## CW-X &amp; RECOVERY ユニセックスアウタートップス(長袖)

## 【禁忌・禁止】

以下の部位には使用しないでください。

## (1) 感染部位

[血管拡張と血流増加が、炎症、かゆみ・かぶれを悪化させる恐れがあります。]

## (2) 出血部位または出血の可能性がある部位

[血管拡張が出血の増大または出血をひき起こす恐れがあります。]


## (3) その他医師が不適当と判断した部位

## 【形状・構造及び原理等】

## 1. 形状・構造

原材料：ポリエステル（アースメディカルパウダー\*を含む）

\*アースメディカルパウダーは数種類の金属を含む微細粒子です。

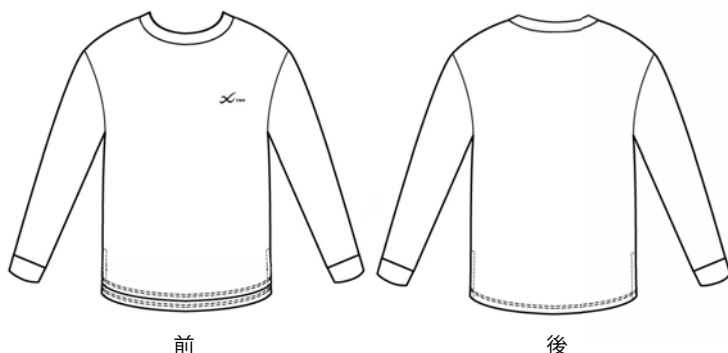

前

後

## 2. 原理

ポリエステル繊維に含まれるアースメディカルパウダーが体熱の遠赤外線を輻射します。

## 【使用目的または効果】

遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善します。

## 【使用方法等】

1. 本品を衣服として直接着用してください。
2. 本品は再使用が可能です。

## 【使用上の注意】

1. 治療中の方や下記に該当する場合は、必ず医師または専門家と相談の上で使用ください。
  - (1) 妊娠初期の不安定期または出産直後の方
  - (2) 糖尿病等による高度な末梢循環障害および知覚障害のある方
  - (3) 急性損傷や急性炎症がある方
  - (4) 血栓性静脈炎の疑いのある部位
  - (5) 悪性腫瘍組織またはその周辺の部位
  - (6) 局所性刺激製剤を使用した部位
  - (7) 重度の浮腫がある方
  - (8) 体温が38℃以上の方
  - (9) 血行促進作用のある薬を服用している場合
2. 他の治療器と同時に使用しないでください。
3. 使用中に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止してください。
4. 患部に発疹、かゆみ、赤みなどが現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
5. しばらく使用して効果が現れない場合は、医師などの専門家に相談してください。
6. 本品を改造しないでください。
7. お手入れの方法は取扱い表示に従ってください。

## 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
直射日光と高温多湿を避けて保管してください。
2. 耐用期間  
3年

## 【取扱い上の注意】

本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化が生じる場合がありますのでご注意ください。

## 【保守・点検に関わる事項】

使用前の製品に異常が見られた場合は、使用せず、弊社の窓口までご連絡ください。

## 【製造販売業者の氏名又は名称】

製造販売元：オンヨネ株式会社  
住所：〒940-8548 新潟県長岡市高見町4327番地  
お問い合わせ先：0258-24-0048

## 【販売元】

販売元：株式会社ワコール  
住所：〒601-8530 京都府京都市南区吉祥院中島町29  
お問い合わせ先：ワコールお客様センター<https://www.wacoal.jp/support/>