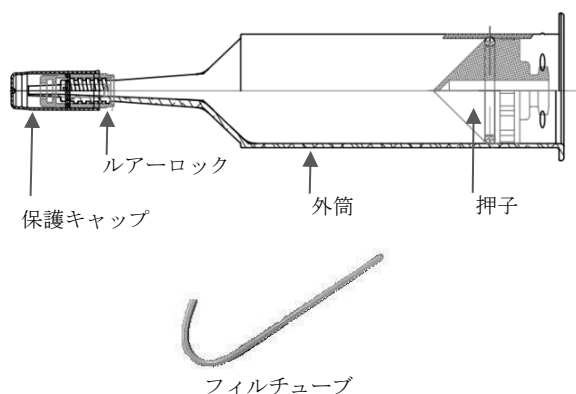


再使用禁止

AGS 血管造影用耐圧シリンジ**【禁忌・禁止】**

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。
3. 長時間使用しないこと。
4. 本品押子ヘッドと注入装置のヘッド形状が合致しない場合は使用しないこと。
5. 耐圧性能を上回る条件で使用しないこと。[破損するおそれがあるため]

【形状・構造等及び原理等】**構成**

125mL または 150mL の容量を持つものが本品の構成成品である。 各々、付属品として、注射筒内に造影剤を充填するためのフィルチューブが付属するものとそうでないものがある。

型番	フィルチューブ (有無)	容量
AGS-F125	有り	125mL
AGS-FN125	無し	125mL
AGS-F150	有り	150mL
AGS-FN150	無し	150mL

原理

本品は造影剤注入装置に接続して、血管造影剤を注入するときの注射筒として使用する。

性能

耐圧: 8.27MPa (1200psi, 84kgf/cm²)
筒先(接続部)の形状: 規格 ISO594-1, ISO594-2 に適合

【使用目的又は効果】

心臓及び脈管を検査するため、薬液等を心臓、大血管及び冠動脈に注射(注入)する。

【使用方法等】

1. 本品を包装から取り出す。
2. 造影剤注入装置にセットして、充填用のフィルチューブを使用して必要な薬剤を充填する。
3. 造影用耐圧チューブなどの接続部と確実に接続していることを確認する。
4. 造影剤注入装置の取扱説明に従い、薬剤を患者に注入する。
5. 薬剤の注入が終わったら、造影剤注入装置から取り外す。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本品を使用する前に、次の事項に注意すること。
 - 接続部がしっかり接続されていることを確認すること。
 - 接続部に薬液が触れないこと。
2. 本品の使用中は次の事項に注意すること。
 - 機器に患者がふれることのないよう注意すること。
 - 外筒に薬液がついた状態で放置しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 水ぬれに注意して、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管すること。
 - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。
 - 紫外線による殺菌光を避けること。
2. 使用期限
製品の包装に表示されている(自己認証による)。

【包装】

最小包装単位本数は以下の通り。

AGS-F125、F150	50 本/箱
AGS-FN125、FN150	20 本/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: ORT メディカル株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-7-19

竹生第2ビル9階

電話: 045-534-7015 Fax: 045-534-7760

製造業者: 四川省広元市康康医療器械有限公司
(中国)