

添付文書

2024 年 2 月（初版）

届出番号 14B2X10038000004

機械器具(25) 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用送水タンク JMDN 36500042
ウォータータンク

【警告】

使用方法

- 本品を使用する前に必ず構成品を分解して洗浄・消毒を行うこと。[消毒を行わないと、送水タンク内に細菌が繁殖し、患者様の人命に関わる悪影響を及ぼす恐れがあります。]
- EOG滅菌は行わないこと。

【禁忌・禁止】

使用方法

- 送水装置使用中は、送水タンクが空にならないように注意すること。
- タンク内に入ったチューブ先端が水面上に出ていることを確認すること。
[患者の体内に意図しない空気を送ると医療事故につながる危険性があります。]


【形状・構造及び原理等】

1.構成: 本品の構成は下記のとおり

- ① ウォータータンク本体（2L または 4L）
- ② タンク蓋
- ③ チューブガイド（タンク蓋に取付）
- ④ ガイドストッパー（チューブガイドに取付）から構成されています。

2.各部の名称

1. の構成を参照

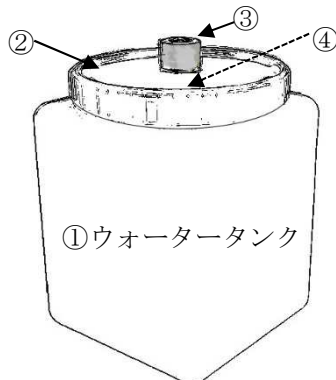

④はボトルキャップの裏側にあり、タンク蓋にチューブガイドを取付けるネジです。

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡用送水装置に接続する送水用の貯水タンクです。

【使用方法】

準備

- ・本品を使用する前に必ず構成品を分解して、全て消毒を行う。
- ・タンク蓋にチューブガイドを差込み、反対側をガイドストッパーで締め付ける。
- ・タンクに貯水後、タンク蓋を取付ける。
- ・チューブガイドに送水チューブの送水側を差込む。このときタンク内の水が減っても送水ができるようにチューブは充分に奥まで差込むこと。

使用中

- ・送水タンクが空にならないように注意する。
- ・チューブ先端が水面上に出ていることに注意する。

使用後

- ・送水チューブを引き抜く。
- ・使用後はタンク蓋部を分解し、タンクを含めた全ての構成品を洗浄する。

＜組合わせて使用する送水装置＞

ウォータープリーズ 2 認証番号:302AGBZX00071000

ウォータープリーズ 認証番号:220AHBZX00007000

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

本品は未滅菌品なので使用前に必ず消毒すること。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管すること。

2. 使用期限

液漏れが無い限り使用できる。

【保守・点検に係る事項】

経時変化により劣化するので注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ORT メディカル株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19

竹生第2ビル9階

電話番号：045-534-7015

製造業者

ORT メディカル株式会社