

医療用品 04 整形用品
一般的名称 アイパッド 11661000

再使用禁止


CVN アイガード

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・滅菌禁止

【形状・構造及び原理】

1. 形状、構造及び寸法

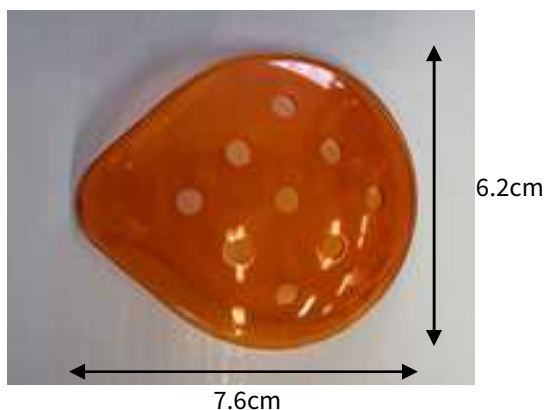

2. 原材料

ポリカーボネート

3. 原理

眼の傷の早期治癒、感染を防止する。

【使用目的又は効果】

眼の保護に用いる。

【使用方法】

- (1) 湾曲面を鼻に当てアイガードを目に装着する。
- (2) アイガード上部をテープで固定する。テープは額の中央から耳の中央まで貼る。
- (3) アイガードが固定されるように、さらにテープを重ねて貼る。

【使用上の注意】

本品は未滅菌品である。創傷部位に直接触れないように使用すること、

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法：水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。
2. 有効期間：製造後 5 年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル
神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目 1 4 番地 2 0
電話：045-470-9041（代） FAX：045-470-9043

2. 製造業者

CVN Medical Solutions（フィンランド）