

2022 年 9 月 7 日 作成

届出番号 25B3X10007000001

歯科材料 07 歯科用ワックス

一般医療機器 歯科用咬合堤ワックス JMDN 38602000

コスモスロウテイワックス


【警告】

- ・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・溶解された本材を直接人体に使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

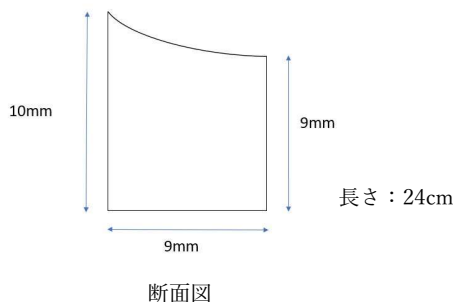

内容量：1kg／袋

主成分：

タイプ	原材料	原材料比
ノーマル	パラフィンワックス	1
	マイクロクリスタリンワックス	1
タイプ	原材料	原材料比
ハード	パラフィンワックス	1
	マイクロクリスタリンワックス	0.5

その他着色剤

【使用上の注意】

1) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

2) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3) 使用注意

- ・可燃性であるので、使用の際に火傷をしないように注意する。
- ・人体及び口腔内で軟化处理などの形成をしない。
- ・義歯床のロウ型作製以外の目的に使用しない。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・直射日光、高温多湿の場所を避けて保管する。
- ・火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しない。
- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社 キャスティング・オカモト

〒 520-1603

滋賀県高島市今津町北仰 452

TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070

〔製造業者〕

株式会社 キャスティング・オカモト

〒 520-1603

滋賀県高島市今津町北仰 452

TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070

【使用目的又は効果】

上下顎関係を記録するために用いる歯科材料(模型用ワックス)。咬合堤を作る材料。

【使用方法等】

- ①パラフィンワックス又はベースプレート用レジンを 이용하여 ベースプレートを作製する。
- ②本材を必要な大きさにカットする。
- ③トーチ等を用いて適度に本材を軟化させベースプレートに圧接する。(高さに不足がある場合は軟化したパラフィンワックスを当該品とベースプレートの間に足す。)
- ④形を整え、歯科技工の通法により作業する。