

2023 年 10 月 11 日（第 2 版）

2022 年 8 月 17 日（第 1 版）

届出番号 25B3X10007000002

歯科材料 07 歯科用ワックス

一般医療機器 歯科印象用ワックス JMDN 34807000

コスモスバイトワックス

【警告】

・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】

・指定された用途以外には使用しないこと。


【注意】

- ・本品に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴がある術者は手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。また本材の使用により過敏症を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- ・本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の既往歴がないことを患者に確認すること。また、本材の使用により過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けること。

【形状、構造及び原理等】

内容量：1kg／袋 ， 500 g／袋

主成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、着色剤

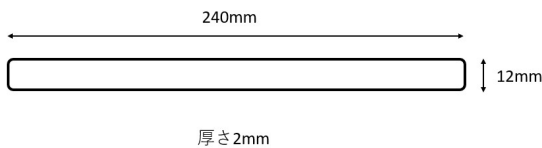

【使用目的又は効果】

本材は咬合採取等に用いるワックスである。

【使用方法等】

- ①本品を必要な長さにカットする。
- ②熱を加え適度に軟化させる
- ③噛み合わせた本品を口腔内から取り出し、咬合採取を行う。

【使用上の注意】

1) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

2) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3) 使用注意

- ・可燃性であるので、使用の際に火傷をしないように注意する。
- ・人体及び口腔内で軟化处理などの形成をしない。
- ・歯科の従事者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・直射日光、高温多湿の場所を避けて保管する。
- ・火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しない。
- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社キャスティング・オカモト

〒 520-1603

滋賀県高島市今津町北仰 452

TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070

〔製造業者〕

株式会社 キャスティング・オカモト

〒 520-1603

滋賀県高島市今津町北仰 452

TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070