

2023 年 1 月 15 日 作成

届出番号 25B3X10007000008

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科鑄造用シートワックス JMDN 70894000
コスモスキャスティングシートワックス

【警告】

- ・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。


【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 警告
【警告】の項目に記載のとおり。
- 2) 禁忌・禁止
【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。
- 3) 使用注意
 - ・可燃性であるので、使用の際に火傷をしないように注意する。
 - ・義歯床のロウ型作製以外の目的に使用しない。

【形状、構造及び原理等】

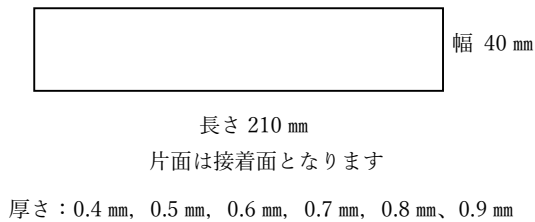

内容量：0.4mm,0.5mm,0.6mm 70 枚／箱
0.7mm,0.8mm,0.9mm 50 枚／箱

原材料 合成ワックス
融点 130℃

【使用目的又は効果】

床、バー、クラスプ等の鑄造ろう型を作製するために用いるワックスです。

【使用方法等】

- ① 金属床などの蠟型の作製時に使用します。
- ② 弱い火炎で軟化すれば複雑な形状の原型にも使用できます。
- ③ 埋没は、通常方法に従い作業してください。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・直射日光、高温多湿の場所を避けて保管する。
- ・火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しない。
- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理する。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社 キャスティング・オカモト
〒 520-1603
滋賀県高島市今津町北仰 452
TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070

〔製造業者〕

株式会社 キャスティング・オカモト
〒 520-1603
滋賀県高島市今津町北仰 452
TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070