

機械器具 80 はり又はきゅう用器具

一般医療機器 非能動型接触鍼 (JMDN コード 70613001)

販売名：集毛鍼ゴールド


【禁忌・禁止】

- ・ 強打、もしくは強く押し付けることを避けること。
- ・ 皮膚に傷をつけないこと。
- ・ 目に直接刺激を与えないこと。
- ・ 妊婦、救急事態もしくは手術を必要とする場合、悪性腫瘍、出血性疾患等。


【形状・構造及び原理等】

本品は刺激の強さにより強タイプ・弱タイプ・強弱両用タイプの 3 タイプがある。

① 針 ② ホルダー ③ キャップ
④ 裏ブタ ⑤ スプリング

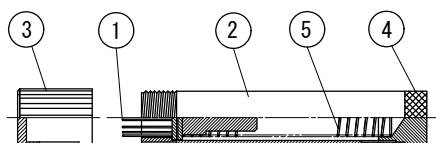

① 針 ② ホルダー ③ キャップ ④ ジョイント
⑤ 弱(1 本線) ⑥ 強(2 本線) ⑦ スプリング

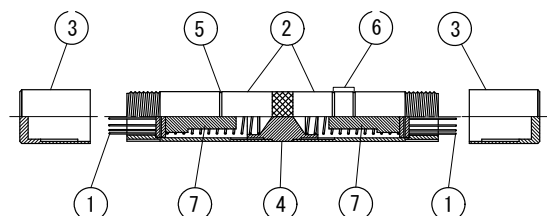

【使用目的、効能又は効果】

- ・ 外科的麻酔、疼痛緩和、又は他の治療効果を促進するため、皮膚内に挿入せず、皮膚への接触によって抹消神経を刺激する再使用可能な非能動型器具。

【品目仕様】

- ・ 針が上を向くように固定し、針先に錘を載せ、針先がホルダーの中に入る重さを測定する。
強タイプ 200 g ± 10 g
弱タイプ 100 g ± 5 g

【作動原理】

- ・ 本品は、スプリングの反発力を利用して針が皮膚へ接触し、末梢神経に刺激を与えることで、疼痛緩和又は他の治療効果を促進することを目的としたものである。

【操作方法又は使用方法等】

- ・ アルコール又は、紫外線消毒をして使用すること。
- ・ 軽くリズムカルに刺激を与えるように使用すること。

【使用上の注意】

- ・ 刺激部位をアルコール等で消毒してから使用すること。
- ・ ご使用前に、刺激感覚を体験してから、使用すること。
- ・ 針先を確認し、湾曲や損傷等がある場合は使用しないこと。
- ・ 刺激時に出血をする場合は、使用しないこと。
- ・ 目の周囲に使用する場合、充分に注意をして行うこと。
- ・ 使用後は、皮膚をアルコール等で消毒すること。

【貯蔵・保管方法及び耐用期間等】

- ・ 水濡れ、化学物質、湿度、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響を受けない場所に保管してください。
- ・ 耐用期間等
針またはバネの部分が破損、変質等生じるまで。
使用方法、環境等により耐用期間が異なります。

【包装】

- ・ 1 本／箱入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：株式会社カナケン

住 所：神奈川県横浜市青葉区美しが丘 2-17-39

電 話：045-901-5471

製 造 業 者：株式会社カナケン 稲城工場

住 所：東京都稲城市東長沼 942-1