

器 02 医療用照明器
一般医療機器 診療用照明器 JMDN コード 12276000

診療用処置灯 デネブ LED 3500



【警告】

清掃する時は水分が機器内部に染み込まないようによく絞ったタオルを使用すること。

[水分が機器の内部に染み込んだ時は装置に不具合が生じます。]

【形状・構造等及び原理等】

仕様により、天井から懸垂、または壁面に固定する。

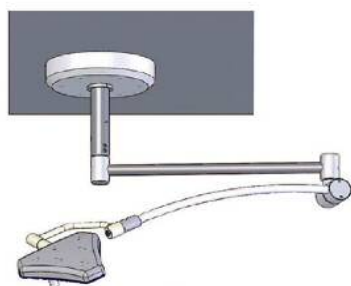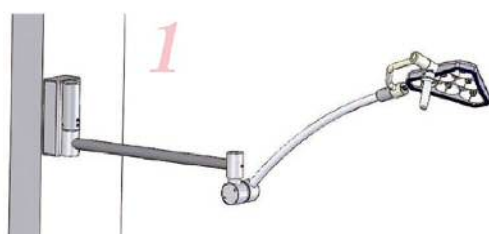

〈天井懸架システム〉 2

100V電源に接続し、灯体内のLEDランプを点灯する。

【使用目的又は効果】

患者の診療及び治療時に用いる。

回転する水平アームとスプリングアームにより高さや方向が変えられる照明器である。

通常、軽症の診療及び治療などに用いる。

【使用方法等】

灯体部のクォーターアームの付け根にある電源スイッチで点灯／消灯を行う。

灯体の接続部にある滅菌ハンドルを持って、方向と距離を調節する。

通常の操作方法は、取扱い説明書の指示に従うこと。

【使用上の注意】

使用方法等に関する使用上の注意

必ず専門業者により天井又は壁に堅牢に取り付けること。
クラスⅠ B型 医用電気機器の使用上の注意に準ずること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

医用室内の天井／壁に設置された状態で引き渡す。

耐用期間

通常の使用で7～10年を使用期間としているが、使用頻度等によっても変化する。

[自己認証(社内データ)による。]

LEDの寿命時間 >60,000時間

【取扱い上の注意】

通常の取り扱いを行う場合は、特になし。

消毒・滅菌は指定された部分(ハンドル等)以外は出来ません。

ハンドル滅菌条件: AC滅菌 134℃ 10分

【保守・点検に係わる事項】

使用者による点検項目*

ご使用前に、LED点灯状況、可動部のカバー等にネジのゆるみ、変形が無いことを確認。

異常を感じたら、取扱説明書に従って処置して下さい。

ご使用前に塗膜のはがれ等の異常が無い点検してください。

異常がある場合は、修理または補修が完了するまで絶対に使用しないでください。

業者による保守点検項目

半年、1年毎に取扱説明書に従い、実施する。

LEDランプは、交換できません。

修理は、メーカーより技術指導を受けた修理業者が行い、記録を保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: エア・ウォーター防災株式会社

〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台 3-2-16

TEL 078-992-1400

外国製造業者: S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co.KG
ドイツ国

[販売業者]

取扱説明書を必ずご参照下さい