

医04 整形用品
一般医療機器 綿状パッド 32572000
アルギセーブ


再使用禁止**【禁忌・禁止】**

1. 使用方法
 - 1). 再使用禁止
 - 2). 再滅菌禁止
2. 適用対象(患者)
 - 1). 本品の成分に対してアレルギーを有する患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要
本品は海藻類を原料とするアルギン酸カルシウム繊維からなる不織布状の製品で、パルプ/プラスチックフィルムからなる包装材料で梱包された製品である。

2. 形状・構造
 - 1) 本品の形状例は下記のとおりである。

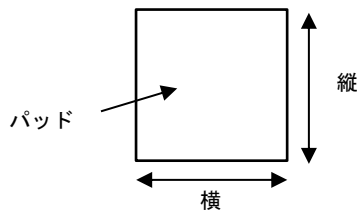

原材料：アルギン酸カルシウム繊維

- 2) サイズバリエーション (縦 mm×横 mm)
15×20、25×25

3. 原理
アルギン酸カルシウム繊維からなる本品を穿刺部位、外科切開部等に適応すると、血液、浸出液などの体液を吸収してゲル化することにより、止血に寄与する。

【使用目的又は効果】

穿刺部位、外科切開部等の止血及び液の吸収のために使用する。

【使用方法等】

1. 使用用途に合わせて適切なサイズを選択すること。
2. 包装材料より本製品を無菌的に取り出す。
3. 本品を直接穿刺部位、外科切開部等に押し当て、針・カテーテル等を抜去する。
4. 止血が完了するまで、施設毎の手順に従い、圧迫止血を継続する。使用中は止血の状態を適時確認し、圧迫の程度を調節すること。
5. 止血確認後は、施設毎の手順に従い、圧迫を加えながら、本品を上からガーゼ、フィルムドレッシング等を当てて固定し使用する。
6. 本品を除去するときは、穿刺部、外科切開部等に負担がかからないように、端からゆっくり除去する。除去が困難な場合は、本品を生理食塩液等でぬらし、少しずつはがすこと。穿刺部に本品が残った場合は、生理食塩液等で、洗い流すこと。

【使用上の注意】

1. 体内に留置しないこと。
2. 滅菌品であるため、包装開封後は速やかに使用すること。
3. 開封した残品は使用しないでください。

4. 本品の使用時、刺激を感じたり、かぶれたり、発赤、かゆみ等があらわれた場合は使用を中止し医師に相談すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
2. 有効期間
3年(自己認証による)。
本品の使用期限は包装に記載されている。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：川本産業株式会社
TEL 06-6943-8956 (お客様相談窓口)
(10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く)