

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング（JMDNコード：31724000）

ジョブスト ファローラップ クラシック

【警告】

＜適用対象（患者）＞

次の患者に使用する際には、特に注意すること

1. 深部静脈血栓症の患者。〔本品を装着すると肺血栓塞栓症を起こすおそれがあるため。〕
2. 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症性疾患、化膿性疾患、創傷のある患者（創傷がある患者に使用する場合は、ドレッシング材等で被覆してから着用すること）。〔圧迫により症状が悪化するおそれがあるため。〕
3. 装着部位に神経障害のある患者。〔血行障害を起こしても認識できないおそれがあるため。〕
4. 糖尿病患者。〔無症状の神経障害や血行障害を併発している可能性があり、痛み等の異常を認識できないおそれがあるため。〕
5. 繊維に対して過敏症のある患者。〔接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。〕

＜使用方法＞

医師が必要と認める場合を除き就寝時は着用しないこと。
〔臥位になることで静脈還流等に変化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあるため。〕

【禁忌・禁止】

1. 重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者。〔圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。〕
2. 感染性静脈炎の患者。〔菌血症や敗血症を発生、増悪させるおそれがあるため。〕
3. 装着部位に極度の変形を有する患者。〔適切な圧迫圧が得られないため。〕

【形状・構造及び原理等】

＜構造図（代表図）＞




- ※サイズは、XSからXLまで5サイズある。
※レッグピース、サイピースには、専用のライナー（スリーブ形状）が2本付属する。
※レッグピースのライナーとして、「ジョブスト ファローラップ クラシック（医療機器届出番号 27B1X00006651307）」の付属品であるハイブリッドライナーを使用することも可能である。
※サイピースは、大腿用パーツとひざ用パーツが同梱されている。
※サイピースひざ用パーツは、ひざ裏部分に食い込み防止のためのスポンジポケットがあるが、スポンジは取り外しても使用できる。

1. 規格・寸法

単位：cm

形状	長さ	サイズ	XS	S	M	L	XL
フットピース	レギュラー	足背周径 (A1)	22-24	25-27	28-30	31-34	35-40
		踵から小指付け根までの長さ (L3)	16-17	17-18	19-20	20-21	22-23
レッグピース	レギュラー	ふくらはぎ周径 (C)	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68
		足首周径 (B)	21-25	25-30	30-36	36-42	42-50
		膝下長さ (L2)	33-37	35-39	37-41	39-43	39-43
サイピース 大腿用 パーツ	共通	股下周径 (G)	60-70	65-75	70-80	75-90	85-100
		膝上周径 (E)	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80
	ショート レギュラー	股下から膝上までの長さ (L1)	16-20	16-20	16-20	16-20	16-20
			21-26	21-26	21-26	21-26	21-26
サイピース ひざ用 パーツ	レギュラー	膝上周径 (E)	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80
		ふくらはぎ周径 (C)	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68

足首部での圧迫圧は30-40mmHg (40-53hPa)

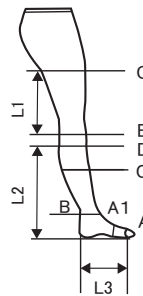

ライナー種類とサイズ

単位：cm

種類	タイプ	サイズ	周径
ファローライナー （レッグピース用）	ひざ下丈	S	15-58
		L	52-70
テリーライナー （サイピース用）	太もも丈	M	40-70
		L	70-120

2. 材質

フットピース、レッグピース、サイピース大腿用パーツ
＜本体＞ 綿、ポリアミド、ポリエステル、ポリウレタン
サイピースひざ用パーツ
＜本体＞ ポリアミド、ポリウレタン
＜スポンジ＞ ポリウレタン

共通

＜面ファスナー＞ ポリアミド

＜ライナー＞ 形状により以下のいずれかが付属。

(1) ファローライナー：ポリアミド、ポリウレタン

(2) テリーライナー：綿、ポリウレタン

＜原理＞

弾性素材が装着部に同心性の圧迫力を加えると同時に、末梢部から中枢に向かって圧迫力が漸減する構造になっている。

【使用目的又は効果】

本品は、下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキング等である。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能をもつ。

【使用方法等】

1. 装着前（サイズの決定）

- (1) 浮腫の発生状況、圧迫する目的に応じ、形状を選択する。
- (2) 各測定箇所の周径を全て計測し、適正なサイズを選択する。
注意：サイズが複数にまたがる場合、基本的に大きいサイズを選択する。

2. 装着方法

- (1) 専用のライナー又は「ジョブスト ファローキック（医療機器届出番号 27B1X00006651307）」の付属品であるハイブリッドライナーを装着する。（フットピースのみの場合は装着しない）
- (2) フットピースは、足の踵の部分を含わせ、足の甲、くるぶしの部分と順に引いて面ファスナーで固定、装着する。
- (3) レッグピース、サイピース大腿用パーツはいずれも製品タグの入っている側を内側で上（近位側）に来るように置き、一番下（踵に近い側）のバンドから適度に引っ張り面ファスナーで固定、装着する。
- (4) フットピース、レッグピース、サイピースを併用するときはつま先に近い製品から順に装着する。
- (5) サイピースひざ用パーツは、レッグピース及びサイピース大腿用パーツ着用後に装着すること。製品タグが上（近位側）に向くようにし、中央部分のバンドがひざ裏に当たるように合わせ、適度にバンドを引っ張って面ファスナーで固定する。残りのバンドは順次つま先に近い方から同様に装着する。
- (6) 装着後、脚全体をなで、ねじれやたるみがないようになじませる。
- (7) 本品を外した後は、バンドを外側に丸めて面ファスナー部分をバンドにつけ、保管する。

【使用上の注意】

＜使用注意（次の患者には慎重に適用すること）＞

1. 患者との意思疎通が困難な場合には患者の状態をよく観察して使用すること。〔動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症した際に、発見が遅れるおそれがある。〕
2. ギブス、外傷等により装着部位が長時間不動状態にある患者には、注意して使用すること。〔潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性がある。〕
3. 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止すること。
〔動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがある。〕

＜重要な基本的注意＞

1. 正しい圧迫圧を得るため、装着部位の規定箇所を必ず計測し、正しいサイズの本品を選択する。またサイズ適応外の場合には使用しないこと。
2. 圧迫圧の過不足を防ぐため、たるみやしわのないように装着する

こと。本品が、装着中にたるんだり、しわが寄ったり、ずり落ちたり、誤った位置に装着されている場合には正しく装着しなすこと。

〔適正な圧迫圧が得られず、また血行障害や神経障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあるため。〕

3. 腫脹の軽減等により装着中に各部位の周径が変わった場合は、適切なサイズに変更すること。

4. 本品に、破損（ほつれ、破れ等）がないことを確認してから装着すること。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないこと。

5. 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損することがあるので注意すること。

- (1) 強く引き伸ばしての装着
- (2) 爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着
- (3) 肌荒れした手や伸びた指の爪での取扱い
- (4) 鋭利なものへの接触
- (5) 指輪、ブレスレットをつけたままでの装着

6. 本品をはさみで切るなど加工、修理を行わないこと。

7. 本品は圧迫療法に精通した術者が、必ず装着者に使用方法を説明し、正しい装着手順で使用を開始すること。
また患者との意思疎通が困難な場合には、看護、介護介添する者に使用方法を説明すること。

8. 軟膏等の薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化するので付着しないよう注意すること。

9. 面ファスナー着脱時は、無理やり引っ張らずゆっくり剥がすこと。生地の劣化、毛羽立ち、面ファスナーの接着力の低下の原因となる。

10. 他の製品と組み合わせて併用する場合は、生地の重なり、圧迫圧に十分注意して使用すること。

〔適正な圧迫圧が得られず、また血行障害や神経障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあるため。〕

11. 使用時又は洗濯時に糸くず等が付着することにより粘着力が低下することがあるため、適時糸くず等を除去して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

高温、多湿、直射日光を避け、室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 水と市販の漂白剤を含まない中性洗剤で洗濯し、洗濯機を使用する場合には、洗濯ネットを使用すること。
2. 洗濯の際は、面ファスナーを留めた状態にしておくこと。
3. 直射日光を避け陰干しにすること。乾燥機は使用しないこと。
4. 塩素系の漂白剤の使用、柔軟剤の使用、ドライクリーニング、アイロンがけは生地を傷めるのでしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：川本産業株式会社

電話 番 号：06-6943-8956（お客様相談窓口）
（10：00～17：00 月～金ただし祝日を除く）

外国製造所：ビーエスエヌ メディカル エスエイ デ シーバイ
BSN Medical, S.A. de C.V.

国 名：メキシコ

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング (JMDNコード : 31724000)

「ジョブスト ファローラップ クラシック」の付属品 ライナー

【警告】

<適用対象(患者)>

繊維に対して過敏症のある患者。

[接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

<構造図>



※本品はジョブスト ファローラップ クラシックの付属品である。

1. ライナーの種類とサイズ

単位: cm

ライナー	製品	サイズ	ライナー周径
ファローライナー (レッグピース用)	XS, S	Sサイズ	15 -58
	M, L, XL	Lサイズ	52 -70
テリーライナー (サイピース用)	XS, S	Mサイズ	40 -70
	M, L, XL	Lサイズ	70 -120

※本品は、「ジョブスト ファローラップ ストロング(医療機器届出番号 27B1X00006651709)」、「ジョブスト ファローラップ ライト(医療機器届出番号 27B1X00006651910)」、もしくは「ジョブスト ファロークイック(医療機器届出番号 27B1X00006651307)」と使用することも可能。

2. 材質

<ライナー>形状により以下のいずれかが付属。

- (1) ファローライナー : ポリアミド、ポリウレタン
(2) テリーライナー : 綿、ポリウレタン

<原理>

本体のジョブスト ファローラップ クラシックは、弾性素材が装着部に同心性の圧迫力を加えるとともに、末梢部から中枢に向かって圧迫力が漸減する構造になっている。

【使用目的又は効果】

本品は、フットピース、レッグピース、サイピースと併用し皮膚への接触刺激を軽減する。

なお、本体のジョブスト ファローラップ クラシックは、下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキング等である。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

【使用方法等】

1. 装着前(サイズの決定)

- 1-1 ファローラップに添付されていたライナーと同じサイズのライナーを選択する。

2. 装着方法

- 2-1 ファローラップを装着する前に本品を装着する。
2-2 装着後、脚全体をなで、ねじれやたるみがないようになじませる。
2-3 余った部分はレッグピース又はサイピース大腿用パーツの上に折り返しておく。

【使用上の注意】

<使用注意(次の患者には慎重に適用すること)>

- (1) 患者との意思疎通が困難な場合には患者の状態をよく観察して使用すること。[動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症した際に、発見が遅れるおそれがある。]
(2) 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止すること。[動脈および静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがある。]

<重要な基本的注意>

- (1) 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損することがあるので注意すること。
①強く引き伸ばしての装着
②爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着
③肌荒れした手や伸びた指の爪での取扱い
④鋭利なものへの接触
⑤指輪、ブレスレットをつけたままでの装着
(2) 本品をはさみで切るなど加工、修理を行わないこと。
(3) 軟膏等の薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化するので付着しないよう注意すること。
(4) 継続使用後、破損、破れなど生じたら新しいものに交換すること。

【保管方法及び有効期限等】

<保管方法>

高温、多湿、直射日光を避け、室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 40℃以下のぬるま湯と市販の漂白剤を含まない中性洗剤で洗濯し、洗濯機を使用する場合には、洗濯ネットを使用すること。
(2) 直射日光を避け陰干しにすること。乾燥機は使用しないこと。

- (3) 塩素系の漂白剤の使用、柔軟剤の使用、ドライクリーニング、アイロンがけは生地を傷めるのでしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：川本産業株式会社

電 話 番 号：06-6943-8956（お客様相談窓口）
（10:00～17:00 月～金ただし祝日を除く）

外国製造所：ビーエスエヌメディカル エスエイ デ
シーブイ
BSN Medical, S. A. de C. V.

国 名：メキシコ