

機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具
一般医療機器 体表面筋電計電極 (JMDN コード: 11441001)

ディスプレイザブル タブ電極


再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 本品はディスプレイザブルのため、1 回限りの使用とし、再使用しないこと。
2. 本品は当社指定品以外には使用しないこと。
3. コネクタが確実に接続されているか、確認すること。

【形状・構造及び原理等】

* 1. 外観

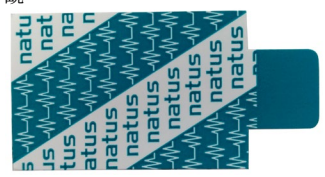

* 2. 形状及び寸法

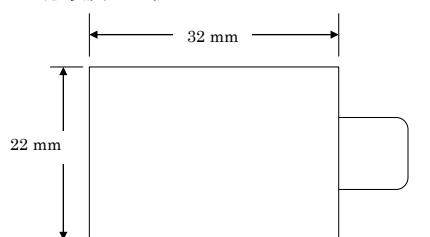

寸法単位: mm

寸法公差: ±10%

品 番	数 量
019-435300	10 個/袋、10 袋/箱

3. 再使用可能オプション品

本品と併用して使用するケーブル等です。

品 番	外 観	リード長	品 名
117-401900		1.25m	ワニロケ ーブルセ ット
019-417000		1.25m	ワニロケ ーブル 赤・黒
019-417200		1.25m	ワニロケ ーブルグ ランド
085-449100		1.2m	シールド 3 クリップ ケーブル

品 番	外 観	リード長	品 名
019-433000		50cm	リンカー ／ジャン パー
019-431500		1.0m	エクステ ンション ケーブル 6 パック
019-401100		2.0m	
019-408400		1.0m	エクステ ンション ケーブル ツイスト
019-432200		2.0m	
019-421500		22cm	RF フィル タ
085-416800		2.0m	マイクログ ラバー
019-420100		10cm	電極アダ プタ
019-425000		28cm	
* 102108		15cm	電極ジャン パー

4. 作動原理

本電極は、被験者の導出する部位に電極を貼り、電極をワニロケケーブル等に繋ぎ生体アンプと接続することにより生体から発生する電気信号を導出する。

* 【使用目的又は効果】

本電極は、筋電図を被験者の体表面から導出し、筋電計等に取り込んで検査するため、被験者の手等に装着して使用するディスプレイザブルの電極である。

***【使用方法等】**

1. 接続機器

当社指定の筋電計、誘発反応測定装置に用います。

2. 使用方法

- (1) 電極を装着する部位は、消毒用エタノール等で油脂等を拭取って乾かしてください。
- (2) 電極の裏張りを剥がします。
- (3) 電極を部位に貼り、押し付けます。
- (4) 当社指定のワニロケール等で筋電計、誘発反応測定装置に接続します。

【使用上の注意】

- (1) 検査機器に被験者が触れることのないよう注意すること。
- (2) 電極部の異常、その他の損傷が無いか点検し、異常のある場合は使用しないこと。
- (3) コード類の取り外しに際しては、コードを持って抜くなど無理な力をかけないこと。
- (4) 本品は、必ず当社指定の筋電計、誘発反応測定装置に接続すること
- (5) 本品が破損した場合は、使用しないこと。
- (6) 本品の保管条件の範囲においてできるだけ低温で保管してください。使用時に電極の温度が25℃以上の場合は、電極の裏張りを剥がす時にゲルが剥がれないことがあります。この場合は再度低温にしてから使用して下さい。

***【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法

- (1) 保管条件：温度 -10℃～+40℃
- (2) 水のかからない場所に保管すること。
- (3) 気圧・湿度・温度・風通し・日光・ほこり・塩分・硫黄分などを含んだ空気などにより悪影響の生じる恐れのない場所に保管すること。
- (4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。

2. 使用環境

周囲温度範囲：10℃～40℃

相対湿度範囲：30%～85%

3. 使用期限

製品ラベル及び包装並びに箱に記載の使用期限を参照のこと。

【保守・点検に係る事項】

保守点検は次の点に注意すること。

- (1) 使用前に必ず有効期限を確認すること。
- (2) 使用前に必ずリードや電極部に異常がないか確認すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

＜製造販売業者＞

ガデリウス・メディカル株式会社

電話：042-769-3221

****＜製造業者＞**

ネイタス・ニューロロジー社（米国）

（Natus Neurology Incorporated）

ネイタス・マニュファクチャリング社（アイルランド）

（Natus Manufacturing Limited）