

機械器具 24 知覚検査又は運動機能検査用器具
 一般医療機器 体表面筋電計電極 (JMDN コード: 11441001)

デジタルリング電極

【禁忌・禁止】


1. 本品は当社指定装置以外には使用しないこと。
2. コネクタが確実に接続されているか、確認すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状及び寸法

品 番	リード線長 (mm)
5032TP	1000
6032TP	460

② リード線

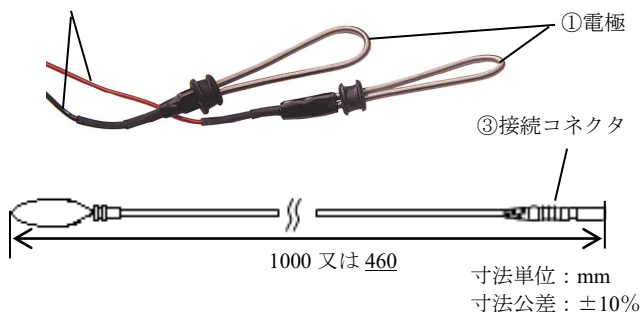

2. 作動原理

生体の導出部位に電極を装着し、電極を筋電計、誘発反応測定装置と接続することにより生体から発生する電気信号を導出する。

* 3. 性能

- ① 電 極 : ステンレススチール
- ② リード線 : $1000\text{mm} \pm 10\%$, $460\text{mm} \pm 10\%$
- ③ コネクタ : DIN タイプ

* 【使用目的又は効果】

本電極は、被験者の手あるいは足の指に装着し、筋電計、誘発反応測定装置に接続して筋電図を得るための電極である。

* 【使用方法等】

1. 接続機器

当社指定の筋電計、誘発反応測定装置に用います。

2. 使用方法

- (1) 使用の前に、電極ゲルで軽く電極をコーティングしてください。
- (2) 電極に指を入れプッシュを押し上げ電極を固定します。
- (3) 当社指定の筋電計、誘発反応測定装置に接続してください。

【使用上の注意】

- (1) 検査機器に被験者が触れることのないよう注意すること。
- (2) コードの摩損、電極部の異常、その他の損傷が無いか定期的に点検し、異常のある場合は使用しないこと。
- (3) コード類の取り外しに際しては、コードを持って抜くなど無理な力をかけないこと。
- (4) 本品は、必ず当社指定の筋電計、誘発反応測定装置に接続してください。
- (5) 本品が破損した場合は、使用しないこと。
- (6) 電極用ゲルに含まれている電解質で電極を腐食させます。
- (7) 使用後は、電極を純水で洗浄してください。

* 【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 水のかからない場所に保管すること。
- (2) 気圧・湿度・温度・風通し・日光・ほこり・塩分・硫黄分などを含んだ空気などにより悪影響の生じる恐れのない場所に保管すること。
- (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
- (4) 次回の使用に支障の無いように必ず洗浄しておくこと。
- (5) 保管する場合はお湯に洗剤を入れ洗浄後、完全に乾かしてください。

2. 使用環境

周囲温度範囲: $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
 相対湿度範囲: $30\% \sim 85\%$

3. 耐用期間

開封時に不具合があった場合にのみ無償交換致します。

【保守・点検に係る事項】

保守点検は次の点に注意すること。

- (1) 使用前に必ずリードや電極部に異常がないか確認すること。
- (2) しばらく使用しなかった場合は、使用前に正常に動作することを、必ず確認すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ガデリウス・メディカル株式会社
 電話: 042-769-3221

** <製造業者>

ネイタス・ニューロロジー社 (米国)
 (Natus Neurology Incorporated)
 ネイタス・マニュファクチャリング社 (アイルランド)
 (Natus Manufacturing Limited)