

機械器具 16 体温計

一般医療機器 再使用可能な体温計プローブ（JMDN コード:37340001）


温度プローブ

【禁忌・禁止】

- 併用医療機器[相互作用の項参照]
 - 磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）
 - 本品は当社指定装置以外には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 概要
本品は、体温計に接続し、体温測定のため体表面に配置する器具である。本品は洗浄して再使用可能である。
- 形状（代表形状）

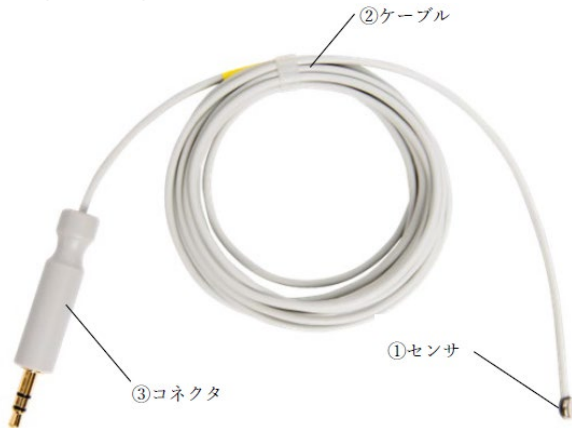

- 原材料
 - 電極 ステンレススチール
 - リード線 一般電気部品
 - コネクタ 一般電気部品
- 原理
本品は、患者の体表面等に装着した温度センサにより体温を検出し、測定装置へ温度信号を伝達する。

【使用目的又は効果】

本品は、体温計に接続し、体温測定のため体表面に配置する器具である。本品は洗浄して再使用可能である。

【使用方法等】

- 接続機器
当社指定の筋電計等の温度計に用います。
- 使用方法
 - 消毒用エタノール等で装着部位の皮膚の汚れをとります。
 - センサを取り付けます。必要に応じて固定をしてください。
 - 本品を温度計に接続し、測定を開始します。
 - センサは洗浄・消毒し、十分に乾燥させます。廃棄する場合には、各自治体または施設の基準に従ってください。

【使用上の注意】

- 一般的注意
 - 本品は、滅菌できません。
 - 傷口や炎症のある部位には貼らないこと。
 - 検査機器に被験者が触れることのないように注意すること。
 - コードの摩損、電極の腐食、その他の損傷がないか使用前に確認し、異常のある場合は使用しないこと。
 - コード類の取り外しに際しては、コードを持って抜くなど無理な力をかけないこと。
 - 本品は、必ず当社指定の筋電計、誘発反応測定装置等に接続すること。
 - 使用後は洗剤または酵素製品を使用し、水で電極を洗浄すること。
 - 皮膚との接触部分を消毒します。非腐食性の消毒剤が推奨されます。
 - 長時間の浸漬や洗浄は避けてください。

- 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）
併用禁忌

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置（MRI）	併用不可	MRI 装置への吸着、故障、破損、熱傷等が起こる恐れがあります。

【保管方法及び有効期間等】

- 貯蔵・保管方法
 - 水のかからない場所に保管すること。
 - 湿度、温度、ホコリ、塩分、硫黄分などを含んだ空気などにより悪影響の生じる恐れのない場所に保管すること。
 - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 使用環境
周囲温度範囲：10℃～40℃
相対湿度範囲：30%～85%
- 有効期間（耐用期間）
開封時に不具合があった場合にのみ無償交換いたします。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>
ガデリウス・メディカル株式会社
電話番号：042-769-3221

<製造業者>
Cadwell Industries, Inc.（アメリカ合衆国）