

AMD超音波プローブカバー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1 回限り使用のディスプレイ製品であり、再使用禁止。



【形状・構造及び原理等】

1.概要

本品は、体表面で使用する超音波プローブに装着して使用する器具である。下記の 2 種類がある。

- ・ジェネラルパーパス プローブカバー
- ・ソフトフレックス プローブカバー

2.形状

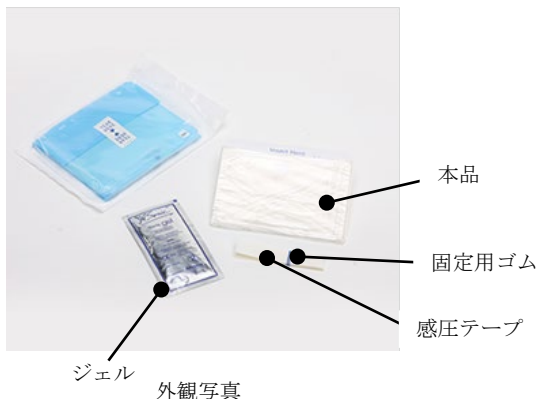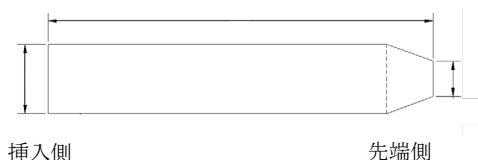

*3.原材料

- ・ポリエチレン又はポリウレタン又はポリエチレン酢酸ビニール

【使用目的又は効果】

本品は、体表面で使用する超音波プローブに装着し、体液、汚れ等からプローブを保護するために用いる器具である。

【使用方法等】

1.使用前の準備

- 1) 本品の種類を選択する。
- 2) 本品をパックから取り出し、折りたたまれた状態でジェル(医療機器対象外:以下同じ)を先端部に注入する。なお、ジェルは汎用品を併用することもできる
- 3) 超音波プローブを、プローブ挿入口に差し入れた状態で、カバー表面を引き上げる。必要に応じて、カバーを固定用ゴム(医療機器対象外)で超音波プローブに固定する。

2.使用前の操作

- 1) 超音波プローブを操作して診断を行う。
- 2) 必要に応じて、ジェルを、カバーと体表面の間に使用する。

3.使用後の処置

- 1) 本品を超音波プローブから取り外し破棄する。
- 2) 超音波プローブに付着したジェル等を清拭する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・有効期限を過ぎている場合は使用せず、適切に廃棄すること。
- ・使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。
- ・本品は再滅菌しないこと。
- ・鋭利な器具との接触は避けること。
- ・超音波画像診断装置等の使用方法・使用上の注意に従い使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

【包装】

1 個単位包装(医療機器対象外のジェル及び固定用ゴム、感圧テープが同封される)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ガデリウス・メディカル株式会社

住 所: 神奈川県相模原市中央区富士見2-7-1

電話番号: 042-769-3221

<製造業者>

アドバンス メディカル デザインズ社

(Advance Medical Designs, Inc) .

<製造先国>

アメリカ合衆国