

類別: 機械器具 55

【一般医療機器】 一般的名称: 手動式生体用洗浄器 (JMDN コード 34630000)


販売名: 電気保温イルリガートル (電気温水器)

【禁忌・禁止】

使用方法

- 1) 空焚きをしないこと
- 2) 50℃以上にしないこと

【形状・構造及び原理】

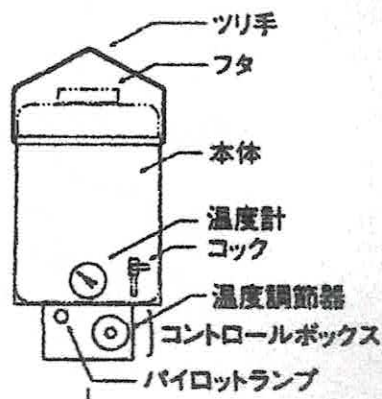

- ◆材質 本 体: ポリプロピレン
コントロールボックス: ステンレス
- ◆寸法 本体 直径 17cm 高さ 38cm
- ◆性能 電気を熱源として器内の水又は薬液を温めて保温する。

【使用目的、効果又は効能】

身体の一部に適用する液体を噴出する装置。衛生状態の維持又は治療の一環として用いるもので手動式である。

産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科等の洗浄。

排便後の洗浄。痔、生理時の洗浄、宿便、便秘に温水洗腸等に用いる。

【操作方法、または使用方法等】

- ① 容器に 1.5ℓ以上の水を入れる。
- ② 温度調節器のダイヤルを右に回して電源を入れる。
- ③ 温度調節器のダイヤルで目的の温度に設定

する。(水温の誤差は±2℃です)

※温度計と実際のノズルから出る水温が違うことがあります。

- ④ 必ず手でお湯の温度を確認してから使用する。
- ⑤ 蓋をきつくしめすぎると温水がでにくくなります。

【使用上の注意】

- 1) 空焚きをしないこと。
 - ① 本体に水を入れてから通電すること。
 - ・通電時はランプが点灯します。
 - ・温度上昇中ランプが消えることがあります。
 - ② 器内の水量は 1.5ℓ以上で使用する。
 - ③ 本体の温水を捨てる時は、先に電源を切る。
- 2) お湯を使うときは、やけどに注意すること。

使用時には、必ず手でお湯の温度を確認してから使用すること。
- 3) 機器の扱い方は、次の事項に注意すること。
 - ① 水平状態で使用すること。
 - ② 化学薬品を使わないこと。
 - ③ コントロールボックスや外側の機器部分は水や薬液で濡れたままにしないこと。
 - ④ 使用後は次の使用に支障のないように必ず洗浄しておくこと。
 - ⑤ 本体をベンジンなどで洗わないこと。
 - ⑥ 使用しない時は、本体の水を除去し、洗浄乾燥させておくこと。
 - ⑦ 室温・お湯等で 50℃以上にしないこと。
- 4) 故障した時は、勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は専門家に任せること。
- 5) 機器は改造しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の

氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: 株式会社片桐医科工業

住所: 東京都文京区弥生 2-12-3

電話: 03-3811-1934

製造業者: 株式会社片桐医科工業

取扱説明書を必ずご参照下さい