

類別： 医療用品 5 副木

【一般医療機器】 一般的名称：手・指用副木（JMDNコード 16210000）

販売名：手指副子

再使用禁止


【禁忌・禁止】

使用方法 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理】

1) 種類・規格

種類	規格（アルミニウム板）	
	厚さ×幅×長さ	適応部位
小	0.8mm×50mm×135mm	指
中	1.0mm×60mm×150mm	指
大	1.0mm×60mm×220mm	指

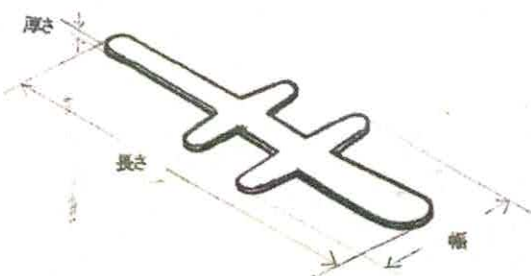

2) 形状

本品は、アルミニウム板を切り抜き加工したアルミ副木である。

【使用目的、効果又は効能】

骨折や挫傷等の固定に用いられる。

【操作方法、または使用方法等】

1) 適応サイズの選定

患部に応じて適切なサイズの本品を選定します。

2) 装着方法

(1) 本品を曲げ、患部の形状に合うように成形します。

(2) カット綿や包帯、テープ等を使用して患部と本品を密着させ、なおかつ本品の上から粘着テープや弾力包帯等を使用して患部に固定します。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- (1) 次の患者には慎重に適用すること
- ・本患部に皮膚障害（感染創、潰瘍、発疹、腫瘍等）がある患者
- (2) 本品を使用する場合は、局所管理を十分に行い、慎重に使用してください。
- 〔症状を悪化させる恐れがあります〕

2) 不具合・有害事象

本品使用に皮膚障害と思われる症状が認められた場合は、直ちに使用を中止し適切な処置をして下さい。

3) その他の注意

本品に破損、変形、汚染等がある場合は使用しないで下さい。

【貯蔵・保管方法】

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて、室温保管して下さい。

【包装】

1袋10枚入り 1箱5袋入り

【製造販売業者及び製造業者の

氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社片桐医科工業

住所：東京都文京区弥生2-12-3

電話：03-3811-1934

製造業者：株式会社片桐医科工業