

機械器具 ２５ 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用ビデオカメラ 35958000

特定保守管理医療機器


エンドビジョンテレカムＣマウントカメラヘッド

【禁忌・禁止】

<適用対象>

1. 本品は BF 形装着部を有するため、心臓の観察や処置を目的とした手技には使用しないこと。また、本品に接続した内視鏡は、心臓及びその近傍（これらに接触している処置具や内視鏡等も含む）に接触させないこと。
[漏れ電流により患者の心臓機能に影響し心室細動などを起こす危険があるため]

【形状・構造及び原理等】

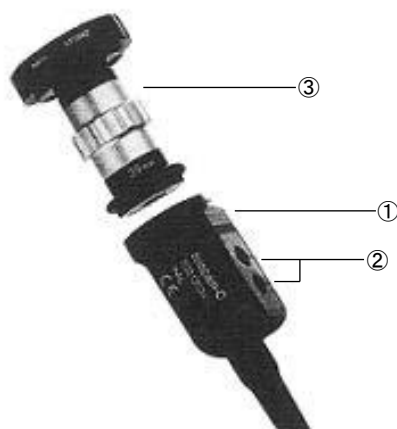

<各部の名称、機能及び動作>

番号	名称	機能及び動作
①	Cマウントコネクシオン	Cマウントレンズ 接続部
②	ユーザーコントロールボタン	ユーザーが設定した機能を行う
③	Cマウントレンズ	カメラヘッドと内視鏡の接続レンズ

<作動動作原理>

レンズで捕らえた映像を CCD チップで電気信号に変換し、カメラコントロールユニットに送る。

<機器の仕様等>


- ・イメージセンサー：1/2CCD チップ
- ・画素数：768 (H) × 494 (V) ピクセル (NTSC)
- ・分解能：>450 ライン (水平)
- ・S/N 比：>52dB
- ・AGC：+18dB
- ・最低被写体照度：3ルクス (f 1.4)
- ・レンズ：Cマウントレンズ
- ・焦点距離：f=12, 25, 30 又は 38 mm
- ・内視鏡の接続：標準7ピンスの硬性及び軟性内視鏡接続可能
(クイックアダプター採用)
- ・露出：1/60～1/10000 秒
- ・2ボタンラマブルユーザーキー
- ・寸法：φ28～32 mm、長さ 51 mm (レンズ 含まず)
- ・ケーブル長：300cm

【使用目的又は効果】

内視鏡の画像モニターで観察できるようにする。

【使用方法等】

1. Cマウントレンズの接続
カメラヘッドのCマウントコネクシオン部にCマウントレンズを時計方向に回して接続する。
2. 内視鏡の接続
Cマウントレンズのテレスコープカプラの外側リングを回して緩め、内視鏡をカプラに差し込む。内視鏡が回転しないように、外側リングを反時計方向に回して締め付ける。
3. ライトケーブルの接続
ライトケーブルの接続ネジを1/4回転して、内視鏡の光源接続部にライトケーブルを接続する。
4. フォーカスの調整
画像の焦点調整は、銀色のフォーカスリングを回して調節する。

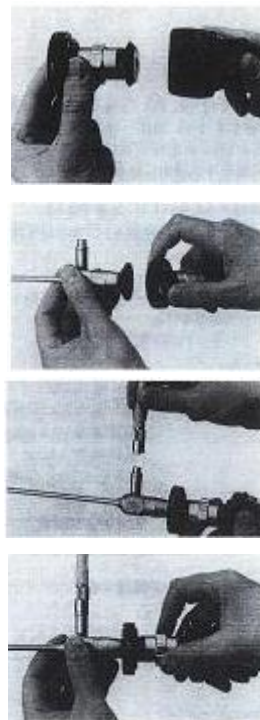

*【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. イメージセンサーが破損する恐れがあるため、レンズヘッドに光源光を直接照射しないこと。
2. 滅菌は常に同一の方法で行うこと。異なる滅菌方法を実施すると、構造材に負担をかけ本品の劣化・破損を招き、故障につながる恐れがある。
3. 使用に際しては、以下の事項に留意すること。
 - (1) 可燃性や爆発性のある薬品、またはその混合物を使用する際には、離れた場所に設置すること。
 - (2) 水がかかる場所、高温、多湿の場所、ホコリの多い場所、振動・衝撃や強磁界の場所に設置しないこと。
 - (3) ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所には設置しないこと。
4. ケーブルコネクタを完全に乾燥させてから、カメラコントロールユニットに接続させること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光やホコリ、あるいは塩分や硫黄分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などの安定状態に注意すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

**【保守・点検に係る事項】

1. しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. 使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。
(特に体内に入る部分及び可動部分については入念に確認すること。)

3. 使用後は、速やかに血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄すること。
4. 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が破損するので汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。
5. 付着物は修復不能な破損の原因になるので、器具は使用后、速やかに洗浄の準備をすること。
6. 洗浄方法
 - (1) マニュアル洗浄
 - ① 洗浄剤及び化学消毒剤を使ってブラッシング及び浸漬等により手洗い洗浄を行なう。
 - ② 感染のリスクを防止するため、手洗い洗浄時には手袋・防水エプロン・ゴーグル等を必ず使用すること。
 - ③ ケーブルコネクタが汚れている場合、70%のイソプロピルアルコールを用いて清拭し、完全に乾燥させること。
7. 洗浄後の器具の点検とお手入れ
外観の目視確認、可動部の機能確認を行うこと。
8. 洗浄剤
 - (1) 材質にアルミニウム、真鍮を使用している製品にはアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤は使用しないこと。
（材質に影響を与え、機械を破損させる可能性が高い。）
 - (2) その他の製品をアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤で洗浄する場合には、洗浄剤又は消毒剤の残留物が残らないように純水にて十分に濯ぎを行うこと。
 - (3) 内視鏡および内視鏡関連器具に適した洗浄剤又は消毒剤を使用すること。
9. 使用前に必ず下記の何れかの方法で滅菌又は消毒を行うこと。
 1. テレカムCマウントカメラヘッド「20212134」の滅菌方法
注1: 滅菌前に器具を洗浄し、良く乾燥してから滅菌を行うこと。
 - (1) エチレンオキシドガス滅菌方法
本品を滅菌ケース又はトレイに収納し、滅菌包材で包んだ上、エチレンオキシドガス滅菌を行う。
＜滅菌条件＞
 - ・ガス混合物 : エチレンオキシド 100%
 - ・ガス濃度 : 735±30 mg/L
 - ・温度 : 55℃
 - ・湿度 : ≥70%RH
 - ・圧力 : 0.09MPa
 - ・時間 : 3 時間
＜ガス除去方法＞
51～59℃で 12 時間のエアレーションを行う。
（推奨 55℃で 12 時間）
 - (2) プラズマ滅菌（販売名「ステラッド 100S、NX 又は 100NX」）
本品を専用滅菌ケース又はトレイに収納し、滅菌包材で包んだ上、プラズマ滅菌を行う。
＜滅菌条件＞
 - ・温度 : 約 45～55℃（機種による）
 - ・湿度 : 約 10%RH
 - ・時間 : 28～105 分（機種による）
 - (3) 過酸化水素ガス滅菌（販売名「低温滅菌システム アムスコ V-PR01」）
＜滅菌条件＞
 - ・滅菌時間 : 60～63 分
 - ・滅菌温度 : 約 50℃
 - ・滅菌剤 : 過酸化水素 59%
 - (4) 薬液消毒方法
容器を 2 個用意し、一方には薬液を他方には滅菌水を入れる。
薬液に 30 分浸した後、本品を滅菌水に移し、約 5 分間浸す。
＜消毒条件＞
 - ・使用薬液 : 2%グルタールアルデヒド
※薬液消毒の場合、必ず、薬剤製造業者の指示に従うこと。
また、本品を 60 分以上液体に浸漬させたままにしないこと。

2. Cマウントレンズ（20212134 以外）の滅菌方法

(1) オートクレーブ滅菌方法

本品を専用滅菌ケース又はトレイに収納し、滅菌包材で包んだ上、オートクレーブ滅菌を行う。

＜滅菌条件＞

・温度 : 134～137℃

・時間 : 4～18 分間

※真空式高圧蒸気滅菌（pre-high vacuum）方式のオートクレーブを推奨する。

※オートクレーブ滅菌を行う際に金属容器を使用している場合は、本品と金属部を直接触れないよう注意すること。

(2) プラズマ滅菌（販売名「ステラッド 100S、NX 又は 100NX」）

本品を専用滅菌ケース又はトレイに収納し、滅菌包材で包んだ上、プラズマ滅菌を行う。

＜滅菌条件＞

・温度 : 約 45～55℃（機種による）

・湿度 : 約 10%RH

・時間 : 28～105 分（機種による）

(3) 薬液消毒方法

容器を 2 個用意し、一方には薬液を他方には滅菌水を入れる。
薬液に 30 分浸した後、本品を滅菌水に移し、約 5 分間浸す。

＜消毒条件＞

・使用薬液 : 2%グルタールアルデヒド

※薬液消毒の場合、必ず、薬剤製造業者の指示に従うこと。

また、本品を 60 分以上液体に浸漬させたままにしないこと。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カールストルツ・エンドスコーピー・ジャパン株式会社
TEL : 03-6380-8622

製造業者：KARL STORZ SE & Co. KG（カールストルツ社）
国名：Germany

サイバーセキュリティに関する情報請求先

＜製造販売業者と同じ＞