


クリアビジョンレンズイリゲーションシステム

*【形状・構造及び原理等】

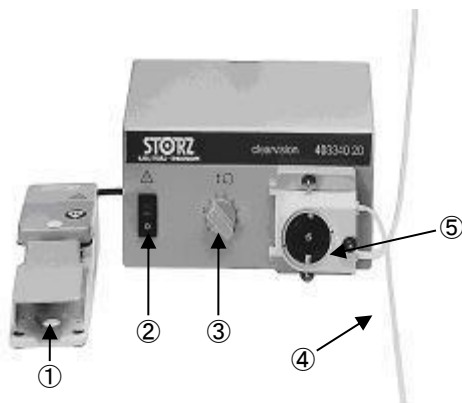

<各部の名称、機能及び動作>

番号	名称	機能及び動作
①	フットスイッチ	本品の始動用スイッチ
②	電源スイッチ	本品の主電源
③	逆回転時間調整ノブ	洗浄後の水切り時間調整ノブ
④	イリゲーションチューブ	灌流水を送入する
⑤	ポンプ部	灌流を行う

<作動・動作原理>

ビデオカメラヘッドのCCDで捉えた映像信号を電氣的に処理してモニターに送り、内視鏡からの映像を表示させる。
尚、イリゲーションシースは別売りとなっています。
詳細については装置付属の取扱説明書を参照してください。

<機器の仕様等>

- ・寸法：203 (W) × 101 (H) × 130 (D) mm
- ・定格電圧：100-240V
- ・周波数：50/60Hz
- ・電源入力：20VA

【使用目的又は効果】

術中にレンズに付着した血液や異物を除去、洗浄する。

【使用方法等】

1. フットスイッチ①を本体に接続する。
2. ポンプ部⑤にイリゲーションチューブ④を装着する。
3. イリゲーションチューブ④の一端を生理食塩水のボトルに接続する。
4. イリゲーションチューブ③の另一端を専用シースに接続する。
5. 逆回転時間調整ノブで時間を設定する。
6. 電源スイッチ②を入れる。機器操作はフットスイッチ①により行う。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 滅菌は常に同一の方法で行うこと。異なる滅菌方法を実施すると、構造材に負担をかけ本品の劣化・破損を招き、故障につながる恐れがある。
2. イリゲーションチューブは未滅菌で梱包されてくるため、初回使用時及び再使用時、洗浄、消毒または滅菌を行うこと。

3. 使用に際しては、以下の事項に留意すること。

- (1) 可燃性や爆発性のある薬品、またはその混合物を使用する際には、離れた場所に設置すること。
- (2) 水がかかる場所、高温、多湿の場所、ホコリの多い場所、振動・衝撃や強磁界の場所に設置しないこと。
- (3) ぐらついた台や傾いたところなど、不安定な場所には設置しないこと。

4. 本品の使用後は次の事項に注意すること。

- (1) 装置の表面を中性洗剤、または殺菌剤を含んだ布で拭いて清掃すること。その際装置の中に洗剤が入らないように注意すること。
- (2) 清掃後はよく乾燥させること。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光やホコリ、あるいは塩分や硫黄分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などの安定状態に注意すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動する事を確認すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カールストルツ・エンドスコーピー・ジャパン株式会社
TEL：03-6380-8622

製造業者：KARL STORZ SE & Co. KG（カールストルツ社）
国名：Germany

サイバーセキュリティに関する情報請求先
《製造販売業者と同じ》

添付文書番号：KSTJ - 212