


VERSACRANE ホールディングアーム

【形状・構造及び原理等】

※代表的なタイプを下記に示す。

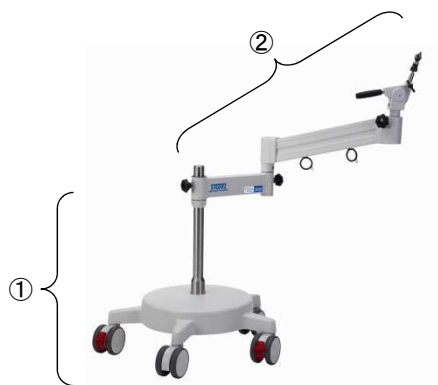

番号	名称
①	モハイルスタンド*
②	サームトアーム

【使用目的又は効果】

本品は、手術時に腹腔鏡、又は各種内視鏡、処置具等を意図する位置に保持又は調整する用具をいう。

【使用方法等】

1. 本品を手術台付近に配置する。
2. 本品に内視鏡を接続する。
3. 内視鏡が適切な位置となるようにホールディングデバイスを調節する。

＊【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 滅菌は常に同一の方法で行うこと。異なる滅菌方法を実施すると、構造材に負担をかけ本品の劣化・破損を招き、故障につながる恐れがある。
2. 固定に用いるネジ等の欠落や本体に破損がないことを必ず確認すること。
3. 破損、曲がりの原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織液及び薬品等が乾燥しないように、直ちに拭き取る等の洗浄を行うこと。
5. 塩素系及びヨウ素の消毒剤は腐食の原因になるので、できるだけ使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。

＊【保管方法及び有効期間等】

保管の際は、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短に係わらず必ず乾燥をすること。

＊【保守・点検に係る事項】

1. しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. 使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。（特に体内に入る部分及び可動部分については入念に確認すること。）

3. 使用後は、速やかに血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄すること。
4. 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が破損するので汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。
5. 付着物は修復不能な破損の原因になるので、器具は使用後、速やかに洗浄の準備をすること。
6. 洗浄方法
 - (1) 汚れが付着した際には洗浄剤及び化学消毒剤をしみこませた柔らかい布でぬぐい取り洗浄する。
 - (2) 手洗い洗浄時には手袋・防水エプロン・ゴーグル等を必ず使用すること。
7. 洗浄後の器具の点検とお手入れ
プラスチック又はシリコン部品の変色・変質・柔軟性（硬化の有無）・孔の有無を確認し、異常が認められた場合は直ちに部品を交換すること。
8. 消毒方法
洗浄の後、消毒剤（エタノールなど）をしみこませた柔らかい布で消毒を行うことができる。

＊＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カールストルツ・エンドスコーピー・ジャパン株式会社
TEL：03-6380-8622

製造業者：KARL STORZ SE & Co. KG（カールストルツ社）
国名：Germany

添付文書番号：KSTJ - 392