


ENDOSCOPE インストルメンツ

【形状・構造及び原理等】

※代表的なタイプを下記に示す。

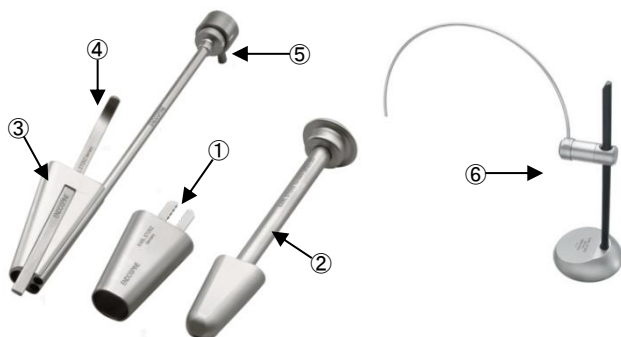

＜各部の名称、機能及び動作＞

番号	名称	機能及び動作
①	オペレーションチューブ	処置部に挿入する外套
②	オブチュレーター	オペレーションチューブ①を処置部に挿入する際に用いる
③	ワーキングインサート	オペレーションチューブ①に挿入し処置具を挿入するチャネルを形成する
④	ナードプロテクター	処置部の組織の押し上げ、固定に使用する
⑤	シース	内視鏡を挿入する
⑥	切開点特定デバイス	オペレーションチューブ①を挿入する切開点を決定する

【使用目的又は効果】

脊椎、頸椎等の外科領域における内視鏡手術時に使用するコンポーネントで、専用の内視鏡または処置具を挿入するための組織や開口部の拡張に用いる。

【使用方法等】

- オペレーションチューブ①にオブチュレーター②を接続する。
- オペレーションチューブ①を処置部に挿入し、オブチュレーター②を抜く。
- オペレーションチューブ①にワーキングインサート③を挿入し、固定する。
- シース⑤に内視鏡を挿入し、処置部の観察を行う。
- 必要に応じて、ナードプロテクター④で組織を処置するのに適した配置にする。
- ワーキングインサート③のチャネルより鉗子等の処置具を挿入し、処置を行う。

**【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 組織・粘膜を傷つける恐れがあるため、挿入部に傷、めくれ等がなく、滑らかであることを必ず確認すること。
- 破損等の原因となるため、本品を超音波洗浄器にかけないこと。
- 滅菌は常に同一の方法で行うこと。異なる滅菌方法を実施すると、構造材に負担をかけ本品の劣化・破損を招き、故障につながる恐れがある。
- 破損、曲がりの原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
- シースにテレスコープを装着する際には、シース内部を生食等で濡らしてから使用すること。乾燥した状態で使用するとシース内のリングが破損することがある。

- 使用後は、付着している血液、体液、組織液及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は腐食の原因になるので、できるだけ使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管の際は、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短に係らず必ず乾燥すること。
- 滅菌済のものを保管の際は、再感染を防止するために清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

- しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- 使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。（特に体内に入る部分及び可動部分については入念に確認すること。）
- 使用後は、速やかに血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄すること。
- 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が破損するので汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- 付着物は修復不能な破損の原因になるので、器具は使用後、速やかに洗浄の準備をすること。
- 洗浄方法

(1) 自動洗浄器

- ① 内視鏡のプログラムが設定されている自動器具洗浄器を使用し、管腔を有する器具は専用洗浄チューブを接続して使用すること。
- ② 適切なラック（39501 シリーズ）を使用し、他の器具と重なり合わないように入れること。（他の器具と重なり合うことにより破損の原因となり、また、重なっている部分で洗浄効果が減衰する。）
- ③ 器具の接続部を開放し、分解してラックに入れること。
- ④ 洗浄剤や水質によっても製品にダメージを与える場合があり、器具に変質等が生じた場合、直ちに自動洗浄器の使用を中止し、洗浄剤、水質の確認を行うこと。

(2) マニュアル洗浄

- ① 洗浄剤及び化学消毒剤を使ってブラッシング及び浸漬等により手洗い洗浄を行なう。
- ② 感染のリスクを防止するため、手洗い洗浄時には手袋・防水エプロン・ゴーグル等を必ず使用すること。
- ③ 管腔内を洗浄するため適切なブラシ（27650 シリーズ）やクリーニングピストル（27660）を準備すること。
- ④ 洗浄、浸漬用にフタ付きで水きり用の内かごが付いている容器（27645 等）を準備すること。
- ⑤ 洗浄手順

1. 器具の接続部をすべて分解する。
2. 専用容器に準備した洗浄溶液に器具を浸漬する。
水温は43℃前後（暖かいと感じる温度）が適温である。
薬剤による器具の破損の可能性があるため、溶液には60分以上浸漬したままにしないこと。
3. スポンジで全ての外表面を注意深く清掃する。
4. 管腔内は適切なブラシやクリーニングピストルを用いて洗浄する。
5. 純水で時間をかけて十分な濯ぎを行う。
6. ホコリの出ないやわらかい布や圧縮空気で乾燥させる。

7. 洗浄後の器具の点検とお手入れ
- (1) 外観の目視（特に体内に入る部分は入念に）確認、可動部の機能確認を行うこと。
 - (2) すべての可動部分には、滅菌による熱損傷を防止する為、専用のオイル（27656B）を必ず塗布（オートクレーブ滅菌のみ有効）すること。
8. 洗浄剤
- (1) 材質にアルミニウム、真鍮を使用している製品にはアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤は使用しないこと。
（材質に影響を与え、機械を破損させる可能性が高い。）
 - (2) その他の製品をアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤で洗浄する場合には、洗浄剤又は消毒剤の残留物が残らないように純水にて十分に濯ぎを行うこと。
9. 使用前に必ず下記の何れかの方法で滅菌又は消毒を行うこと。
- 注1: 滅菌前に器具を洗浄し、良く乾燥してから滅菌を行うこと。
- (1) エチレンオキシドガス滅菌方法
本品を滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、エチレンオキシドガス滅菌を行う。
＜滅菌条件①＞
 - ・ガス混合物 : エチレンオキシド 100%
 - ・ガス濃度 : 725±30mg/L
 - ・温度 : 55℃
 - ・湿度 : ≥70%RH
 - ・圧力 : 0.09MPa
 - ・時間 : 1～2 時間（滅菌機材による）＜滅菌条件②＞
 - ・ガス濃度 : 600～700mg/L
 - ・温度 : 40～60℃
 - ・湿度 : 50～60%RH
 - ・圧力 : 0.1MPa
 - ・時間 : 3～6 時間＜ガス抜去方法＞
51～59℃で 12 時間のエアレーションを行う。
（推奨 55℃で 12 時間）
 - (2) オートクレーブ滅菌方法
本品を専用滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、オートクレーブ滅菌を行う。
＜滅菌条件＞
 - ・温度 : 134～137℃
 - ・時間 : 4～18 分間※真空式高圧蒸気滅菌（pre-high vacuum）方式のオートクレーブを推奨する。
※オートクレーブ滅菌を行う際に金属容器を使用している場合は、本品と金属部を直接触れないよう注意すること。
 - (3) プラズマ滅菌（ジョンソン・エンド・ジョンソン社／販売名「ステラッド 100S、NX 又は 100NX」）
本品を専用滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、プラズマ滅菌を行う。
＜滅菌条件＞
 - ・温度 : 約 45～55℃（機種による）
 - ・湿度 : 約 10%RH
 - ・時間 : 28～105 分（機種による）
 - (4) 薬液消毒方法
容器を 2 個用意し、一方には薬液を他方には滅菌水を入れる。
薬液に 30 分浸した後、本品を滅菌水に移し、約 5 分間浸す。
＜消毒条件＞
 - ・使用薬液 : 2%グルタールアルデヒド※薬液消毒の場合、必ず、薬剤製造業者の指示に従うこと。
また、本品を 60 分以上液体に浸漬させたままにしないこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カールストルツ・エンドスコーピー・ジャパン株式会社
TEL：03-6380-8622

製造業者：KARL STORZ SE & Co. KG（カールストルツ社）
国名：Germany

添付文書番号：KSTJ - 432