

機械器具 ５１ 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 送水吸引チューブ 70355000

チューブカートリッジ

再使用禁止


- 【禁忌・禁止】
1. 再使用・滅菌禁止。

＊ ＊ 【形状・構造及び原理等】

＜外観＞
※代表的な形状を下記に示す。
【送水チューブ】

型番

031118-03
031523-10
031524-10
031529-10
031531-10

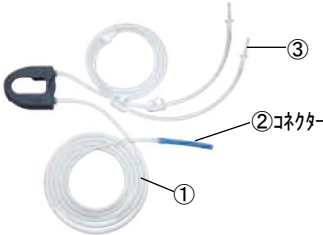


【吸引チューブ】

＜DS タイプ＞

型番

030647-10

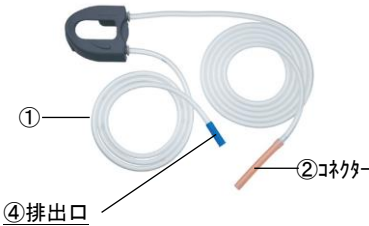

＜BS タイプ＞

型番

031647-10



＜各部の名称及び機能＞

番号	名称	機能
①	チューブ	装置同士をつなぎ送水・吸引する
②	コネクター	送水装置又は吸引装置、内視鏡又は内視鏡用処置具に接続する口
③	スパイク	送水液バッグに挿し込む口
④	排出口	組織回収フィルター等に接続し廃液を排出する口

＜原材料＞

番号	名称	原材料
①	チューブ※	PVC 樹脂
②	コネクター※	シリコン、PCTG 樹脂
③	スパイク※	ABS 樹脂
④	排出口	—

※体液又は血液に直接または間接的に接触することがある部分。

【使用目的又は効果】

本品は、送水装置又は吸引装置と、内視鏡又は内視鏡用処置具等との接続に用いる柔軟性のあるチューブである。本品は単回使用である。

＊ ＊ 【使用方法等】


＜使用前＞

- 滅菌包装を開けて無菌的に本品を取り出す。
- チュービングセットは、包装の開封、破損、汚損又はピンホール等が認められた場合は使用しないこと。

＜使用中＞

3. 【送水・吸引チューブ共通】

- ロッキングレバーを時計回りに水平にし、カセット型チュービングセットを装置（併用医療機器 No. 1、No. 2）のポンプローラー部に取り付ける。
- ローラーポンプのロッキングレバーを垂直に回し、カセットを固定する。

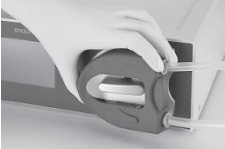

3-1. 【送水チューブ】

- プロテクションキャップを取り外し、送水液バッグにスパイクを挿入する。
- 送水チューブのコネクター②（青色）に滅菌済みの内視鏡等の送水用器具を接続する。
- 送水液を送液して、気泡が完全になくなるまで空気抜きをしてからチュービングセットを使用する。



3-2. 【吸引チューブ】

＜DS タイプ＞

- 吸引チューブのコネクター②（オレンジ色）を滅菌済みの器具等に接続する。



右記の写真の通りに接続されているか確認する。

- 吸引チューブの排出口④（青色）を組織回収フィルター（併用医療機器 No. 3）等に接続する。



<BS タイプ>

- (3) チュービングカートリッジ上部のインフロー用チューブ(矢印)の先の青色の排出口を、吸引ボトルのふたでこし器の付いたコネクタに取り付ける。



- (4) チュービングカートリッジ下部のチューブで「waste」と記載されている方をバケツなどの回収コンテナに取り付ける。



- (5) カートリッジのついていないチューブの青色の排出口(矢印)を空のボトルに取り付ける。



- (6) カートリッジのついていないチューブのオレンジ色の端(矢印)を器具(トランスデューサー)に接続する。



<使用後>

4. ポンプより取り外し、廃棄を行う。

<併用医療機器>

番号	販売名	一般的名称	医療機器届出/認証番号	製造販売業者
1	エンドマツ SELECT	汎用手術用灌流・吸引装置	231AABZX00013000	当社
2	エンドマツ SELECT II	汎用手術用灌流・吸引装置	305AKBZX00021000	
3	KARL STORZ 組織回収フィルタ	吸引器用キャニスター	13B1X00106M00135	

*【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 動作直後より気泡が内視鏡下で確認された場合、体内に気泡が入り、空気塞栓等の重篤な健康被害が起こる可能性がある。気泡が確認された場合は、チューブ内およびチューブの接続を確認したり、内視鏡を抜去するなど適切な処置を行うこと。
2. 使用前に包装が破損している製品は使用しないこと。
3. 使用前に外観に異常がないことを確認すること。
4. 破損、曲がりの原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
5. 使用後は、適切な方法で付着している血液、体液、組織液及び薬品等を処理し、廃棄すること。
6. 詳細な使用方法及び使用上の注意は併用医療機器の取扱説明書を参照すること。

**【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光やほこり、或いは塩分や硫黄分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。

3. 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などの安定状態に注意すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
5. 有効期間は自己認証(当社データ)による。
有効期間については外装表示参照。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カールストルツ・エンドスコーピー・ジャパン株式会社
TEL：03-6380-8622

製造業者：KARL STORZ SE & Co. KG (カールストルツ社)
国名：Germany

添付文書番号：KSTJ - 475