

KARL STORZ エクストラクションバッグ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 滅菌済みディスポーザブル製品であるので再使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

<全体図>




・代表的な形状を下記に示す。


① フォイル 1,500mL

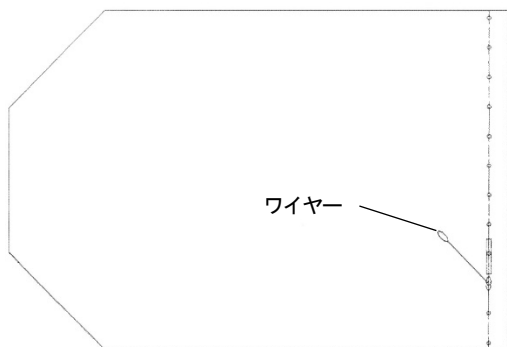


800mL

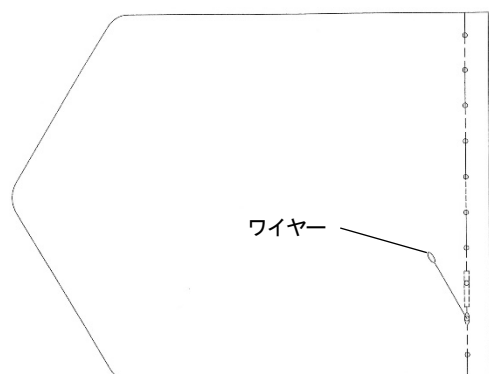

200mL

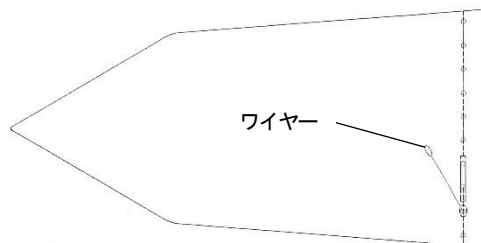

② プロテクティブチューブ

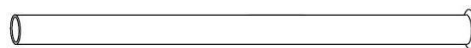

③ イントロデューサー



<各部の説明>

番号	名称	機能及び動作	原材料
①	フォイル	取り出す組織等を収める袋	ポリエチレン※
②	プロテクティブチューブ	ワイヤーの付いたフォイルを収納する。	ポリエチレン※
③	イントロデューサー	ワイヤーの付いたフォイルを押して体内に押し出す。	—
—	ワイヤー	フォイルの口を窄めて組織等が回収に当たって出ないようにすると共に、ワイヤー末端を鉗子等で掴んで体外に引き出せるようにする。	ニチン合金※ ポリイミド※

※：組織、体液又は血液等に直接又は間接的に接触することがある部分


【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡下の手術で腹腔内に挿入する器具で、分離した組織の分散を防ぎ、組織を隔離・収納するために用いる。本品は滅菌済みであり、単回使用である。

【使用方法等】


<エクストラクションバッグの挿入>

- 滅菌パックからフォイル（バッグ）が入ったプロテクティブチューブ及びイントロデューサーを取り出す。
- 適切な内径のトロカールカニューラ [3] に図のようにバッグが入ったプロテクティブチューブ [1] 及びイントロデューサー [2] をセットする。
- イントロデューサーを押してバッグを体内に押し出す。
- 形状記憶合金製ワイヤー [5] によりバッグ [4] の口が自動的に開く。

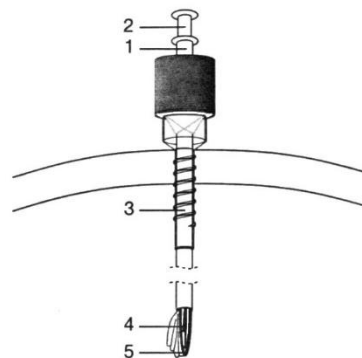

<エクストラクションバッグの回収>

5. トロカールカニューラを取り外す。
6. 回収する切除組織等をバッグに入れる。
7. 形状記憶合金製ワイヤーを引っ張る。
8. 形状記憶合金製ワイヤー [5] を把持しながら、エクストラクションバッグを注意して切開口 [3] を通じて引き出す。

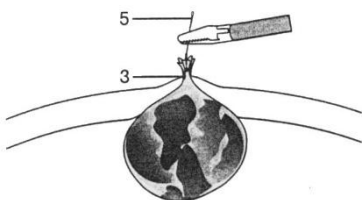

*【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 本品は、販売名「モルセレータ」(認証番号 226AKBZX00013000)と併用しないこと。
2. トロカールカニューラの径が合わないときには無理に使用しないこと。
3. 引き出す際には切開口等に絶えず注意を払うこと。
4. 本品を過度な力で引っ張らないこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

直射日光が当たる場所、湿気の多い場所をさけ、製品が破損しないように保存する。

<有効期間>

個別包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カールストルツ・エンドスコーピー・ジャパン株式会社
TEL：03-6380-8622

製造業者：KARL STORZ SE & Co. KG (カールストルツ社)
国名：Germany

添付文書番号：KSTJ - Z094