

機械器具 ５１ 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 気腹用チューブ 70353000
(送気送水チューブ 70356000)


KARL STORZ 気腹用チュービングセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

滅菌済みディスポーザブル製品（アダプター、アダプターチューブ以外）は、再使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

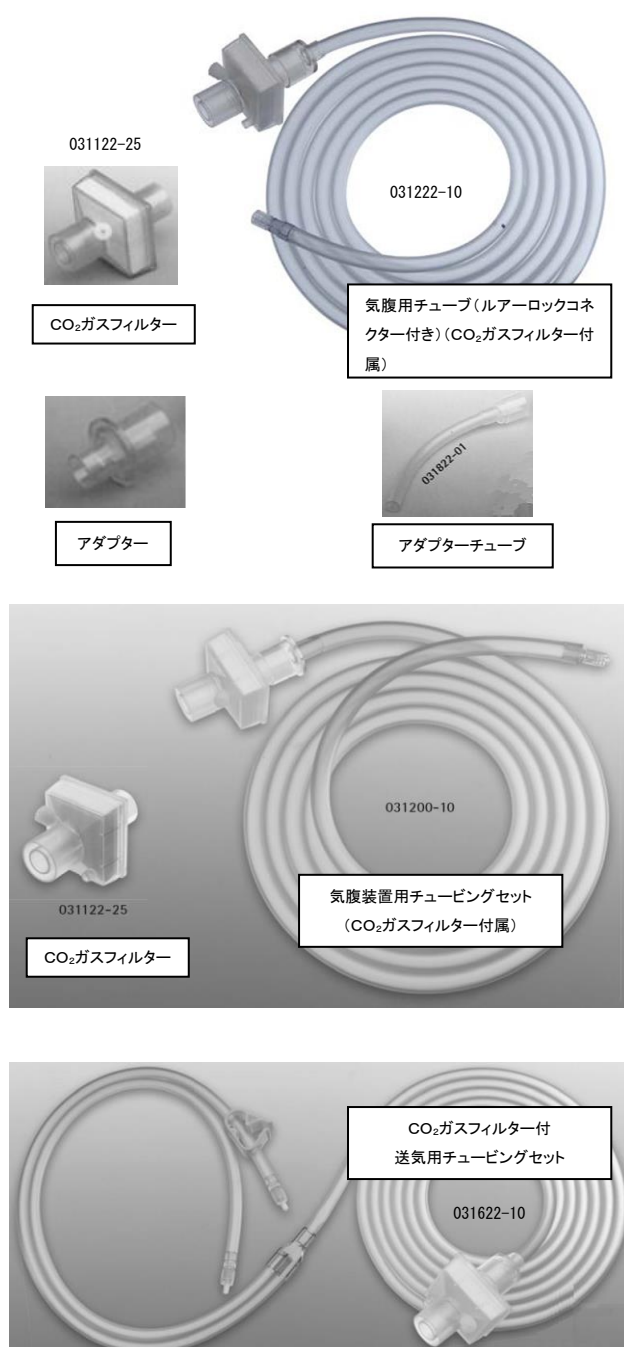

番 号	名 称	機能及び動作
031922-01	アダプター	CO ₂ ガスフィルターをサモフレーターの炭酸ガス出口に合わせるために用いる。
031922-10		
031122-01	CO ₂ ガスフィルター	体内からの逆流物質除去及び送気ガス中の微粒子除去
031122-25		
031822-01	アダプターチューブ	CO ₂ ガスフィルターの入力口を、管ニッパルタイプの気腹装置へ接続する。
031222-01	気腹用チューブ（ルアーロックコネクター付き）	気腹針又はトロカール等とCO ₂ ガスフィルターとの接続に用いる。
031222-10		
031200-01	気腹装置用チュービングセット	
031200-10		
031622-01	CO ₂ ガスフィルター付送気用チュービングセット	気腹ガスを気腹針又はトロカール等へ送るために用いる。
031622-10		

【使用目的又は効果】

本品は、気腹装置と気腹針又はトロカールとの接続、若しくは送気装置と内視鏡又は内視鏡用処置具等に用いる柔軟性のあるチューブでフィルタを含む。

【使用方法等】

※031622-10、031622-01を使用する場合は、気腹装置の流量を30L/min以下に設定して送気すること。

※ 気腹装置の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

<使用前準備>

- 滅菌済みディスポーザブル製品は滅菌包装を開けて無菌的に取り出す。
- アダプター及びアダプターチューブは包装を開けて取り出す。
- 滅菌済みディスポーザブル製品は、包装の開封、破損、汚損又はピンホール等が認められた場合は使用しないこと。

<使用中>

- 気腹装置又は送気装置の送気ガス出口にCO₂ガスフィルター及びルアーロックコネクター付チューブ/気腹装置用チュービングセット/CO₂ガスフィルター付送気用チュービングセットを接続する。必要に応じて、アダプターあるいはアダプターチューブを取り付けること。
- ルアーロックコネクター側を気腹針又はトロカール又は内視鏡又は内視鏡用処置具等と接続する。

<使用后>

- 気腹装置又は送気装置より取り外した滅菌済みディスポーザブル製品は適切な方法により廃棄を行う。同様に取り外したアダプターチューブ、アダプターは適切に洗浄後、再使用のため保管する。
- アダプター及びアダプターチューブ以外は、滅菌済みディスポーザブル製品であるため、一回限りの使用のみで再使用しないこと。

****【使用上の注意】**

<重要な基本的注意>

1. 体重 50 kg以上の成人男性、成人女性および未成年者に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光やホコリ、或いは塩分や硫黄分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などの安定状態に注意すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
5. 031222-10、031122-25、031200-10 のみ 0～40° で保管すること。

<有効期間>

個別包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カールストルツ・エンドスコープ・ジャパン株式会社
TEL：03-6380-8622

製造業者：KARL STORZ SE & Co. KG（カールストルツ社）
国名：Germany

添付文書番号：KSTJ - Z096