

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 気腹用チューブ 70353000

KARL STORZ 加温機能付気腹用チュービングセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】


本品はディスポーザブル製品であるので再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

※代表的な形状を下記に示す。

患者用吸引チューブ(滅菌済単回使用)

031210-01、031210-10

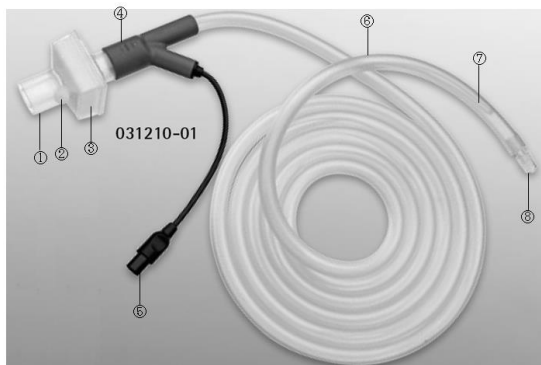

番号	名 称	機能及び動作
①	コネクティング・ポート	気腹装置の炭酸ガス出口への接続部
②	エアーポート	フィルター内部のエアー抜き(未使用)
③	フィルター	体内からの逆流物質除去及び送気ガス中の微粒子除去
④	Y字アダプタ	フィルターの出口と気腹チューブ及び熱線を繋ぐ
⑤	加温コネクタ	気腹装置の加温機能を使用する際に、加温アダプタに接続する部分
⑥	チュービング	気腹ガスを気腹針又はトロカール等へ送る
⑦	熱線	チューブを通るCO2ガスを加温する
⑧	ルアーロックコネクタ	気腹針又はトロカール等との接続に用いる

【使用目的又は効果】

本品は、気腹装置と気腹針又はトロカールとの接続に用いる柔軟性のあるチューブでフィルターを含む。

【使用方法等】

※ 気腹装置の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

＜使用前準備＞

1. 滅菌包装を開けて本品を無菌的に取り出す。
2. 包装の開封、破損、汚損又はピンホール等が認められた場合は使用しないこと。

＜使用中＞

1. 気腹装置の送気ガス出口にガスフィルターのコネクティング・ポートを接続する。
2. 加温機能を使用する場合は、気腹装置の加温アダプタに本品の加温コネクタを接続する。
3. ルアーロックコネクタ側を気腹針又はトロカール等と接続する。

＜使用後＞

1. 気腹装置より取り外し適切な方法により廃棄を行う。
2. 本品は、滅菌済ディスポーザブル製品であるため、一回限りの使用のみで再使用しないこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 接続部の径が合わないときには無理に使用しないこと。
2. コネクタ等が確実に接続されていることを確認すること。

*【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

1. 製品は 0～40℃で保管すること。
2. 水に濡れないように保管すること。
3. 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なホコリが発生する場所、空气中に塩分や硫黄分を含む場所での保管は避けること。
4. 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む。)等安定状態に注意すること。
5. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

＜有効期間＞

個別包装に記載。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者:カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社
TEL:03-6380-8622

製 造 業 者:KARL STORZ SE & Co. KG(カールストルツ社)
国 名:Germany

添付文書番号 : KSTJ - Z097